

Uwaga:

Niniejsze tłumaczenie zostało wykonane na podstawie instrukcji użycia Kuraray Noritake Dental (w języku angielskim) oraz tłumaczenie zostało przygotowane i zrewidowane przez Kuraray Noritake Dental Inc.

WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY K-ETCHANT GEL



POLSKI INSTRUKCJA UŻYCIA

I. WPROWADZENIE

K-ETCHANT GEL jest żelem wytrawiającym i składa się z 40% wodnego roztworu kwasu fosforowego i koloidalnej krzemionki.

II. WSKAZANIA

Wytrawianie szkliwa i zębiny do adhezyjnych uzupełnień protetycznych

III. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

[Instrukcje bezpieczeństwa]

1. W przypadku wystąpienia u pacjentów objawów reakcji nadwrażliwości, takich jak wysypka, wyprysk, cechy stanu zapalnego, owrzodzenie, obrzęk, świąd lub drętwienie, należy przerwać stosowanie produktu i zwrócić się o pomoc lekarską.
2. Jeśli dojdzie do kontaktu produktu z tkankami ludzkimi, należy powziąć następujące środki ostrożności:
 - <Jeśli produkt przedostanie się do oka>
Natychmiast przepłukać oko dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
 - <Jeśli dojdzie do kontaktu produktu ze skórą lub błoną śluzową jamy ustnej>
Produkt ten może powodować stan zapalny lub erozję z podrażnieniem. Natychmiast zetrzeć wacikiem zwilżonym alkoholem lub gazą, a następnie zmyć obficie wodą.
3. Należy zachować ostrożność, aby nie doszło do przypadkowego połknięcia produktu przez pacjenta.
4. Aby zapobiec zakażeniu krzyżowemu, należy unikać używania tego samego żelu lub końcówki szczoteczki u różnych pacjentów.
5. Należy nosić rękawice lub zastosować inne odpowiednie środki ochronne, aby zapobiec wystąpieniu nadwrażliwości.
6. Ten produkt należy usuwać jako odpad medyczny, aby zapobiec infekcjom.

[Środki ostrożności zalecane podczas stosowania i obsługi]

1. Tylko dyplomowani dentyści są upoważnieni do używania produktu.
2. Nie używać produktu do innych zastosowań niż wymienione w punkcie WSKAZANIA.
3. Podczas stosowania tego produktu w razie potrzeby należy zapewnić kontrolę wilgoci przez użycie koferdamu.
4. Jeśli produkt przedostanie się na ubrania, należy spłukać wodą.
5. Produkt może stwardnieć, gdy nie jest używany. W takim przypadku po wstrząśnięciu zamkniętej butelki zawartość stanie się z powrotem płynna.

[Środki ostrożności podczas przechowywania]

1. Produkt należy zużyć przed upływem terminu ważności podanego na opakowaniu.
2. Produkt należy przechowywać w temperaturze 2-25°C/36-77°F.
3. Produkt musi być przechowywany w odpowiednich miejscach, do których dostęp mają tylko lekarze stomatolodzy.

IV. KOMPONENTY

Zawartość i ilość można znaleźć na zewnętrznej stronie opakowania.

K-ETCHANT GEL

Główne składniki:

- Kwas fosforowy
- Woda
- Koloidalny dwutlenek krzemu
- Barwnik

V. POSTĘPOWANIE KLINICZNE

1. Wydzielić jedną kroplę produktu do zagłębienia miski do mieszania i nanieść go małą szczoteczką na całą powierzchnię ubytku (szkliwo i zębina).
2. Po 30-60 sekundach dokładnie zmyć i wysuszyć strzykawką z powietrzem.

[Ostrożnie]

Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do styczności śliny z wytrawioną powierzchnią zęba. Powierzchnię zęba, która uległa zanieczyszczeniu śliną itp., należy ponownie wytrawić.

[GWARANCJA]

Firma Kuraray Noritake Dental Inc. dokona wymiany każdego produktu, który okazał się być wadliwy. Firma Kuraray Noritake Dental Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody bezpośrednie, wynikowe lub szczególne, wynikające z aplikacji, stosowania lub nieumiejętności korzystania z tych produktów. Przed użyciem użytkownik powinien ustalić, czy produkty nadają się do danego celu. Użytkownik ponosi ryzyko i odpowiedzialność, które jest związane z użytkowaniem.


[UWAGA]

Poważne wypadki, które można powiązać z tym produktem, należy zgłaszać wymienionemu niżej autoryzowanemu przedstawicielowi producenta oraz odpowiednim organom regulacyjnym kraju, którego rezydentem jest użytkownik i/lub pacjent.



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

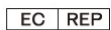

Kuraray Europe GmbH (Importer)

Philipp-Reis-Str. 4,

65795 Hattersheim am Main, Germany

Phone: +49 (0)69 305 35835 Fax: +49 (0)69 305 98 35835

URL: <https://www.kuraraynoritake.eu>



008 1561J015R-PL 06/2019