



AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC

better DENTISTRY by DESIGN®

Katalog wyrobów

LOSER & CO
Zawsze coś dobrego...



SPIS TREŚCI

Tytanowe narzędzia perio do implantów	4
Info / rękojeści	6
Info / rodzaje kiret Gracey i oznaczenia narzędzi	8
Diagnostyka (parodontometry, eksplorery, kombinacje)	9
XP Technology™ (kirety, skalery, końcówki quik-tip)	13
Instrumenty Pro Thin	15
Double Gracey XP	25
Talon Tough (kirety, skalery, końcówki quik-tip)	27
Instrumenty do kompozytu	36
Instrumenty do rekonstrukcji	40
Akcesoria	48
Organizacja i znakowanie narzędzi	49
Lusterka Crystal HD	50
ProSafe	51
Informacje	52

XP® Technology

Bez konieczności ostrzenia! Dzięki zastosowaniu rewolucyjnej technologii XP narzędzia zachowują swoją pierwotną jakość i kształt przez cały okres użytkowania. Pozwala to zaoszczędzić pieniądze oraz wysiłek na ponowne ostrzenie narzędzi. Ergonomiczne i lekkie rękojeści zapewniają komfort, kontrolę i doskonałe czucie w dotyku. Zapobiegają zmęczeniu ręki i zespołowi cieśni nadgarstka.



PATRZ STRONA 13

ProThin™

Nowa linia instrumentów perio!

Do pracy poddziąsłowej w głębokich, wąskich kieszeniach oraz naddziąsłowej przy dużych stłoczeniach zębów.

Cieńsze ostrza, technologia XP® oraz lżejsza rękojeść. Bez konieczności ostrzenia. Niezmieniony kształt ostrza przy ciągłym użyciu. Zwiększone wycucie podczas pracy.



PATRZ STRONA 15

INSTRUMENTY DO KOMPOZYTÓW w XP® Technology

Dzięki zastosowaniu rewolucyjnej XP Technology, instrumenty zyskały gładszą niż kiedykolwiek wcześniej powierzchnię, która skutecznie zapobiega przyklejaniu się kompozytów.



PATRZ STRONA 36

DOUBLE GRACEY™ xp®


The Next Generation

Dzięki rewolucyjnej technologii XP American Eagle wprowadził nową linię instrumentów periodontologicznych pozwalających na efektywną pracę w odcinku przednim lub bocznym tylko 1 instrumentem. Double Gracey to 2 maksymalnie cienkie instrumenty z 2 krawędziami tnącymi pod kątem 70°, które zachowują swą pierwotną ostrość i kształt przez cały okres użytkowania oraz zastępują zestaw tradycyjnych kiret Gracey. Nie wymagają ostrzenia!

PATRZ STRONA 25

TYTANOWE NARZĘDZIA PERIO DO IMPLANTÓW

- Niezwykle wytrzymały stop tytanu
- Nie powodują uszkodzeń implantów
- Kompatybilne z wszystkimi implantami tytanowymi
- Ergonomiczna rękojeść EagleLite zapobiega zmęczeniu ręki

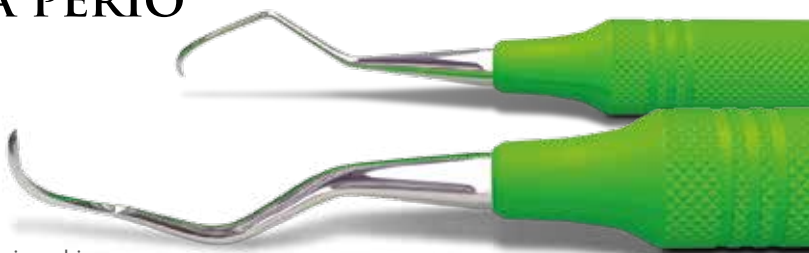

PATRZ STRONA 4

KASETY DO PRZECHOWYWANIA INSTRUMENTÓW

Stosowanie kaset przedłuża żywotność instrumentów, skraca czas czyszczenia i sortowania oraz zwiększa bezpieczeństwo personelu. Kasety produkowane są w 16 kolorach, 3 rozmiarach i posiadają zabezpieczenie antybakteryjne.



PATRZ STRONA 49



NARZĘDZIA PERIO DO IMPLANTÓW

- Niezwykle wytrzymały stop tytanu
- Nie powodują uszkodzeń implantów
- Kompatybilne z wszystkimi implantami tytanowymi
- Ergonomiczna rękojeść *EagleLite* zapobiega zmęczeniu ręki

narzędzia perio do implantów	5
kit – narzędzia + kaseta	5

NARZĘDZIA PERIO DO IMPLANTÓW

Każda tytanowe
narzędzie do implantów
364 PLN



4 NARZĘDZIA PERIO DO
IMPLANTÓW + KASETA
E-Z JETT MAŁA
AEIIPK
1.456 PLN

NARZĘDZIA PERIO DO IMPLANTÓW

Inteligentne narzędzia do efektywnego czyszczenia implantów. Wykonane z niezwykle wytrzymałego stopu tytanu, umożliwiając delikatne usuwanie złogów kamienia i ziarnistej tkanki miękkiej z wszelkich powierzchni implantów. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego tytanu narzędzia nie naruszają powierzchni implantów. Swoją delikatność zawdzięczają też zaokrąglonym końcówkom pracującym, narzędzia działają w sposób o wiele mniej inwazyjny.

Ergonomiczne uchwyty skutecznie zapobiegają zmęczeniu i skurczom dłoni, dając tym samym duży komfort pracy.

RĘKOJEŚCI DO NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH



7/32" - 5,6mm stal szlachetna, dwustronna (Standard)



3/8" - 9,5mm EagleLite tworzywo (czarne), dwustronna (X)



7/32" - 5,6mm stal szlachetna, jednostronna (Standard)



3/8" - 9,5mm EagleLite tworzywo (czarne), jednostronna (X)

RĘKOJEŚCI DO LUSTEREK

AEMHR
1/4" - 6,3mm stal szlachetna S.S., okrągła (Standard)**98 PLN**AEMHRX
3/8" - 9,5mm EagleLite tworzywo (czarne) S.S., okrągła (X)**108 PLN**AEMHT
1/4" - 6,3mm stal szlachetna S.S., stożkowa (Standard)**98 PLN**AEMHTX
3/8" - 9,5mm EagleLite tworzywo (czarne) S.S., stożkowa (X)**108 PLN**

RĘKOJEŚCI DO NARZĘDZI DO KOMPOZYTÓW



1/4" - 6,3mm stal szlachetna (Standard)



3/8" - 9,5mm EagleLite stal szlachetna (Z)

RĘKOJEŚCI DO NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI



1/4" - 6,3mm stal szlachetna (Standard)

PIERŚCIENIE DO ZNAKOWANIA E-Z ID



PIERŚCIENIE E-Z ID (25 pierścieni)

Kolory: A-S

70Z100(A-S) Pierścienie 25 szt. (Ø 3 mm) **37 PLN**70Z200(A-S) Pierścienie 25 szt. (Ø 6 mm) **37 PLN**70Z000(A-S) Pierścienie 25 szt. (Ø 9 mm) **37 PLN**Na zamówieniu należy wpisać kod koloru pierścieni po numerze artykułu (patrz kody kolorów). Np. **niebieskie** pierścienie EZ-ID (opakowanie pojedyncze - Ø 6 mm) = 70Z200B.

ASORTYMENT PIERŚCIENI E-Z ID (8x25 pierścieni)

Asortyment „Classic” – Kolory: 2x A, 2x B, 2x D, 1x G, 1x I

Asortyment „Metalic” – Kolory: 1x I, 1x J, 2x E, 1x M, 2x T, 1x U

Asortyment „Neon” – Kolory: 1x N, 1x O, 1x P, 1x Q, 2x R, 2x S

Rozmiar	Classic	Metalic	Neon	Cena
Small (Ø 3mm)	70Z105	70Z115	70Z110	260 PLN
Large (Ø 6mm)	70Z205	70Z215	70Z210	260 PLN
X-Large (Ø 9mm)	70Z005	70Z315	70Z010	260 PLN



A	B	D	G	E	I	J	M	T	U	N	O	P	Q	R	S
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RĘKOJEŚCI DO KIRET I SKALERÓW

X

niezwykle lekkie (12 g), kolorowe rękojeści EagleLite™ ułatwiają szybką identyfikację narzędzi i pozwalają na indywidualny dobór.



3/8" - 9,5mm EagleLite rękojeści z tworzywa (X)

Z

EagleLite™ rękojeści ze stali szlachetnej.





3/8" - 9,5mm EagleLite rękojeść ze stali szlachetnej (Z)




1/4" - 6,3mm rękojeść ze stali szlachetnej, mały rozmiar (S)
Do założenia tylko jednej końcówki.

BUDOWA KOŃCÓWEK INSTRUMENTÓW RĘCZNYCH

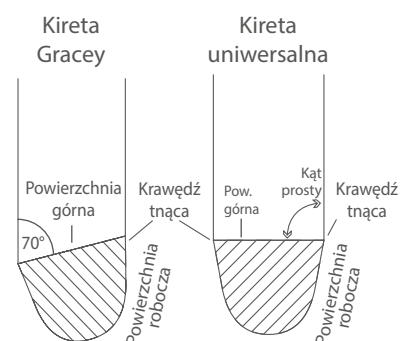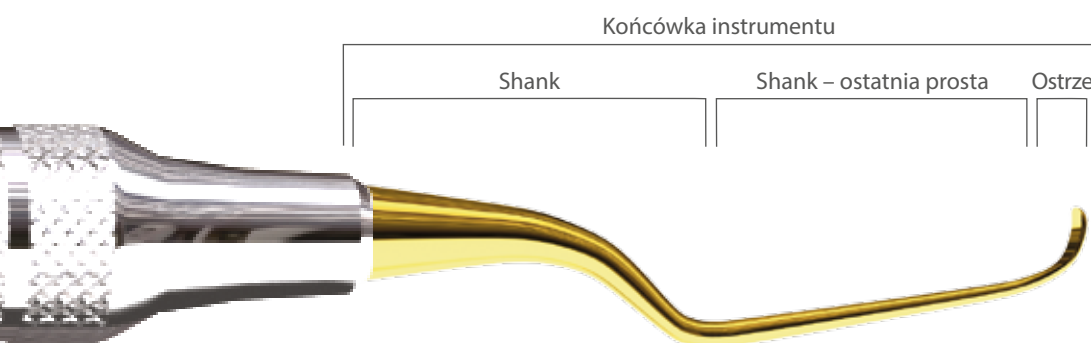

RODZAJE KIRET GRACEY

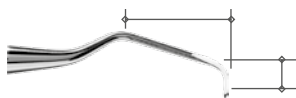


KIRETY GRACEY STANDARD

przeznaczone są do pracy poddziąsłowej: usuwania złożeń oraz wygładzania powierzchni korzeni. Numer kirety wskazuje obszar pracy. Kształt oraz kąt ostrza ułatwia wprowadzenie w szczelinę / kieszonkę i minimalizuje urazy tkanek.



KIRETY GRACEY DEEP POCKET

dzięki wydłużeniu o 3 mm ostatniej prostej, narzędzie może być stosowane do czyszczenia i wygładzania korzeni w kieszonkach głębszych niż 5 mm.

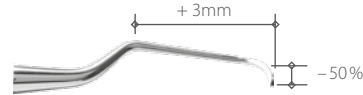

KIRETY GRACEY ACCESS

dzięki skróconemu o połowę ostrzu i wydłużeniu ostatniej prostej, całe ostrze narzędzia przylega do powierzchni korzenia. Kireta ta doskonale nadaje się do pracy w wąskich, głębokich kieszonkach i furkacjach korzeni.

OZNACZENIA NARZĘDZI

SEKCJA A

AE = American Eagle

SEKCJA B - rodzaj instrumentu

DIAGNOSTYKA

EXP = Zgłębnik (eksplorator) P = Zgłębnik periodontologiczny (parodontometr)
EP = Zgłębnik/Zgłębnik perio PL = Pęseta
MH = Rękojeść lusterka M = Lusterko
U = Ultradźwięki

PERIODONTOLOGIA / HIGIENA

C = Kireta uniwersalna S = Skaler
GA = Kireta Gracey Access G = Kireta Gracey
GDP = Kireta Gracey Deep Pocket F = Pilnik
II = Narzędzia perio do implantów

KOMPOZYTY/WYPEŁNIENIA KOMPOZYTOWE

TC = Stop twardy C = Kompozyt
CC = Nakładacz do kompozytów

ZABIEGI OPERACYJNE

CADC = Narzędzie do skrawania / Discoid-Cleoid
C/P = Narzędzie do kondensacji / Upychadło
C = Dłutko
MT = Przycinacz dziąsła
AC = Nakładacz do amalgamatu

POZOSTAŁE

K = Nożyk P = Upychacz do nitów
CSP = Łopatką do cementu W = Narzędzie do wosku
E = Narzędzie endodontyczne

CA = Odcinacz (Carver)
AF = Narzędzie do kształtowania kątów
HA = Ścinacz szklawa
EXC = Ekskawatory
B = Wygładzacz

CAIPC = Karwer

Znajomość symboli występujących w numerze artykułu ułatwi zamówienie.

Numer artykułu

Sekcja A	Sekcja B	Sekcja C	Sekcja D

A E S H 6 - 7 X P X

Proszę nie wprowadzać spacji pomiędzy znakami w numerze artykułu.



SEKCJA C - Numer narzędzia

QT = Quik-Tip™
XP = XP Technology™

SEKCJA D - Oznaczenie rękojeści

X = 3/8" EagleLite™ Rękojeść z tworzywa sztucznego
Z = 3/8" EagleLite™ EagleLite™ Rękojeść ze stali szlachetnej



DIAGNOSTYKA

- Precyzyjna podziałka ułatwia kontrolę głębokości
- Ergonomiczne rękojeści zwiększają komfort pracy
- Niezwykle mocne i wytrzymałe






sondy periodontologiczne (parodontometry)	10
zgłębniki (eksplorery)	11
Kombinacje eksplorery / parodontometr.....	12

RĘKOJEŚCI

7/32" - 5,6mm stal szlachetna (Standard)



3/8" - 9,5mm EagleLite tworzywo, czarne (X)

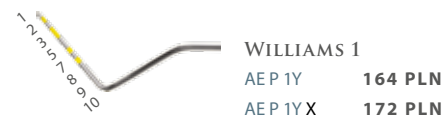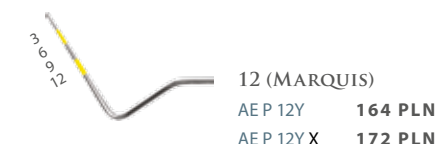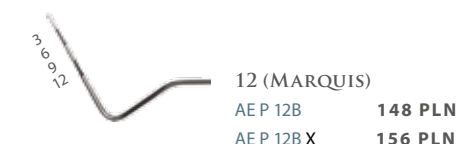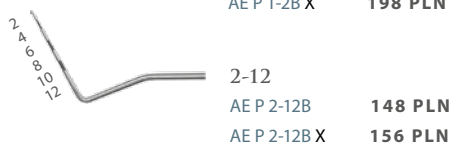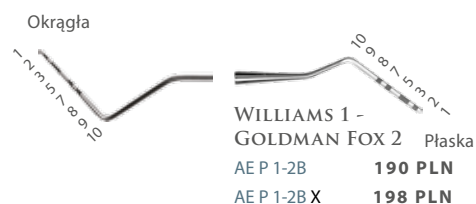

PRECYZYJNA

Sondy periodontologiczne firmy American Eagle Instruments® są niezwykle precyzyjnymi narzędziami i umożliwiają dokładne pomiary. Dostępne są z czarnymi, żółtymi lub żółto-zielonymi znacznikami. Znaczniki pozwalają to zapewnić optymalną widoczność. Podziałki na wszystkich zgłębnikach periodontologicznych kalibrowane są w milimetrach.



RĘKOJEŚCI

7/32" - 5,6mm stal szlachetna (Standard)



SHEPARD'S HOOK 23
AE EXP 23 91 PLN

3/8" - 9,5mm EagleLite tworzywo, czarne (X)




SHEPARD'S HOOK 23
AE EXP 23 X 98 PLN




TRWAŁOŚĆ


Zgłębniki (eksplorery) firmy American Eagle Instruments® są niezwykle precyzyjne i wytrzymałe. Wykonywane ze specjalnego metalu, pozwalającego uzyskać bardzo cienkie i ostre końcówki, gwarantują lepsze czucie narzędzia podczas pracy.

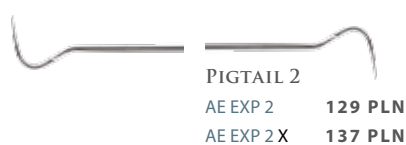

PIGTAIL 2
AE EXP 2 129 PLN
AE EXP 2 X 137 PLN

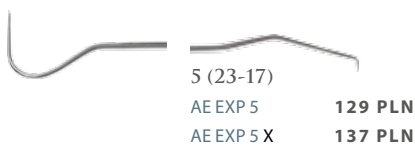

5 (23-17)
AE EXP 5 129 PLN
AE EXP 5 X 137 PLN

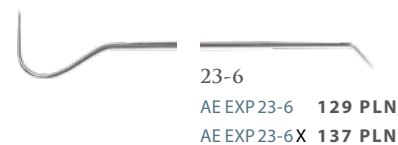


23-6
AE EXP 23-6 129 PLN
AE EXP 23-6 X 137 PLN



COW HORN 3CH
AE EXP 3CH 129 PLN
AE EXP 3CH X 137 PLN



DEEP POCKET 11-12
AE EXP 11-12DP 129 PLN
AE EXP 11-12DP X 137 PLN

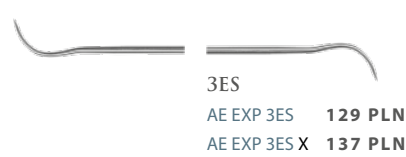

3ES
AE EXP 3ES 129 PLN
AE EXP 3ES X 137 PLN



3
AE EXP 3 91 PLN
AE EXP 3 X 98 PLN



6 SE
AE EXP 6SE 91 PLN
AE EXP 6SE X 98 PLN



9
AE EXP 9 91 PLN
AE EXP 9 X 98 PLN



ODU 11-12 OLD DOMINION U.
AE EXP 11-12 129 PLN
AE EXP 11-12 X (Zdjęcie) 137 PLN




RÓŻNORODNOŚĆ

Kombinacje sondy i explorera firmy American Eagle Instruments® spełniają oczekiwania każdego lekarza. Ułatwiają diagnostykę i zebranie dokładnych wyników badania. Wszystkie podziałki na sondach są kalibrowane w milimetrach.

RĘKOJEŚCI

7/32" - 5,6mm stal szlachetna (Standard)

3/8" - 9,5mm EagleLite tworzywo sztuczne, czarne (X)

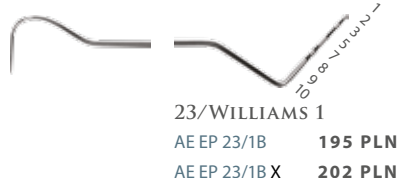

PIELĘGNACJA SOND Z KOLOROWYMI ZNACZNIKAMI

Należy unikać czyszczenia ultradźwiękami. Znaczniki Hi-Lite rozpuszczają się pod wpływem ultradźwięków! Zalecamy ręczne czyszczenie zgłębników z użyciem łagodnego środka czyszczącego. Nie należy sterylizować w temperaturze powyżej 150°C, ponieważ znaczniki Hi-Lite mogą się odbarwić.




XP TECHNOLOGY™

- Bez konieczności ostrzenia!
- Cieńsze końcówki robocze
- Ostrzejsze
- Szybsze, łatwiejsze leczenie
- Większy komfort, mniejsze zmęczenie



opis technology xp.....	14
xp instrumenty pro thin.....	15
xp kirety gracey standard, mesial / distal (MD).....	17
xp kirety gracey deep pocket (DP), access (A).....	18
xp kirety uniwersalne.....	19
xp skalery.....	20
zestawy golden eagle.....	21
xp końcówki quik-tip™.....	22
xp kirety double gracey, xp double gracey quik-tip™ ..	25

TECHNOLOGIA XP

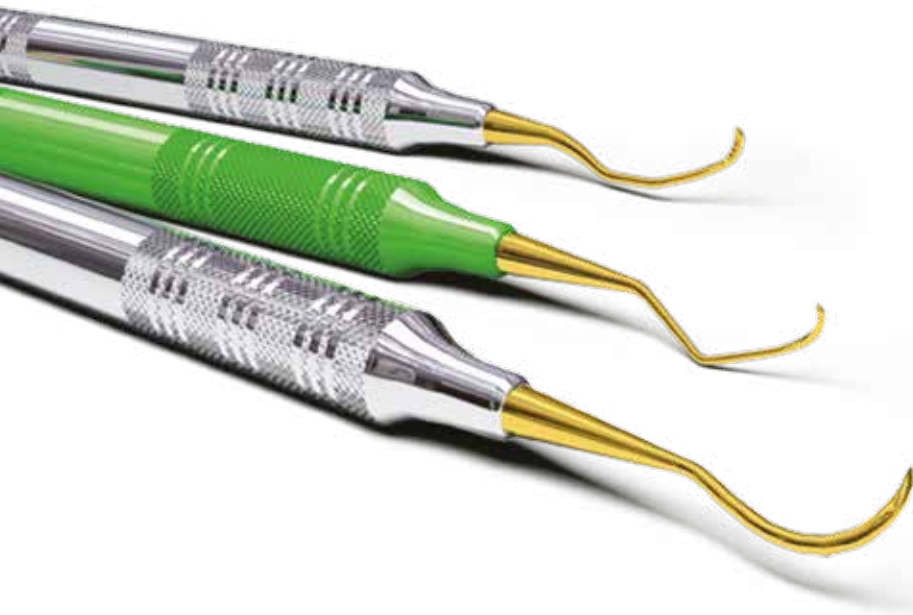

BEZ KONIECZNOŚCI OSTRZENIA!

Technologia XP jest opatentowaną metodą obróbki metali, w której rdzeń narzędzia, wykonany ze stali szlachetnej, pokrywany jest w specjalny sposób supertwardym stopem. Dzięki tej metodzie możliwe staje się wytwarzanie cieńszych, trwalszych i ostrzejszych narzędzi. Zbędne staje się czasochłonne ostrzenie. Niezależne badania oceniły technologię XP jako rewolucyjny postęp technologiczny w branży dentystycznej.

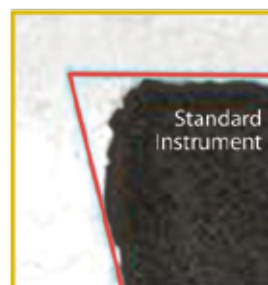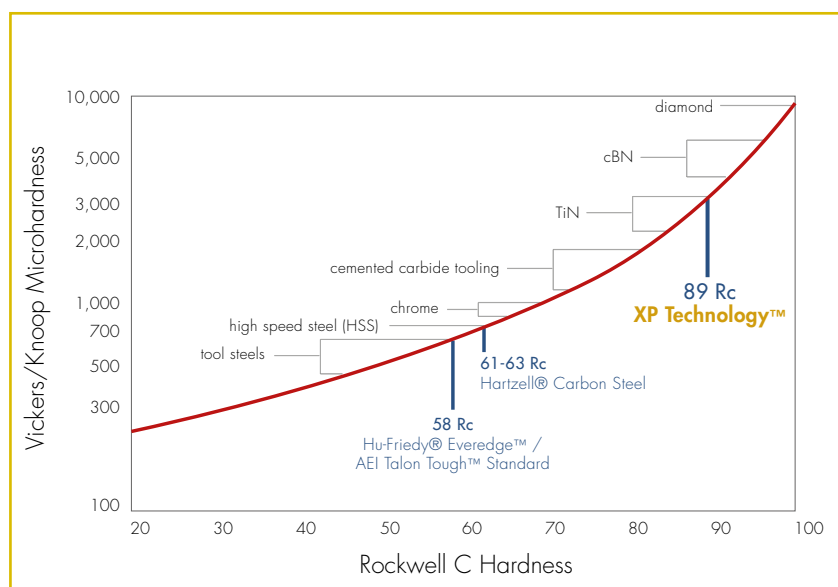

1.500
pociągnięć

Badania: University of Toronto, Dr. Phillip A. Watson,
Dept. of Biological and Diagnostic Sciences.



15.000
pociągnięć

Twierdź: 89 Rc

Tradycyjne narzędzia wykonywane są ze stali szlachetnej lub stali węglowej, a ich stopień twierdzy w skali Rockwella wynosi od 58 do 63. Technologia XP pozwala uzyskać twierdź 89 Rc! Narzędzia w technologii XP są bardziej wytrzymałe!

15.000 pociągnięć: stokrotne obciążenie

Dr Phillip Watson z uniwersytetu w Toronto udowodnił, że pod względem trwałości narzędzia w technologii XP znacząco przewyższają standardowe narzędzia.

INSTRUMENTY PRO THIN

NOWOŚĆ

SKALER M23 PRO THIN



AE S M23T XP X

Posterior / interproximal / universal



SKALER BLACKJACK PRO THIN



AE S BJT XP X

Anterior / interproximal / posterior



KIRETY BARNHART 5-6 PRO THIN



AE C B5-6T XP X

Posterior / universal



KIRETY GRACEY ACCESS 1-2 PRO THIN



AE GA 1-2T XP X

Anterior



KIRETY GRACEY ACCESS 7-8 PRO THIN



AE GA 7-8T XP X

Premolar / molar



KIRETY GRACEY ACCESS 13-14 PRO THIN



AE GA 13-14T XP X

Posterior distal



KIRETY GRACEY ACCESS 15-16 PRO THIN (ZASTĘPUJE 11-12)



AE GA 15-16T XP X

Posterior mesial

Każde kompletne
narzędzie XP
344 PLN



PRO THIN

Co sprawia, że Pro Thin są idealnymi narzędziami ręcznymi?

Cieńsze ostrza, technologia XP® i lżejsza rączka. Bez konieczności ostrzenia.

Niezmieniony kształt ostrza przy ciągłym użyciu. Zwiększone wycucie podczas pracy instrumentem.

Instrumenty te zostały zaprojektowane tak, aby dostosować się do różnych wymagań i wyzwań podczas wykonywania skalingu oraz root planingu.

Od głębokich, wąskich kieszeni dziąsłowych po ciasne punkty styczne.

Wszystkie te cechy zapewniają konsekwentną opiekę nad pacjentem i optymalne rezultaty.

Każda końcówka
Quik-Tip XP
129 PLN

PRO THIN QUIK-TIP



M23 THIN A
XP QUIK-TIP

● AESM23TAXPQT

Universal posterior



M23 THIN B
XP QUIK-TIP

● AESM23TBXPQT

Universal posterior



BLACKJACK THIN A
XP QUIK-TIP

● AESBJTAXPQT

Anterior / interproximal / posterior



BLACKJACK THIN B
XP QUIK-TIP

● AESBJTBXPQT

Anterior / interproximal / posterior



BARNHART 5 THIN
XP QUIK-TIP

● AECB5TAXPQT

Posterior / interproximal



BARNHART 6 THIN
XP QUIK-TIP

● AECB6TAXPQT

Posterior / interproximal



GRACEY ACCESS 1
XP QUIK-TIP

● AEGA1TAXPQT

Anterior



GRACEY ACCESS 2
XP QUIK-TIP

● AEGA2TAXPQT

Anterior



GRACEY ACCESS 7
XP QUIK-TIP

● AEGA7TAXPQT

Pre-molar / molar



GRACEY ACCESS 8
XP QUIK-TIP

● AEGA8TAXPQT

Pre-molar / molar



GRACEY ACCESS 13
XP QUIK-TIP

● AEGA13TAXPQT

Posterior distal



GRACEY ACCESS 14
XP QUIK-TIP

● AEGA14TAXPQT

Posterior distal



GRACEY ACCESS 15
XP QUIK-TIP

● AEGA15TAXPQT

Posterior mesial



GRACEY ACCESS 16
XP QUIK-TIP

● AEGA16TAXPQT

Posterior mesial

QUIK-TIPS

Nowe rewolucyjne instrumenty Pro Thin zostały zaprojektowane również w wersji Quik-Tip.

Wymienne końcówki Quik-Tip pozwalają na dowolną kompozycję części pracujących oraz wymianę pojedynczej strony bez konieczności zakupu całego instrumentu. Są korzystne cenowo oraz przyjazne dla środowiska.

Pro Thin Quik-Tip to zupełnie nowy standard opieki periodontologicznej. Końcówki robocze Quik-Tip XP nie wymagają ostrzenia!

Każda rękojeść
Quik-Tip
96 PLN

RĘKOJEŚCI



AEQTHB



AEQTHG



AEQTHO



AEQTHP



AEQTW (Quik-Tip klucz do dokręcania)
96 PLN



AEQTHR



AEQTHX



AEQTHY



AEQTHZ



AEMHRX
(jednostronna)
108 PLN

RĘKOJEŚCI

3/8" - 9.5mm EagleLite® kolorowe tworzywo, dwustronna* (X)



3/8" - 9.5mm EagleLite® stal szlachetna (Z)



RĘKOJEŚCI EAGLELITE®

Ergonomiczne i lekkie rękojeści zapewniają komfort, kontrolę i doskonałe czucie. Zapobiegają zmęczeniu ręki i zespołowi cieśni nadgarstka. Rękojeści ze stali szlachetnej i z tworzywa można sterylizować standardowymi metodami.

* Kolor rękojeści: patrz dany typ narzędzia.

XP GRACEY STANDARD



GRACEY 1-2 XP



AE G 1-2 XP X



AE G 1-2 XP Z

Anterior



GRACEY 3-4 XP



AE G 3-4 XP X



AE G 3-4 XP Z

Anterior



GRACEY 5-6 XP



AE G 5-6 XP X



AE G 5-6 XP Z

Anterior



GRACEY 7-8 XP



AE G 7-8 XP X



AE G 7-8 XP Z

Premolar / molar



GRACEY 9-10 XP



AE G 9-10 XP X



AE G 9-10 XP Z

Premolar / molar



GRACEY 15-16 XP



AE G 15-16 XP X



AE G 15-16 XP Z

Posterior mesial



GRACEY 11-12 XP



AE G 11-12 XP X



AE G 11-12 XP Z (Zdjęcie)

Posterior mesial



GRACEY 13-14 XP



AE G 13-14 XP X



AE G 13-14 XP Z (Zdjęcie)

Posterior distal

Każde kompletne
narzędzie XP
344 PLN



GRACEY 17-18 XP



AE G 17-18 XP X



AE G 17-18 XP Z

Posterior distal

EFEKTYWNOŚĆ

Narzędzia M-D (mezial/distal) służą do skutecznego opracowywania powierzchni zębów w odcinkach bocznych bez konieczności zmiany instrumentu.

XP GRACEY MESIAL-DISTAL



GRACEY 11-14MD XP



AE G 11-14 XP X



AE G 11-14 XP Z



GRACEY 12-13MD XP



AE G 12-13 XP X



AE G 12-13 XP Z

Porada:

Wypróbuj zestaw Golden Eagle 2, który składa się z kiret Gracey 11-12 i 13-14. Idealna kombinacja do zabiegów w obszarze zębów bocznych.

- AEGEK2XPX **688 PLN**
- AEGEK2XPZ **688 PLN**

Więcej informacji na temat zestawów Golden Eagle na stronie 21.

XP GRACEY ACCESS (SHANK + 3 MM, OSTRZE - 50 %)

 GRACEY ACCESS 00-0 XP AE GA 00-0 XP X AE GA 00-0 XP Z Anterior	 GRACEY ACCESS 1-2 XP AE GA 1-2 XP X AE GA 1-2 XP Z Anterior	 GRACEY ACCESS 3-4 XP AE GA 3-4 XP X AE GA 3-4 XP Z Anterior
 GRACEY ACCESS 5-6 XP AE GA 5-6 XP X AE GA 5-6 XP Z Anterior	 GRACEY ACCESS 7-8 XP AE GA 7-8 XP X AE GA 7-8 XP Z Premolar / molar	 GRACEY ACCESS 11-12 XP AE GA 11-12 XP X AE GA 11-12 XP Z Posterior mesial
 GRACEY ACCESS 13-14 XP AE GA 13-14 XP X AE GA 13-14 XP Z Posterior distal	 GRACEY ACCESS 15-16 XP AE GA 15-16 XP X AE GA 15-16 XP Z Posterior mesial	Każde kompletne narzędzie XP 344 PLN

XP GRACEY DEEP POCKET (SHANK + 3 MM)











 GRACEY DP 1-2 XP AE GDP 1-2 XP X AE GDP 1-2 XP Z Anterior	 GRACEY DP 3-4 XP AE GDP 3-4 XP X AE GDP 3-4 XP Z Anterior	 GRACEY DP 5-6 XP AE GDP 5-6 XP X AE GDP 5-6 XP Z Anterior
 GRACEY DP 7-8 XP AE GDP 7-8 XP X AE GDP 7-8 XP Z Premolar / molar	 GRACEY DP 11-12 XP AE GDP 11-12 XP X AE GDP 11-12 XP Z Posterior mesial	 GRACEY DP 13-14 XP AE GDP 13-14 XP X AE GDP 13-14 XP Z Posterior distal
 GRACEY DP 15-16 XP AE GDP 15-16 XP X (Zdjęcie) AE GDP 15-16 XP Z Posterior mesial		

DOSTĘP

Dzięki przedłużeniu instrumentu o 3 mm narzędzie można stosować do pracy w kieszonkach głębszych niż 5 mm. Krótkie ostrze kirety Access pozwala na lepszy dostęp do wąskich i głębokich kieszonek poddziąsłowych.

Każde kompletne
narzędzie XP
344 PLN

XP KIRETY UNIWERSALNE

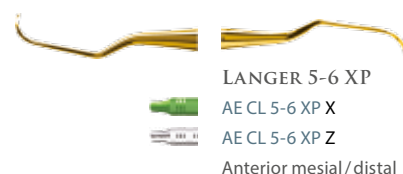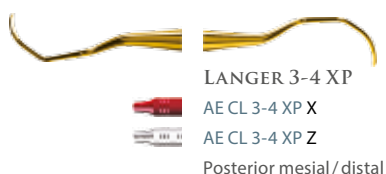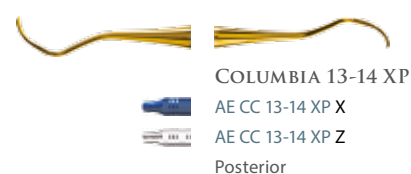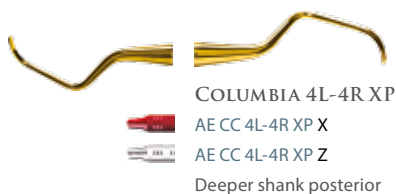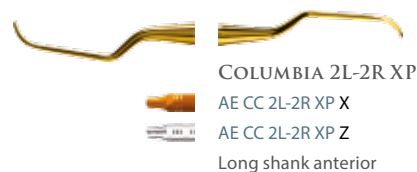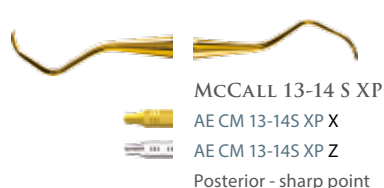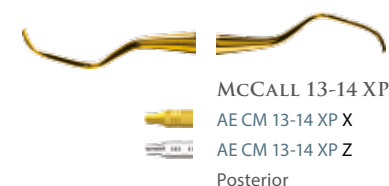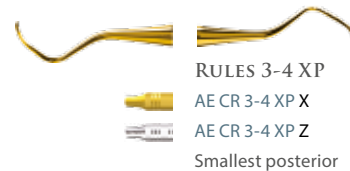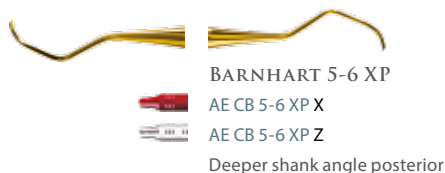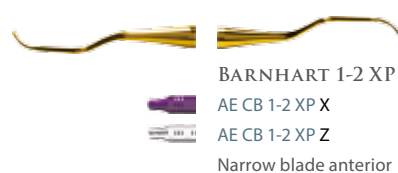BEZ KONIECZNOŚCI
OSTRZENIA!

Kirety i skalery XP pozostają ostre przez cały czas użytkowania. Pozwalają zaoszczędzić pieniądze, wysiłek oraz czas potrzebny na ponowne ostrzenie narzędzi.




XP SKALERY

Każde kompletne
narzędzie XP
344 PLN


Nowość!

BOGE 513™


Boge 513™ to zmodyfikowany skaler Hoe. Ze względu na kąt wygięcia instrumentu jego ostrzenie jest praktycznie niewykonalne. Kształt i funkcjonalność instrumentu możliwa jest tylko w technologii XP, która uwalnia instrumenty periodontologiczne z czasochłonnego i kłopotliwego ostrzenia. Z jednej strony Boge 513™ ma wydłużony shank i prostą, lekko zakrzywioną krawędź tnącą. Szerokość tej części instrumentu została zaprojektowana tak, aby utrzymać jego prawidłową stabilizację podczas ruchów pionowych i poziomych. Z drugiej strony instrumentu znajduje się jednostronny skaler Nebraska 128 przeznaczony do pracy w odcinku przednim.

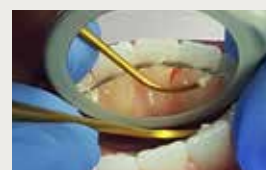

BOGE 513 XP
AE S B513 XP X
AE S B513 XP Z
Universal

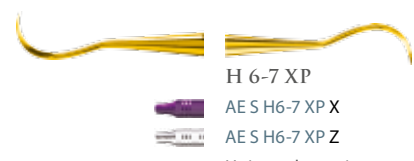

H 6-7 XP
AE S H6-7 XP X
AE S H6-7 XP Z
Universal anterior

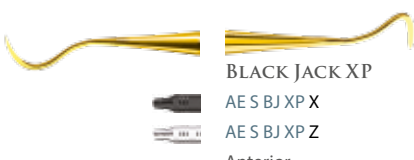

BLACK JACK XP
AE S BJ XP X
AE S BJ XP Z
Anterior



CURALER - N137 XP
AE S N137 XP X
AE S N137 XP Z
Anterior



H 5-33 XP
AE S H5-33 XP X
AE S H5-33 XP Z
Anterior




J3-U5 XP
AE S J3-U5 XP X
AE S J3-U5 XP Z
Anterior



J14-15 XP
AE S J14-15 XP X
AE S J14-15 XP Z
Posterior



EAGLE CLAW™
AE SEC XP X
AE SEC XP Z
Posterior

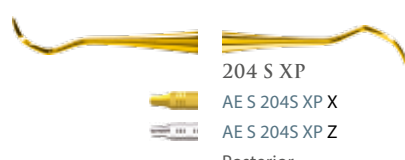

204 S XP
AE S 204S XP X
AE S 204S XP Z
Posterior




M23 XP
AE S M23 XP X
AE S M23 XP Z
Posterior



U15-30 XP
AE S U15-30 XP X
AE S U15-30 XP Z
Anterior




N128 DE XP
AE S N128 DE XP X
AE S N128 DE XP Z
Anterior

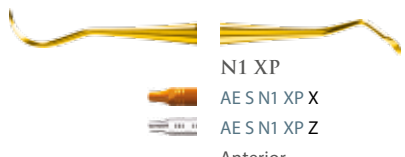

N1 XP
AE S N1 XP X
AE S N1 XP Z
Anterior



EAGLE TALON™
AE SET XP X
AE SET XP Z
Anterior

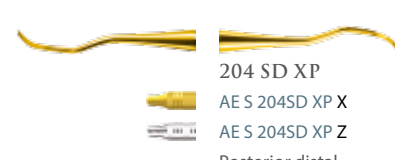


204 SD XP
AE S 204SD XP X
AE S 204SD XP Z
Posterior distal




311-312 XP
AE S 311-312 XP X
AE S 311-312 XP Z
Anterior



U15-33 XP
AE S U15-33 XP X
AE S U15-33 XP Z
Anterior

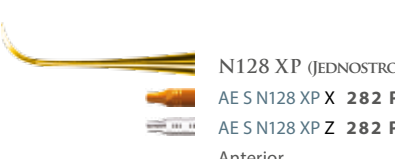

N128 XP (JEDNOSTRONNY)
AE S N128 XP X **282 PLN**
AE S N128 XP Z **282 PLN**
Anterior

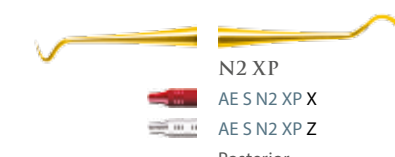

N2 XP
AE S N2 XP X
AE S N2 XP Z
Posterior

ZESTAW GOLDEN EAGLE 1



688 PLN



SKALER EAGLE CLAW™ XP Posterior



SKALER EAGLE TALON™ XP Anterior

ZESTAW 1 Z RĘKOJEŚCIĄ Z TWORZYWA
Nr artykułu: AE GEK 1 XP X

EFEKTYWNOŚĆ

Cienka sierpowata końcówka skalera Eagle Claw nadaje się optymalnie do powierzchni dystalnych, naddziąsłowych i stycznych. Eagle Talon™ uzupełnia skalera Claw o kombinację

dwoch końcówek do obszaru przedniego - J3 (Jaquette) i N128. Ten szpiczasty, sierpowaty skalera nadaje się idealnie do usuwania kamienia i osadów w obszarze zębów przednich.

ZESTAW GOLDEN EAGLE 2



688 PLN



GRACEY 11-12 XP Posterior mesial



GRACEY 13-14 XP Posterior distal

ZESTAW 2 Z RĘKOJEŚCIĄ Z TWORZYWA
Nr artykułu: AE GEK 2 XP X

ZESTAW GOLDEN EAGLE 6



688 PLN



SKALER BLACKJACK XP Anterior




SKALER M23 XP Posterior

ZESTAW 6 Z RĘKOJEŚCIĄ Z TWORZYWA
Nr artykułu: AE GEK 6 XP X

KOŃCÓWKI QUIK-TIP™

Końcówki Quik-Tip zastępują pojedyncze końcówki robocze, bez potrzeby wymiany całego narzędzia. Dzięki nim można znacznie zredukować koszty. Końcówki Quik-Tip XP nie wymagają ostrzenia.

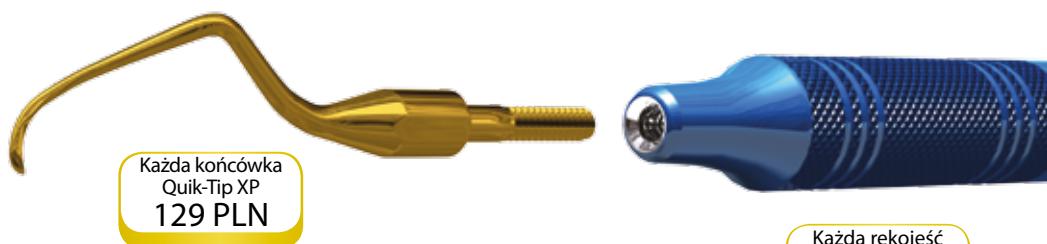

Każda końcówka
Quik-Tip XP
129 PLN

Każda rękojeść
Quik-Tip
96 PLN

RĘKOJEŚCI



AEQTHB



AEQTHG



AEQTHO



AEQTHP



AEQTW (Quik-Tip kluczyk do dokręcania)
96 PLN



AEQTHR



AEQTHX



AEQTHY



AEQTHZ



AEMHRX
(jednostronna)
108 PLN

XP GRACEY STANDARD QUIK-TIP



GRACEY 1 XP QT
AE G 1 XP QT
Anterior



GRACEY 2 XP QT
AE G 2 XP QT
Anterior



GRACEY 3 XP QT
AE G 3 XP QT
Anterior



GRACEY 4 XP QT
AE G 4 XP QT
Anterior



GRACEY 5 XP QT
AE G 5 XP QT
Anterior



GRACEY 6 XP QT
AE G 6 XP QT
Anterior



GRACEY 7 XP QT
AE G 7 XP QT
Premolar / molar



GRACEY 8 XP QT
AE G 8 XP QT
Premolar / molar



GRACEY 9 XP QT
AE G 9 XP QT
Contra angle molar



GRACEY 10 XP QT
AE G 10 XP QT
Contra angle molar



GRACEY 11 XP QT
AE G 11 XP QT
Posterior mesial



GRACEY 12 XP QT
AE G 12 XP QT
Posterior mesial



GRACEY 13 XP QT
AE G 13 XP QT
Posterior distal



GRACEY 14 XP QT
AE G 14 XP QT
Posterior distal



GRACEY 15 XP QT
AE G 15 XP QT
Posterior mesial



GRACEY 16 XP QT
AE G 16 XP QT
Posterior mesial



GRACEY 17 XP QT
AE G 17 XP QT
Posterior distal



GRACEY 18 XP QT
AE G 18 XP QT
Posterior distal

XP GRACEY ACCESS QUIK-TIP (SHANK + 3 MM, OSTRZE – 50 %)



GRACEY A 00 XP QT
AE GA 00 XP QT
Anterior



GRACEY A 0 XP QT
AE GA 0 XP QT
Anterior



GRACEY A 1 XP QT
AE GA 1 XP QT
Anterior



GRACEY A 2 XP QT
AE GA 2 XP QT
Anterior



GRACEY A 3 XP QT
AE GA 3 XP QT
Anterior



GRACEY A 4 XP QT
AE GA 4 XP QT
Anterior



GRACEY A 5 XP QT
AE GA 5 XP QT
Anterior



GRACEY A 6 XP QT
AE GA 6 XP QT
Anterior



GRACEY A 7 XP QT
AE GA 7 XP QT
Premolar / molar



GRACEY A 8 XP QT
AE GA 8 XP QT
Premolar / molar



GRACEY A 11 XP QT
AE GA 11 XP QT
Posterior mesial



GRACEY A 12 XP QT
AE GA 12 XP QT
Posterior mesial



GRACEY A 13 XP QT
AE GA 13 XP QT
Posterior distal



GRACEY A 14 XP QT
AE GA 14 XP QT
Posterior distal



GRACEY A 15 XP QT
AE GA 15 XP QT
Posterior mesial



GRACEY A 16 XP QT
AE GA 16 XP QT
Posterior mesial

Każda końcówka
Quik-Tip XP
129 PLN

XP GRACEY DEEP POCKET QUIK-TIP (SHANK + 3 MM)



GRACEY DP 1 XP QT
AE GDP 1 XP QT
Anterior



GRACEY DP 2 XP QT
AE GDP 2 XP QT
Anterior



GRACEY DP 3 XP QT
AE GDP 3 XP QT
Anterior



GRACEY DP 4 XP QT
AE GDP 4 XP QT
Anterior



GRACEY DP 5 XP QT
AE GDP 5 XP QT
Anterior



GRACEY DP 6 XP QT
AE GDP 6 XP QT
Anterior



GRACEY DP 7 XP QT
AE GDP 7 XP QT
Premolar / molar



GRACEY DP 8 XP QT
AE GDP 8 XP QT
Premolar / molar



GRACEY DP 11 XP QT
AE GDP 11 XP QT
Posterior mesial



GRACEY DP 12 XP QT
AE GDP 12 XP QT
Posterior mesial



GRACEY DP 13 XP QT
AE GDP 13 XP QT
Posterior distal



GRACEY DP 14 XP QT
AE GDP 14 XP QT
Posterior distal




GRACEY DP 15 XP QT
AE GDP 15 XP QT
Posterior mesial



GRACEY DP 16 XP QT
AE GDP 16 XP QT
Posterior mesial

Każda końcówka
Quik-Tip XP
129 PLN

XP KIRETY UNIWERSALNE QUIK-TIP

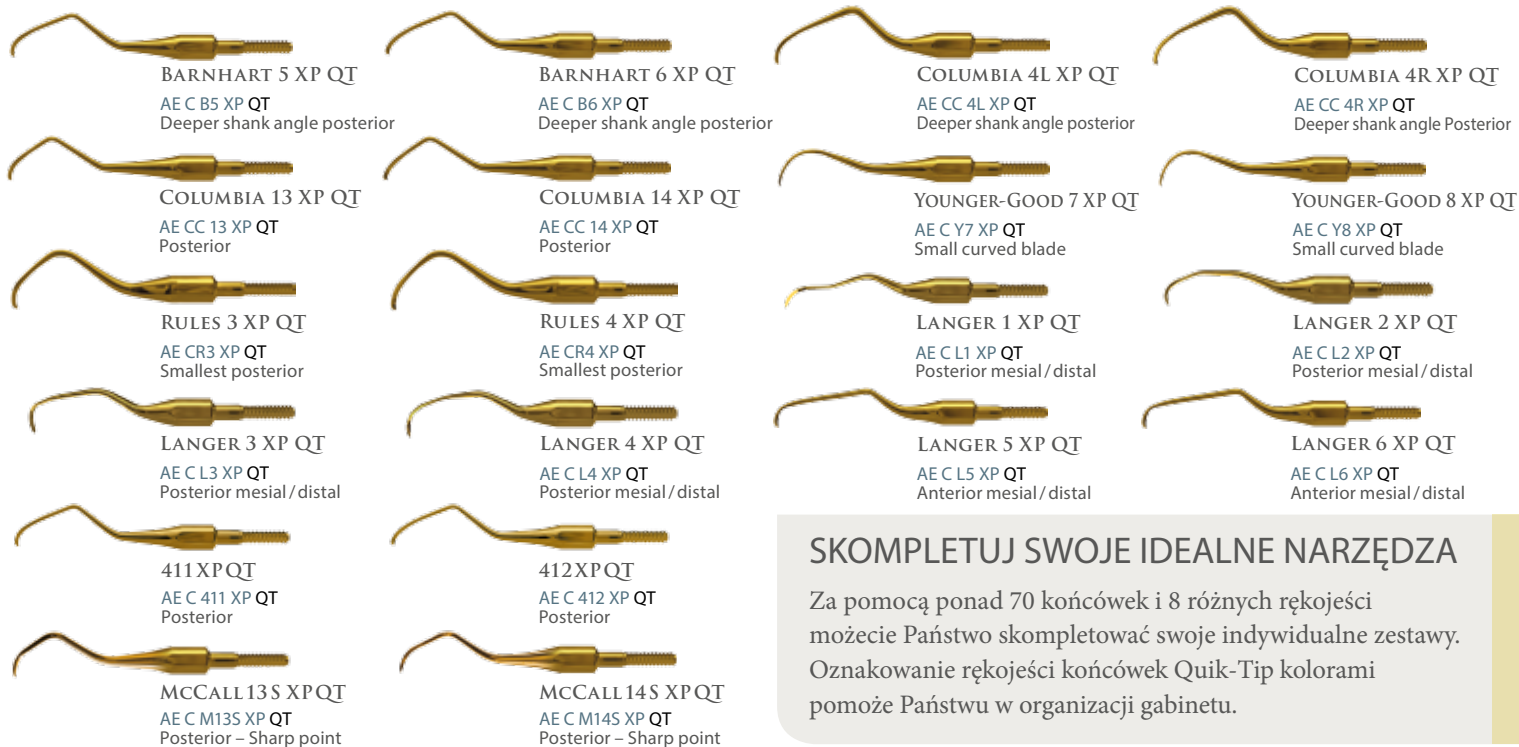

XP SKALER QUIK-TIP



Nowość!

DOUBLE GRACEY™ XP

- 2 krawędzie tnące
- W wersji do normalnych i głębokich kieszonek
- Umożliwiają pracę bez zmiany pozycji
- W technologii XP – nie wymagają ostrzenia!

Każde kompletne narzędzie Double Gracey XP 430 PLN

1 + 1 = 1

Kirety Double Gracey to nowa linia instrumentów periodontologicznych American Eagle. W jednym instrumencie połączono funkcje kilku kiret Gracey w taki sposób, by można je było zredukować do 1 instrumentu przeznaczonego do przodu i 1 do tyłu w wersji do normalnych i głębokich kieszonek. Z ekonomicznego punktu widzenia 2 kirety Double Gracey zastępują 6 (4 w odcinku przednim oraz 2 w odcinku bocznym). Technologia XP pozwala na maksymalne wycienienie instrumentu oraz umożliwia prawidłową eksploatację, gdyż ostrzenie 2 krawędzi umieszczonych pod kątem 70° byłoby bardzo uciążliwe.

			
DOUBLE GRACEY ANTERIOR		DOUBLE GRACEY POSTERIOR	
AE DG A XP X		AE DGP XP X	
Zastępuje kirety Gracey 1-2, 3-4, 5-6 i 7-8.		Zastępuje kirety Gracey 11-12, 13-14 i 15-16.	
Pozwala na pracę w odcinku przednim oraz b-l bez zmiany instrumentów i pozycji pracy operatora.		Umożliwia pracę na powierzchniach m-d w odcinku bocznym bez zmiany instrumentu i pozycji operatora.	
			
DOUBLE GRACEY MINI ANTERIOR		DOUBLE GRACEY MINI POSTERIOR	
AE DG MA XP X		AE DG MP XP X	
Zastępuje kirety Gracey Access 1-2, 3-4, 5-6 i 7-8.		Zastępuje kirety Gracey Access 11-12, 13-14 i 15-16.	
Pozwala na pracę w odcinku przednim oraz b-l bez zmiany instrumentów i pozycji pracy operatora. Do głębokich kieszonek.		Umożliwia pracę na powierzchniach m-d w odcinku bocznym bez zmiany instrumentu i pozycji operatora. Do głębokich kieszonek.	

XP KIRETY DOUBLE GRACEY KITS

Zestawy
Double Gracey Kit
860 PLN



DOUBLE GRACEY KIT
SKŁADA SIĘ Z

-  Double Gracey Anterior
-  Double Gracey Posterior

AEDGKXPX



DOUBLE GRACEY MINI KIT
SKŁADA SIĘ Z

-  Double Gracey Mini Anterior
-  Double Gracey Mini Posterior

AEDGMKXPX

XP DOUBLE GRACEY QUIK-TIP

Każda końcówka
DG Quik-Tip XP
171 PLN



● DOUBLE GRACEY
ANTERIOR A
AE DGAAXPQT



● DOUBLE GRACEY
ANTERIOR B
AE DGBAXPQT



● DOUBLE GRACEY
POSTERIOR A
AE DGPAXPQT



● DOUBLE GRACEY
POSTERIOR B
AE DGPBXPQT



● DOUBLE GRACEY
MINI ANTERIOR A
AE DGMMAXPQT



● DOUBLE GRACEY
MINI ANTERIOR B
AE DGMABXPQT



● DOUBLE GRACEY
MINI POSTERIOR A
AE DGMPPAXPQT



● DOUBLE GRACEY
MINI POSTERIOR B
AE DGMPPBXPQT

RĘKOJEŚCI

Każda rękojeść
Quik-Tip
96 PLN



AEQTHB



AEQTHG



AEQTHO



AEQTHP



AEQTW (Quik-Tip kluczyk do dokręcania)
96 PLN



AEQTHR



AEQTHX



AEQTHY



AEQTHZ



AEMHRX
(jednostronna)
108 PLN



TALON TOUGH™

- Najwyższej jakości stal
- Zwiększona trwałość narzędzi
- Nowoczesne opracowanie powierzchni
- Ostrzenie po kilku pacjentach
- Wysoki stopień ostrości

tt kirety gracey standard, mesial-distal.....	28
tt kirety gracey access, deep pocket.....	29
tt kirety uniwersalne.....	30
tt skalery.....	31
tt pilniki.....	32
tt końcówki quik-tip™	33

RĘKOJEŚCI

3/8" - 9,5mm EagleLite® rękojeść z kolorowego tworzywa, dwustronna (X)








3/8" - 9.5mm EagleLite® stal szlachetna (Z)



EAGLELITE® + TALON TOUGH™

Końcówki stalowe Talon Tough wykonywane są ręcznie. Narzędzia poddaje się obróbce termicznej, aby ich trwałość była dłuższa niż narzędzi tradycyjnych. Ergonomiczne i lekkie rękojeści zapewniają komfort, kontrolę i doskonałe czucie podczas dotyku. Zapobiegają zmęczeniu ręki i zespołowi cieśni nadgarstka.

TT GRACEY STANDARD

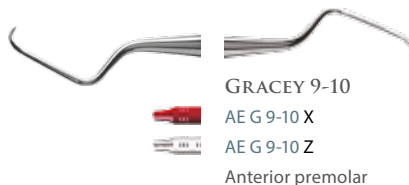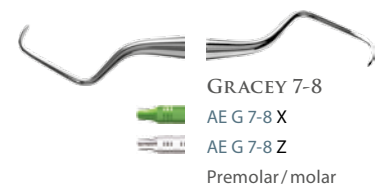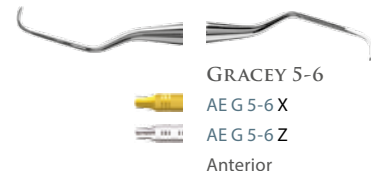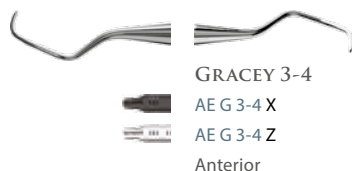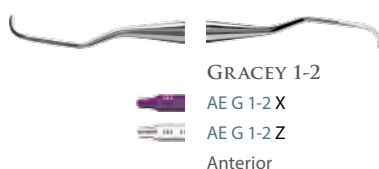

Każde narzędzie
229 PLN

TT GRACEY ACCESS (TRZON KOŃCOWY + 3 MM, OSTRZE - 50 %)



GRACEY ACCESS 00-0

AE GA 00-0 X
AE GA 00-0 Z

Anterior



GRACEY ACCESS 1-2

AE GA 1-2 X
AE GA 1-2 Z

Anterior



GRACEY ACCESS 3-4

AE GA 3-4 X
AE GA 3-4 Z

Anterior



GRACEY ACCESS 5-6

AE GA 5-6 X
AE GA 5-6 Z

Anterior



GRACEY ACCESS 7-8

AE GA 7-8 X
AE GA 7-8 Z

Premolar / molar



GRACEY ACCESS 11-12

AE GA 11-12 X
AE GA 11-12 Z

Posterior mesial



GRACEY ACCESS 13-14

AE GA 13-14 X
AE GA 13-14 Z

Posterior distal



GRACEY ACCESS 15-16

AE GA 15-16 X
AE GA 15-16 Z

Posterior mesial

Każde narzędzie
229 PLN

DOSTĘP

Dzięki wydłużeniu ostatniej prostej o 3 mm narzędzie można stosować do czyszczenia i wygładzania korzeni w kieszonkach głębszych niż 5 mm. Krótkie ostrze kirety Access pozwala dodatkowo na znacznie lepszy dostęp do wąskich i głębokich kieszonek.

TT GRACEY DEEP POCKET (TRZON KOŃCOWY + 3 MM)



GRACEY DP 1-2

AE GDP 1-2 X
AE GDP 1-2 Z

Anterior



GRACEY DP 5-6

AE GDP 5-6 X
AE GDP 5-6 Z

Anterior



GRACEY DP 7-8

AE GDP 7-8 X
AE GDP 7-8 Z

Premolar / molar



GRACEY DP 11-12

AE GDP 11-12 X
AE GDP 11-12 Z

Posterior mesial



GRACEY DP 13-14

AE GDP 13-14 X
AE GDP 13-14 Z

Posterior distal



GRACEY DP 15-16

AE GDP 15-16 X
AE GDP 15-16 Z

Posterior mesial









GRACEY DP 3-4

AE GDP 3-4 X (Zdjęcie)

AE GDP 3-4 Z




Anterior

TT KIRETY UNIWERSALNE

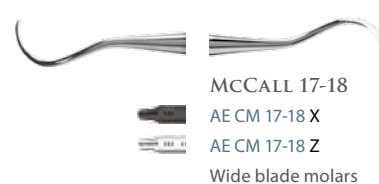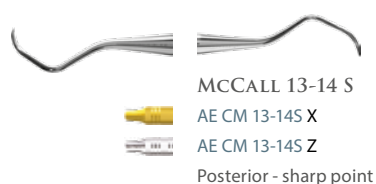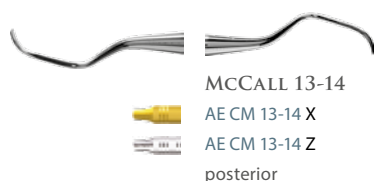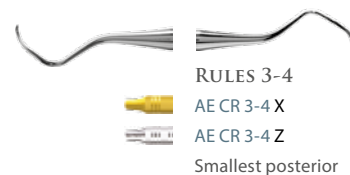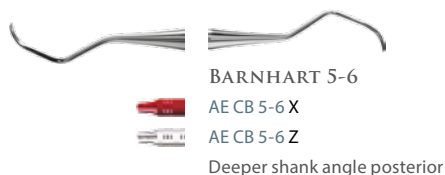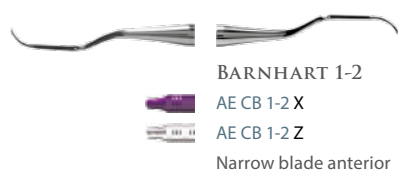




NADZWYCZAJNA JAKOŚĆ

Firma American Eagle Instruments wyznacza standardy we wzornictwie i jakości narzędzi. Podczas procesów produkcyjnych narzędzia podlegają surowym kontrolom jakościowym zgodnie ze standardami ISO 13485.





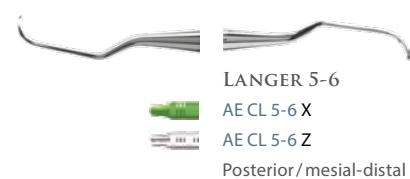
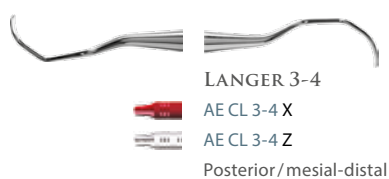
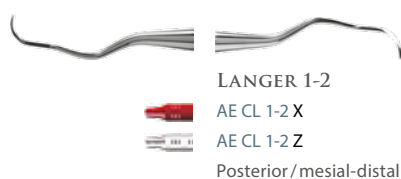


Każde narzędzie
229 PLN

TT SKALERY

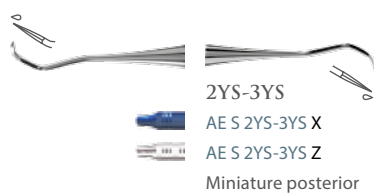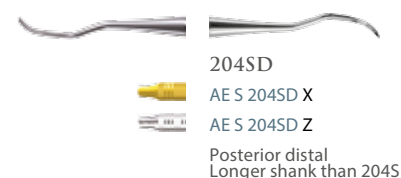
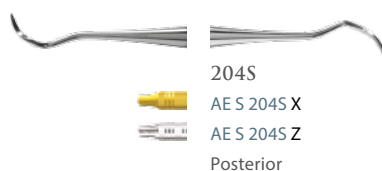


Każde narzędzie
229 PLN

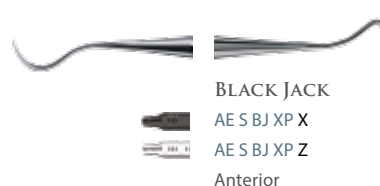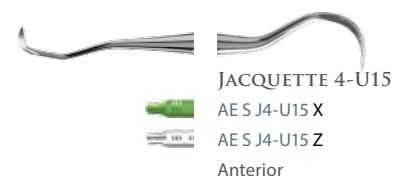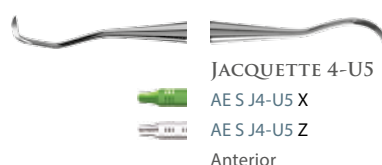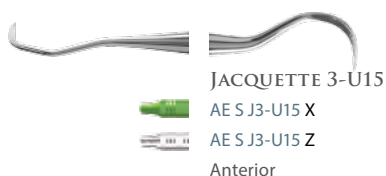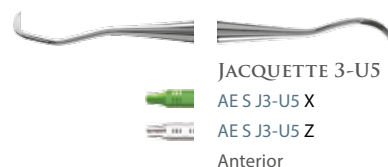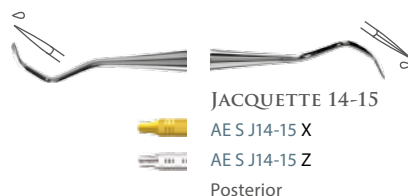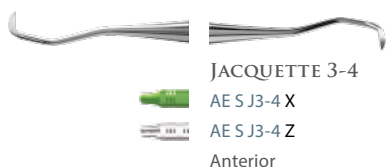

JAKOŚĆ

Najwyższa staranność i precyzja w całym toku produkcji są gwarancją funkcjonalności i długotrwałości wszystkich narzędzi firmy American Eagle.

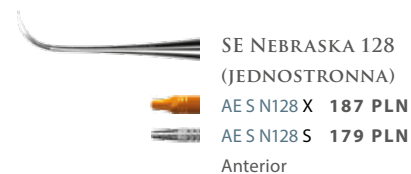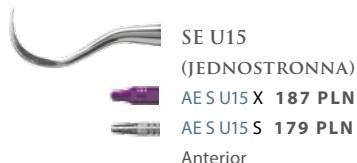

Każde narzędzie
229 PLN

TT PILNIKI

Rękojeść:

1/4" - 6,3 mm Stainless stal szlachetna, dwustronna (Standard)



Każda rękojeść
Quik-Tip
96 PLN

RĘKOJEŚCI



AEQTHB



AEQTHG



AEQTHO



AEQTHP



AEQTW (Quik-Tip kluczyk do dokręcania)
96 PLN



AEQTHR



AEQTHX



AEQTHY



AEQTHZ



AEMHRX
(jednostronna)
108 PLN

TT GRACEY STANDARD QUIK-TIP



GRACEY 1 TT QT
AE G 1 TT QT
Anterior



GRACEY 2 TT QT
AE G 2 TT QT
Anterior



GRACEY 3 TT QT
AE G 3 TT QT
Anterior



GRACEY 4 TT QT
AE G 4 TT QT
Anterior



GRACEY 5 TT QT
AE G 5 TT QT
Anterior



GRACEY 6 TT QT
AE G 6 TT QT
Anterior



GRACEY 7 TT QT
AE G 7 TT QT
Premolar/molar



GRACEY 8 TT QT
AE G 8 TT QT
Premolar/molar



GRACEY 11 TT QT
AE G 11 TT QT
Posterior mesial



GRACEY 12 TT QT
AE G 12 TT QT
Posterior mesial



GRACEY 13 TT QT
AE G 13 TT QT
Posterior distal



GRACEY 14 TT QT
AE G 14 TT QT
Posterior distal



GRACEY 15 TT QT
AE G 15 TT QT
Posterior mesial



GRACEY 16 TT QT
AE G 16 TT QT
Posterior mesial

Każda końcówka
Quik-Tip TT
81 PLN

TT GRACEY DEEP POCKET QUIK-TIP (SHANK + 3 MM)



GRACEY DP 11 TT QT
AE GDP 11 TT QT
Posterior mesial



GRACEY DP 12 TT QT
AE GDP 12 TT QT
Posterior mesial



GRACEY DP 13 TT QT
AE GDP 13 TT QT
Posterior distal



GRACEY DP 14 TT QT
AE GDP 14 TT QT
Posterior distal

TT GRACEY ACCESS QUIK-TIP (SHANK + 3 MM, OSTRZE – 50%)



GRACEY ACCESS 1 TT QT
AE GA 1 TT QT
Anterior



GRACEY ACCESS 2 TT QT
AE GA 2 TT QT
Anterior



GRACEY ACCESS 7 TT QT
AE GA 7 TT QT
Premolar/molar



GRACEY ACCESS 8 TT QT
AE GA 8 TT QT
Premolar/molar



GRACEY ACCESS 11 TT QT
AE GA 11 TT QT
Posterior mesial



GRACEY ACCESS 12 TT QT
AE GA 12 TT QT
Posterior mesial



GRACEY ACCESS 13 TT QT
AE GA 13 TT QT
Posterior distal



GRACEY ACCESS 14 TT QT
AE GA 14 TT QT
Posterior distal



GRACEY ACCESS 15 TT QT
AE GA 15 TT QT
Posterior mesial



GRACEY ACCESS 16 TT QT
AE GA 16 TT QT
Posterior mesial

Każda końcówka
Quik-Tip TT
81 PLN

TT KIRETY UNIWERSALNE QUIK-TIP



BARNHART 5 TT QT
AE C B5 TT QT
Deep shank posterior angle



BARNHART 6 TT QT
AE C B6 TT QT
Deep shank posterior angle



COLUMBIA 4L TT QT
AE CC 4L TT QT
Deep shank posterior



COLUMBIA 4R TT QT
AE CC 4R TT QT
Deep shank posterior



COLUMBIA 13 TT QT
AE CC 13 TT QT
Posterior



COLUMBIA 14 TT QT
AE CC 14 TT QT
Posterior



RULES 3 TT QT
AE CR3 TT QT
Small posterior



RULES 4 TT QT
AE CR4 TT QT
Small posterior



YOUNGER-GOOD 7 TT QT
AE CY7 TT QT
Small curved blade



YOUNGER-GOOD 8 TT QT
AE CY8 TT QT
Small curved blade

Każda końcówka
Quik-Tip TT
81 PLN

TT SKALERY QUIK-TIP



H5 TT QT
AE S H5 TT QT
Anterior



H6 TT QT
AE S H6 TT QT
Universal anterior



H7 TT QT
AE S H7 TT QT
Universal anterior



33 TT QT
AE S33 TT QT
Anterior



M23A TT QT
AE S M23A TT QT
Posterior



M23B TT QT
AE S M23B TT QT
Posterior



204SA TT QT
AE S 204SA TT QT
Posterior



204SB TT QT
AE S 204 SB TT QT
Posterior



204SDA TT QT
AE S 204 SDA TT QT
Posterior distal



204SDB TT QT
AE S 204 SDB TT QT
Posterior distal



EAGLE CLAW A TT QT
AE SEC A TT QT
Posterior



EAGLE CLAW B TT QT
AE SEC B TT QT
Posterior



EAGLE TALON A TT QT
AE SET A TT QT
Posterior



EAGLE TALON B TT QT
AE SET B TT QT
Posterior



SCALER 311 TT QT
AE S311 TT QT
Anterior



SCALER 312 TT QT
AE S312 TT QT
Anterior



BLACKJACK A TT QT
AE SBJA TT QT
Anterior




BLACKJACK B TT QT
AE SBJB TT QT
Anterior



KOMPOZYTY


- Narzędzia w technologii XP
- Narzędzia pokryte azotkiem tytanu
- Ekskluzywne serie narzędzi
- Niezwykłe ostre odcinacze

narzędzia – technologia xp	37
seria Dr. Mopper – technologia xp	38
seria Dr. Colonna	38
seria Dr. Belvedere	39

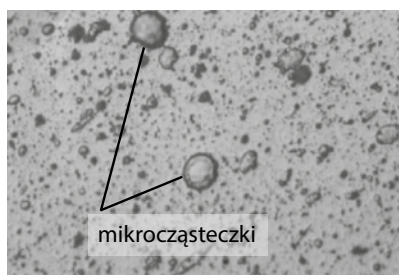

Narzędzie standardowe

→ Composite klei się do mikrocząsteczki

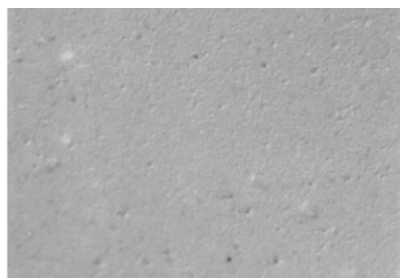

Narzędzie XP Technology™

→ idealnie gładka powierzchnia



WYPEŁNIENIA KOMPOZYTOWE - TECHNOLOGIA XP

Rękojeści:

1/4" - 6,3mm stal szlachetna, dwustronna (Standard)



3/8" - 9.5mm EagleLite® stal szlachetna, dwustronna (Z)



COMPOSITE 1

AEC 1 TN Z 211 PLN

Zgłębnik/Stożek



COMPOSITE 2

AEC 2 TN Z 211 PLN

Łopatka/Łopatka



COMPOSITE 3

AEC 3 TN Z 211 PLN

Łopatka/Łopatka



COMPOSITE 4

AEC 4 TN 204 PLN

AEC 4 TN Z 211 PLN

Łopatka/Łopatka



COMPOSITE 5

AEC 5 TN 204 PLN

AEC 5 TN Z 211 PLN

Łopatka/Upychadło



COMPOSITE 6

AEC 6 TN 204 PLN

AEC 6 TN Z 211 PLN

Łopatka/Upychadło



COMPOSITE 6-21A

AEC 6-21A TN 204 PLN

AEC 6-21A TN Z 211 PLN

Łopatka/Zoładź



COMPOSITE 7

AEC 7 TN 204 PLN

AEC 7 TN Z 211 PLN

Łopatka/Upychadło



COMPOSITE 9

AEC 9 TN 204 PLN

AEC 9 TN Z 211 PLN

Łopatka/Łopatka



COMPOSITE GREGG 4-5

AEC A G4-5 TN 204 PLN

AEC A G4-5 TN Z 211 PLN

Łopatka/Łopatka

TECHNOLOGIA XP

Dzięki rewolucyjnej technologii XP instrumenty do kompozytów American Eagle oraz w serii Dr. Mopper posiadają idealnie gładkie powierzchnie które skutecznie zapobiegają przyklejaniu się kompozytów i dają możliwość perfekcyjnego modelowania wypełnień.

SERIA DR. MOPPER - TECHNOLOGIA XP


EKSKLUZYWNA SERIA AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS®

Rękojeści:

1/4" - 6,3mm stal szlachetna, dwustronna (Standard)



3/8" - 9.5mm EagleLite® stal szlachetna, dwustronna (Z)

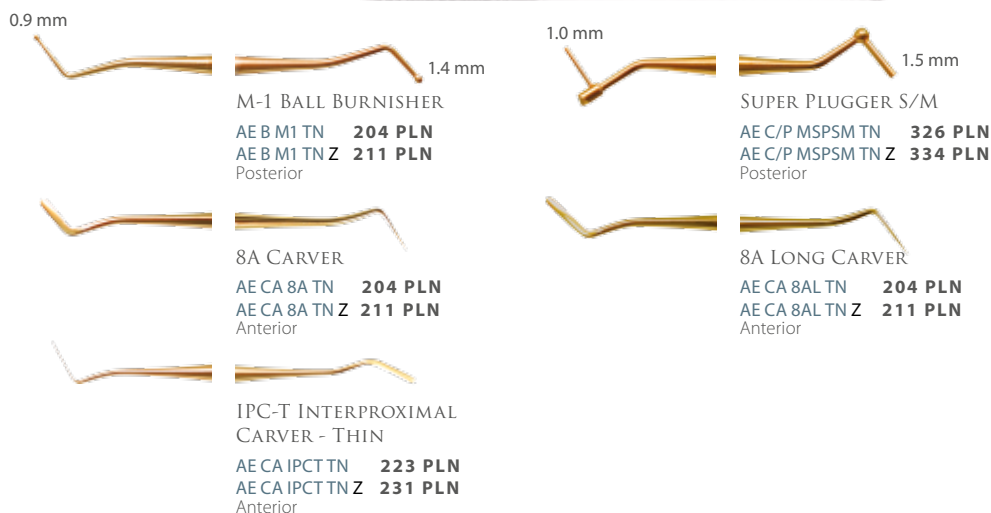


SERIA DR. COLONNA - TECHNOLOGIA XP

EKSKLUZYWNA SERIA AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS®

Rękojeść:

3/8" - 9,5mm EagleLite stal szlachetna, dwustronna (Z)

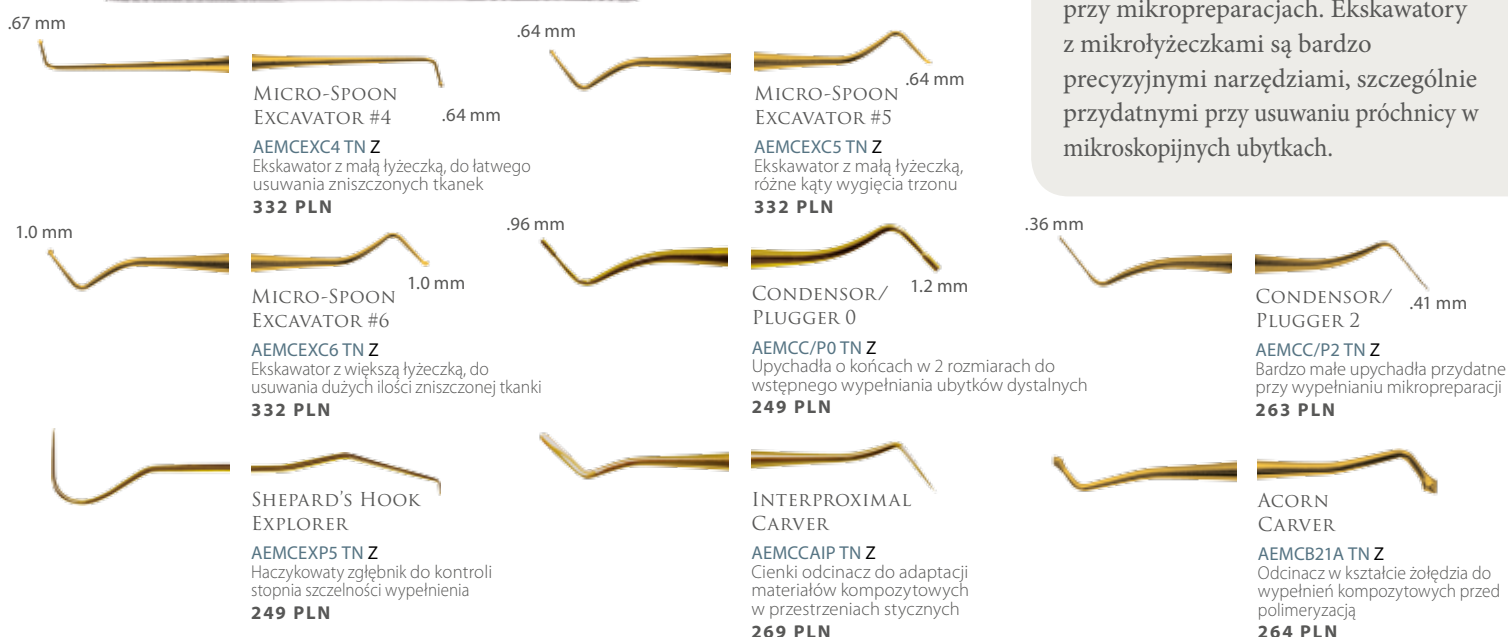SERIA NARZĘDZII
DR. COLONNA

Narzędzia serii Dr. Colonna zostały skonstruowane specjalnie do stosowania przy mikropreparacjach. Ekskawatery z mikrołyżeczkami są bardzo precyzyjnymi narzędziami, szczególnie przydatnymi przy usuwaniu próchnicy w mikroskopijnych ubytkach.

SERIA DR. BELVEDERE - NARZĘDZIA DO FORMOWANIA PUNKTÓW STYCZNYCH

EKSKLUZYWNA SERIA AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS®

Rękojeść:

5/16" - 7,9mm stal szlachetna Belvedere, dwustronna



SERIA RĘKOJEŚCI DR. BELVEDERE

Narzędzia z serii Dr. Belvedere mają żłobkowane, owalne główki, aby można było lepiej przenosić i adaptować materiał kompozytowy. Lekka, spłaszczona w jednym miejscu rękojeść ułatwia posługiwanie się narzędziem podczas aplikacji materiału. Narzędzie jest dobrze wyważone i wygodnie leży w ręce lekarza.



CONTACT FORMER
REGULAR
AE CCF 288 PLN



CONTACT FORMER
SMALL
AE CCF SM 288 PLN



P1 COMPACTER/
CARVER SMALL
CONTACT FORMER
AE CP1CF SM 288 PLN



REKONSTRUKCJE

- Delikatne, precyzyjne instrumenty
- Długotrwałe i odporne na korozję
- Wykonane ze stali szlachetnej Talon Tough™
- Wzajemnie dopasowane końce robocze

dłutka, ścinacze, szkliwa, przycinacze dziąsła	41
ekskawatory, nakładacze do amalgamatu	42
upychadła, upychadła specjalne, wygładzacze	43
odcinacze	44
upychacze do nitek, odcinacze do kompozytów, discoid-cleoid	45
odcinacze styczne, narzędzia endodontyczne	46
narzędzia do wosku, łopatki	47

Rękojeść:

1/4" - 6,3mm stal szlachetna, dwustronna (Standard)







DŁUTKA



ŚCINACZE SZKLIWA




PRZycinacze DZIAŁA

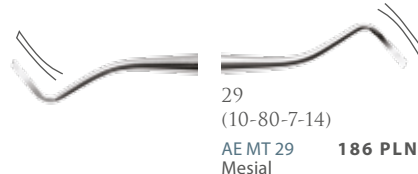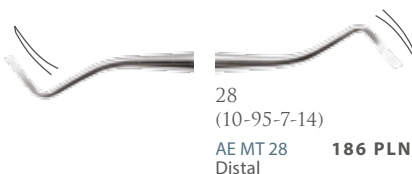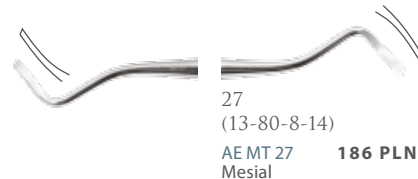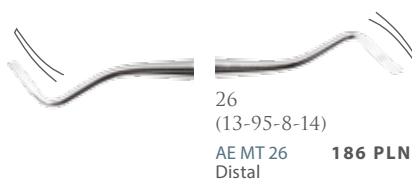


Wzór doktora Blacka

Wzór doktora Blacka bazuje na koncepcji symetrii narzędzi. Symetria zostaje osiągnięta, gdy ostrze narzędzia leży 2 mm w obrębie osi długiej rękojeści. Dokładna symetria jest ważna, aby przy minimalnym wysiłku można było uzyskać optymalne cięcie.

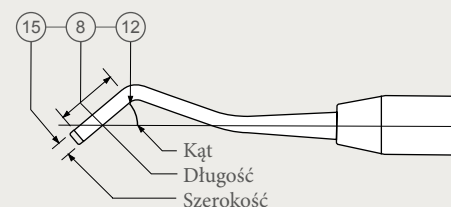

Niektóre narzędzia, jak np. przycinacze džiała, posiadają kąt krawędzi tnącej inny, niż kąt prosty.




W takich przypadkach do wzoru wprowadza się czwarty parametr, który podaje kąt między krawędzią tnącą i osią długą rękojeści.

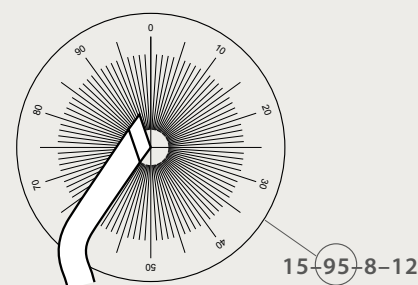

EKSKAWATORY

Rękojeść:

1/4" - 6,3mm stal szlachetna, dwustronna (Standard)

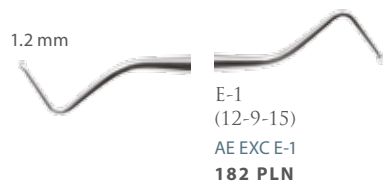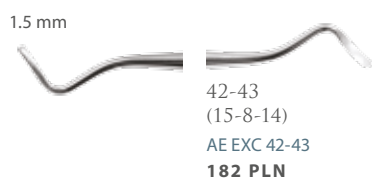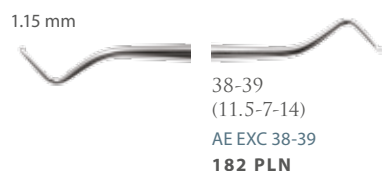

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Ekskawatory, które służą do usuwania zębiny próchnicowej, posiadają dwa różne końce robocze: jeden koniec jest łyżeczkowaty, szczególnie przydatny w głębokich, próchnicowych obszarach, a drugi koniec jest obły, do oszczędnego opracowywania ubytku.

NAKŁADACZE DO AMALGAMATU



UŻYTKOWANIE

Upychadła powleczone azotkiem tytanu ułatwiają pracę i nie ulegają tak szybko zużyciu.




SPODEK DO
AMALGAMATU
AE AC AW
180 PLN


UPYCHADŁA (GŁADKIE)

Rękojeść:

1/4" - 6,3mm stal szlachetna, dwustronna (Standard)

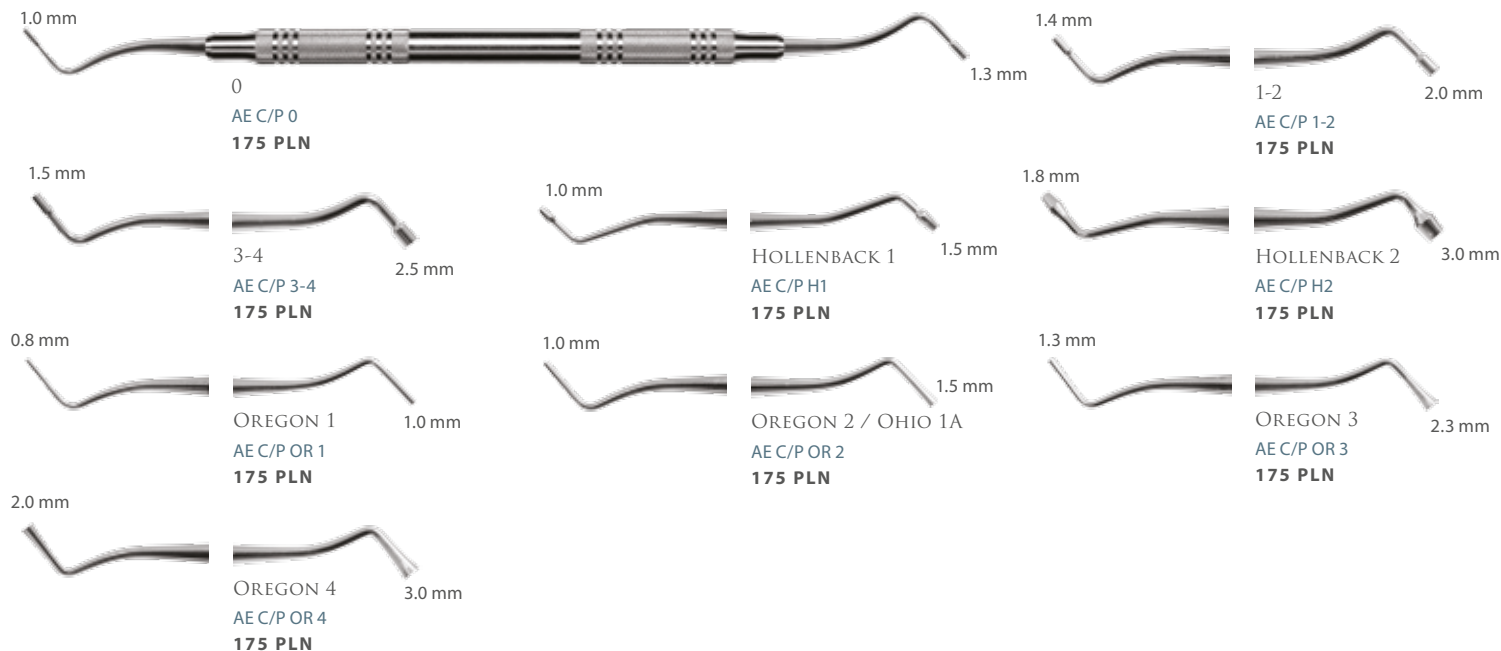

UPYCHADŁA SPECJALNE *PATRZ STRONA 37 - NARZĘDZIA DO KOMPOZYTÓW POWLECZONE AZOTKIEM TYTANU

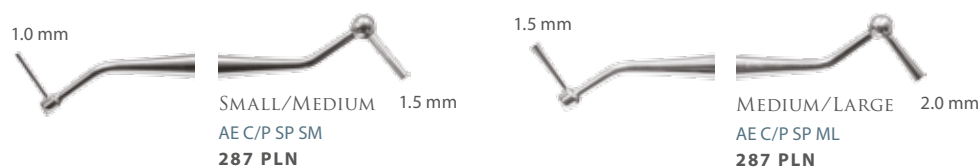

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Upychadła specjalne są wielofunkcyjnymi narzędziami, które łączą w sobie dwa upychadła o różnych rozmiarach z kulistym wygładzaczem na jednym końcu i odcinaczem w kształcie żółędzia na drugim końcu.

WYGŁADZACZE

Rękojeść:

1/4" - 6,3mm stal szlachetna, dwustronna (Standard)





NARZĘDZIA DO APLIKOWANIA CEMENTU/
DO APLIKACJI PREPARATÓW Z WODOROTLENKIEM WAPNIA

AE P PA
179 PLN

TRWAŁOŚĆ

Wygładzacz American Eagle przeznaczony jest do precyzyjnego polerowania wypełnień amalgamatowych. Wykonane z wysokogatunkowej stali szlachetnej. Cechują się odpornością na korozję i są niezwykle trwałe.



26-29 BALL-FOOTBALL

AE B 26-29BF
179 PLN



26-27 BALL

AE B 26-27B
179 PLN



26-28 BALL-FOOTBALL

AE B 26-28BF
179 PLN



26-30 BALL-FOOTBALL

AE B 26-30BF
179 PLN



NYU B1

AE B NYU B1
179 PLN



PFI 18 BALL

AE B PFI 18B
179 PLN



PFI 21 ACORN

AE B PFI 21A
179 PLN



PITTS PEDO 18

AE B PP 18
179 PLN



LINING CEMENT/
CALCIUM HYDROXIDE
PLACEMENT INSTR.

AE P BP-2
179 PLN

ODCINACZE

Rękojeść:

1/4" - 6,3mm stal szlachetna, dwustronna (Standard)



TRWAŁOŚĆ

Przeznaczone do modelowania szczegółów anatomicznych koron zębów, oraz do odcinania nadmiarów materiału. Ostrza stalowe Talon Tough są trwałe i niezawodne.



HOLLENBACK 1/2 3

AE CA H1/23
174 PLN



HOLLENBACK 3

AE CA H3
174 PLN



GREGG 4-5

AE CA G4-5
174 PLN



WALLS 3

AE CA W3
174 PLN



TANNER 3

AE CA T3
174 PLN

UPYCHACZE DO NITEK

Rękojeść:

1/4" - 6,3mm stal szlachetna, dwustronna



CSI-1 SERRATED
AEP CSI-1
191 PLN



GUYER 7 SERRATED
AEP G7
191 PLN



ROUND SERRATED
AEP RND
191 PLN

ZALECANE

Zaokrąglone upychacze do nitek gwarantują precyzyjne zakładanie nici retrakcyjnych – tak, jak to zalecają wiodący producenci.

ODCINACZE DO KOMPOZYTÓW



PFI 6
AE CA 6
174 PLN



PFI 8A
AE CA 8A
174 PLN



PFI 11
AE CA 11
174 PLN



PFI 13
AE CA 13
174 PLN



PFI D3
AE CA D3
174 PLN



PFI S6
AE CA S6
174 PLN



PFI ASH 6
AE CA A-6
174 PLN

ODCINACZE DO KOMPOZYTÓW

Najlepsza stal i obróbka najnowocześniejszymi metodami pozwalają uzyskać doskonale wypolerowaną i nieklejącą powierzchnię narzędzi.

DISCOID-CLEOID

Rękojeść:

1/4" - 6,3mm stal szlachetna, dwustronna (Standard)



1-2
AE CA DC1-2
182 PLN



3-6
AE CA DC3-6
182 PLN



4-5
AE CA DC4-5
182 PLN



5T
AE CA DC5T
182 PLN



UW-D5
AE CA DCUW-D5
182 PLN



89-92
AE CA DC89-92
182 PLN


PRECYZJA

Nasze narzędzia są precyzyjnie ostrzone przez wysoko kwalifikowany personel. Gwarantuje to długotrwałą ostrość narzędzi.

ODCINACZE OBSZARÓW STYCZNYCH

Rękojeść:

1/4" - 6,3mm stal szlachetna, dwustronna (Standard)

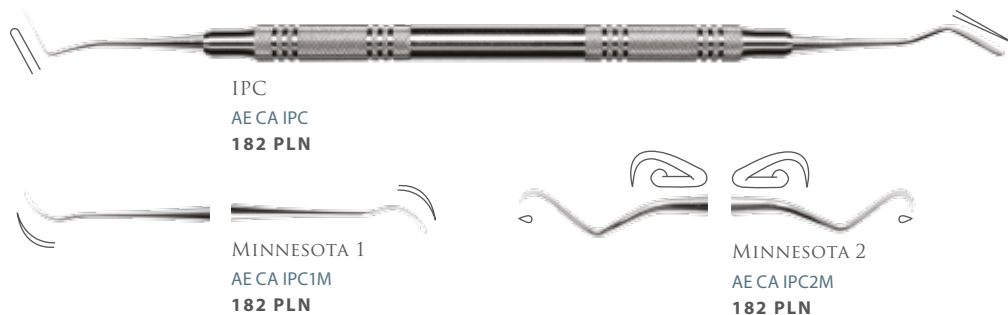

ADAPTACJA

Odporna na korozję stal szlachetna po nowoczesnej obróbce termicznej pozwala uzyskać niezwykle cienkie i precyzyjnie wyostrzone ostrza, które idealnie dopasowują się do powierzchni międzystycznych.

RĘKOJEŚCI

7/32" - 5,6 mm stal szlachetna





Dwustronna

1/4" - 6,3 mm stal szlachetna







Dwustronna

POZOSTAŁE

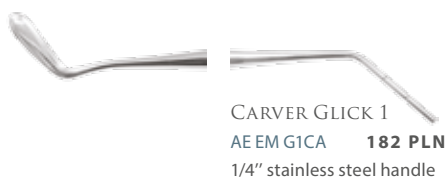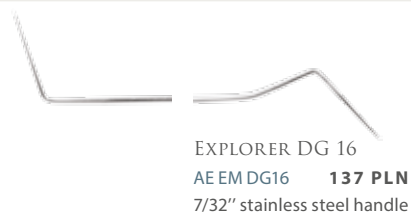

UPYCHADŁA

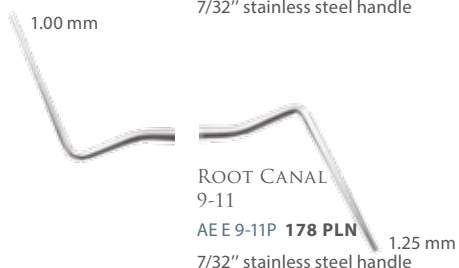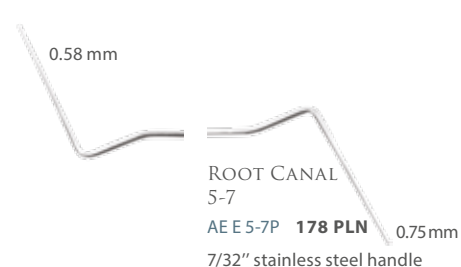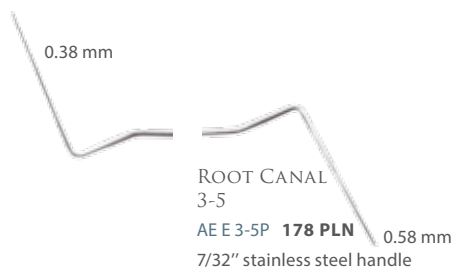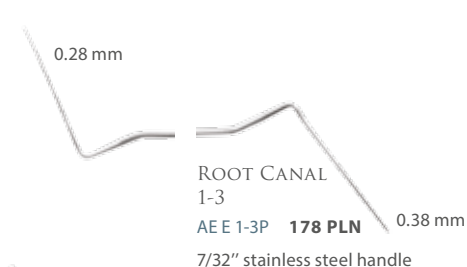

ROZPYCHADŁA

Rękojeść:

7/32" - 5,6 mm stal szlachetna



Jednostronna

0.36 mm



SPREADER D11-21
AE D11-21S **151 PLN**
7/32" stainless steel handle

0.23 mm



SPREADER-THIN D11T-21
AE D11T-21S **151 PLN**
7/32" stainless steel handle

0.23 mm



SPREADER-THIN D11T-25
AE D11T-25S **151 PLN**
7/32" stainless steel handle

NARZĘDZIA DO WOSKU

Rękojeść:

1/4" - 6,3 mm stal szlachetna



Dwustronna



WAX SPATULA 7
AE W S7
188 PLN



P.K. THOMAS 1
AE W PKT1
170 PLN



P.K. THOMAS 2
AE W PKT2
170 PLN



P.K. THOMAS 3
AE W PKT3
176 PLN



P.K. THOMAS 4
AE W PKT4
176 PLN



P.K. THOMAS 5
AE W PKT5
176 PLN

ŁOPATKI

Rękojeść:

1/4" - 6,3 mm rękojeść łopatki ze stali szlachetnej, jednostronna



CEMENT 8
AE CSP 8
186 PLN



CEMENT A6
AE CSP A6
186 PLN



CEMENT A8
AE CSP A8
Tapered Blade
186 PLN



CEMENT 28
AE CSP 28
186 PLN

OSTRZENIE (NIEZALECANE DLA NARZĘDZI XP!)



DIAMOND STONE
10,1 X 2,5 CM
AE SA DS
257 PLN



LUPA SIMPLY SHARP
AE SA MEL
46 PLN



PRĘCIKI KONTROLNE
AE SA STS (1 SZT.) **31 PLN**
AE SA STP (6 SZT.) **137 PLN**



OLEJ SZLIFIERSKI NORTON
4.5 OZ. (133 ML)
AE SA NO412 **100 PLN**

KAMIEŃ CERAMICZNY SIMPLY SHARP

Strona górna:
strona z
rowkiem, do
szlifowania
zgrubnego

Strona dolna:
strona bez
rowka, do
delikatnego
wygładzania
ostrza



Zaokrąglone
krawędzie dla kiret

KAMIEŃ CERAMICZNY
SIMPLY SHARP
8,9 X 2,5 CM
AE SA CC/F
425 PLN



ZESTAW SIMPLY SHARP
AE SA CC/FK
441 PLN

ZESTAW SIMPLY SHARP

Wszystko, co potrzebne do ostrzenia w jednym zestawie!

Ostrzenie narzędzi wymaga wysiłku, jest na ogół uciążliwe i trudne. Mimo to kirety i skalery muszą być ciągle ostre. Zestaw Simply Sharp Stone został dostosowany do Państwa specjalnych wymagań. Dwustronny kamień pozwala na wybór pomiędzy bardzo delikatną powierzchnią z jednej strony i powierzchnią o grubszej strukturze z drugiej strony. Zestaw zawiera ponadto lupę o dziesięciokrotnym powiększeniu, aby można było dokładnie obejrzeć ostrze. W zestawie znajduje się również pręcik do kontroli naostrzenia ostrza.

TECHNIKA OSTRZENIA

1. Za pomocą znajdującej się w zestawie lupy o dziesięciokrotnym powiększeniu należy obejrzeć ostrze narzędzia.
2. Narzędzie należy naostrzyć, a następnie sprawdzić ostrość za pomocą pręcika kontrolnego.
3. Następnie należy ponownie sprawdzić kątem, kontur i ostrość krawędzi. **Ostra krawędź nie odbija światła.**
4. Powtarzać kroki 2 i 3, aż do uzyskania pożądanego profilu krawędzi.
5. Narzędzia należy regularnie sprawdzać pod lupą i ostrzyć.



METODA 1

Praca kamieniem przy nieruchomym narzędziu. Podczas wykonywania ruchów kamieniem pod właściwym kątem, krawędź pozostaje cały czas widoczna.



METODA 2

Praca narzędziem przy nieruchomym kamieniu. Metoda ta jest mniej męcząca. Istnieje jednak większe ryzyko, że narzędzie zostanie naostrzone pod niewłaściwym kątem, ponieważ podczas wykonywania ruchów narzędziem krawędź pozostaje niewidoczna.

PIERŚCIENIE DO ZNAKOWANIA E-Z ID



ASORTYMENT PIERŚCIENI E-Z ID (8 x 25 pierścieni)

Asortyment „Classic” – Kolory: 2xA, 2xB, 2xD, 1xG, 1xI
Asortyment „Metalic” – Kolory: 1xI, 1xJ, 2xE, 1xM, 2xT, 1xU
Asortyment „Neon” – Kolory: 1xN, 1xO, 1xP, 1xQ, 2xR, 2xS

Rozmiar	Classic	Metalic	Neon	Cena
Small (Ø3mm)	70Z105	70Z115	70Z110	260 PLN
Large (Ø6mm)	70Z205	70Z215	70Z210	260 PLN
X-Large (Ø9mm)	70Z005	70Z315	70Z010	260 PLN

PIERŚCIENI E-Z ID (25 pierścieni)

Kolory: A-S

70Z100(A-S)	Pierścienie 25 szt. (Ø 3 mm)	37 PLN
70Z200(A-S)	Pierścienie 25 szt. (Ø 6 mm)	37 PLN
70Z000(A-S)	Pierścienie 25 szt. (Ø 9 mm)	37 PLN

Na zamówieniu należy wpisać kod koloru pierścieni po numerze artykułu (patrz kody kolorów). Np. niebieskie pierścienie EZ-ID (opakowanie pojedyncze - Ø 6 mm) = 70Z200B.

PIERŚCIENIE I TAŚMY E-Z ID

Taśmy i pierścienie E-Z ID ułatwiają organizację narzędzi i przebieg prac w gabinecie. Można je dezynfekować i sterylizować w autoklawie. Ponadto są bezpieczne – dostępna jest ekspertyza dotycząca walidowanego przygotowania wyrobów do efektywnego użycia zgodnie z ISO 17664.

Pierścienie E-Z ID wykonane są z rozciągliwego miękkiego silikonu i mają zaokrąglone brzegi. Przezroczysty i higieniczny dozownik pozwala łatwo nakładać pierścienie na narzędzia.

Taśmy E-Z ID dostępne są w praktycznym i higienicznym rozwijaczu. Dzięki temu stosowanie taśm staje się bardzo proste. Ponadto taśmy cechują się znakomitą przyczepnością.

TAŚMY DO ZNAKOWANIA E-Z ID



TAŚMY DO ZNAKOWANIA E-Z ID (każda o długości: 106 cm)

Asortyment „Classic” – Kolory: 2xA, 2xB, 2xD, 1xG, 1xI
Asortyment „Metalic” – Kolory: 1xI, 1xJ, 2xE, 1xM, 2xT, 1xU
Asortyment „Neon” – Kolory: 1xN, 1xO, 1xP, 1xQ, 2xR, 2xS

	Classic	Metalic	Neon	Cena
Asortyment	70Z305	70Z315	70Z310	223 PLN

TAŚMY E-Z ID OPAKOWANIA POJEDYNCZE

Kolory: A-S

70Z300 (A-S) Taśma E-Z ID (długość: 290 cm) 51 PLN

Na zamówieniu należy wpisać kod koloru taśm po numerze artykułu (patrz kody kolorów). Np. zielona taśma EZ-ID (opakowanie pojedyncze) = 70Z300D.

KASETY E-Z JETT



MAŁA E-Z JETT

Kaseta E-Z Jett na 5 narzędzi z ochroną przeciwbakteryjną, nadaje się do sterylizacji w autoklawie

50Z925 (A-S) 130 PLN



ŚREDNIA E-Z JETT

Kaseta E-Z Jett na 8 narzędzi z ochroną przeciwbakteryjną, nadaje się do sterylizacji w autoklawie

50Z927 (A-S) 176 PLN



ŚREDNIA E-Z JETT SLIM

Kaseta E-Z Jett na 8 narzędzi z ochroną przeciwbakteryjną, nadaje się do sterylizacji w autoklawie

50Z911 (A-S) 160 PLN



DUŻA E-Z JETT

Kaseta E-Z Jett na 10 narzędzi, dodatkowe ryglowane przegródki na drobne elementy, nadaje się do sterylizacji w autoklawie, z ochroną przeciwbakteryjną

50Z930 (A-S) 200 PLN

Na zamówieniu należy wpisać kod koloru po numerze artykułu (patrz kody kolorów). Przykład: jaskrawo zielona duża kaseta E-Z Jett = 50Z930P.

A biały	B niebieski	D zielony	G beżowy	I szary	E śliwka	J turkusowy	M czerwony	T ciemno niebieski	U miedź	N jaskrawo niebieski	O jaskrawo żółty	P jaskrawo zielony	Q jaskrawo pomarańczowy	R jaskrawo fioletowy	S jaskrawo różowy
-------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------



KASETY E-Z JETT

Kasety E-Z Jett optymalizują organizację narzędzi w gabinecie! Pozwalają na efektywne przygotowanie, sortowanie i przechowywanie skompletowanych zestawów z narzędziami lub narzędzi poszczególnych typów. Kasety można sterylizować w autoklawie, otwierają się do góry i posiadają uchylne osłony z okrągłymi otworami do ochrony narzędzi podczas transportu i dla lepszego oczyszczania w dezynfektorach termicznych. Kasety E-Z Jett posiadają unikalną ochronę przeciwbakteryjną, która zmniejsza ryzyko zakażenia. Kasety są dostępne w 16 kolorach.

LUSTERKA CRYSTAL HD

JAŚNIEJ = LEPIEJ = CRYSTAL HD

Lusterko wewnętrzne ze zwiększonym odbiciem światła o 40%! Crystal HD zapewnia wreszcie optymalną widoczność przede wszystkim w obszarze zębów bocznych i podczas leczenia endodontycznego. Bezkrwawdziowe przejście lusterka w oprawkę skutecznie zapobiega osadzaniu się brudu.

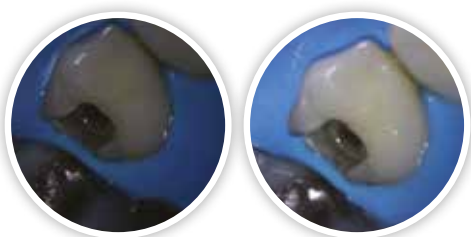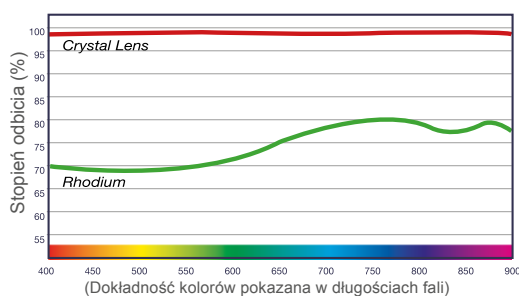

Lusterko rodowane

VS

CrystalHD

LUSTERKA WKRĘCANE JEDNOKOLOROWE
(12 SZT.)

50Z392 (A-S & K) Rozmiar #4, Kolory: A-S & K = czarny

50Z393 (A-S & K) Rozmiar #5, Kolory: A-S & K = czarny

372 PLN

LUSTERKA WKRĘCANE, METALIC
(ASORTYMENT 12 SZT.)

50Z392-JWL Rozmiar #4, kolory: 2 x I, E, J, M, T, U

50Z393-JWL Rozmiar #5, kolory: 2 x I, E, J, M, T, U

372 PLN



RĘKOJEŚĆ ERGO GRIP (1 SZT.)

50Z347(B-S) Kolory: B-S & K = czarny

79 PLN

LUSTERKA WKRĘCANE, CLASSIC
(ASORTYMENT 12 SZT.)

50Z392-PSTL Rozmiar #4, kolory: 2 x A, B, D, G, I, K

50Z393-PSTL Rozmiar #5, kolory: 2 x A, B, D, G, I, K

372 PLN

LUSTERKA WKRĘCANE, NEON
(ASORTYMENT 12 SZT.)

50Z392-NEON Rozmiar #4, kolory: 2 x N, O, P, Q, R, S

50Z393-NEON Rozmiar #5, kolory: 2 x N, O, P, Q, R, S

372 PLN



LUSTERKA Z RĘKOJEŚCIĄ "THIN GRIP" (12 SZT.)

50Z353-JWL Rozmiar #4, Asortyment, Kolory: 2 x I, J, E, M, T, U

50Z354-JWL Rozmiar #5, Asortyment, Kolory: 2 x I, J, E, M, T, U

50Z353-NEON Rozmiar #4, Asortyment, Kolory: 2 x N, O, P, Q, R, S

50Z354-NEON Rozmiar #5, Asortyment, Kolory: 2 x N, O, P, Q, R, S

372 PLN

LUSTERKA Z RĘKOJEŚCIĄ "SOFT GRIP" (12 SZT.)

50Z356-JWL Rozmiar #4, Asortyment, Kolory: 2 x I, J, E, M, T, U

50Z354-JWL Rozmiar #5, Asortyment, Kolory: 2 x I, J, E, M, T, U

50Z356-NEON Rozmiar #4, Asortyment, Kolory: 2 x N, O, P, Q, R, S

50Z354-NEON Rozmiar #5, Asortyment, Kolory: 2 x N, O, P, Q, R, S

50Z363 Rozmiar #4, 12 szt. (szary-czarny)

50Z364 Rozmiar #5, 12 szt. (szary-czarny)

372 PLN / 12 szt.

50Z361 Rozmiar #4, 4 szt. (szary-czarny)

50Z362 Rozmiar #5, 4 szt. (szary-czarny)

149 PLN / 4 szt.



Na zamówieniu należy wpisać kod koloru po numerze artykułu (patrz kody kolorów poniżej).

Przykład: opakowanie lusterek wkręcanych (rozmiar #4 / 12 szt.) w kolorze czerwonym = 50Z392H. Rękojeść Ergo Grip w kolorze niebieskim = 50Z347B.

A biały	B niebieski	D zielony	G beżowy	I szary	E śliwka	J turkusowy	M czerwony	T ciemno niebieski	U miedź	N jaskrawo niebieski	O jaskrawo żółty	P jaskrawo zielony	Q jaskrawo pomarańczowy	R jaskrawo fioletowy	S jaskrawo różowy
-------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

OSŁONA TWARZY FACEDRAPE



OSŁONA TWARZY FACEDRAPE WIELORAZOWA – FROTTE (12 SZTUK)

8-4020 (W/B/M/G/S) Kolory: W = biała, B = niebieska, M = miętowa, G = żółta,
S = sortowane (żółta, miętowa, niebieska – po 4 sztuki)

378 PLN

OSŁONA TWARZY FACEDRAPE JEDNORAZOWA (50 SZTUK)

8-1110 (W/B) Kolory: W = biała, B = niebieska

305 PLN



FACEDRAPE

Prosta i skuteczna osłona twarzy pacjenta. Szczególnie przydatna przy zabiegach higienizacyjnych. Idealnie chroni pacjenta przed pyłem i sprayem a przy tym nie ogranicza widoczności podczas piaskowania.

PELERYNA OCHRONNA DLA PACJENTA

PELERYNA OCHRONNA DLA PACJENTA (4 SZTUKI)

8-3105 (W/B) Kolory: W = biała, B = niebieska

396 PLN

PELERYNA OCHRONNA DLA PACJENTA OCIEPLANA (2 SZTUKI)

8-3150 (W/B) Kolory: W = biała, B = niebieska

347 PLN



PELERYNA OCHRONNA DLA PACJENTA

Służy do profesjonalnej ochrony pacjenta podczas zabiegów chirurgicznych, endo, protetycznych i higieny. Sterylizowalna, odporna na wodę oraz agresywne ciecze, skutecznie zabezpiecza pacjenta. Można ją prać i sterylizować. Wykonana z materiału o barierowości 99,998 %.

UŻYTKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I STERYLIZACJA NARZĘDZI WYKONANYCH W TECHNOLOGII XP

- Narzędzi XP nie ostrzemy!
- Okresowo sprawdzaj ich ostrość i w razie potrzeby wymień na nowe /korzystanie z tępego narzędzia XP oraz jego ostrzenie może je uszkodzić i tym samym nie będzie podlegało gwarancji producenta/
- Nie używaj instrumentów XP do usuwania nawisów z amalgamatu, cementu, kompozytu lub wygładzania krawędzi/narzędzia XP ostrzejsze, cieńsze i twardsze ale bardziej kruche od stalowych/
- Korzystaj z kaset podczas czyszczenia i przechowywania instrumentów.
- Używaj ultradźwiękowych urządzeń czyszczących
- Nie pozwól aby końcówki stykały się podczas czyszczenia, sterylizacji czy też przechowywania
- Kirety w technologii XP można czyścić i wyjaławiać tak samo jak inne ze stali nierdzewnej.
- Zawsze dokładnie oczyść i opłucz przed suszeniem i sterylizacją
- Zawsze dokładnie osusz instrumenty przed schowaniem
- Korzystaj z wody demineralizowanej
- Korzystaj ze środków czyszczących o obojętnym Ph
- Nie korzystaj z preparatów na bazie chloru lub soli fizjologicznej

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co odróżnia kirety, skalery XP od tych standardowych ze stali nierdzewnej lub węglowej?

Unikalnością tej technologii jest możliwość wytwarzania najostriejszych krawędzi tnących, które nie zmieniają swych właściwości przez cały okres użytkowania.

Dlaczego kirety i skalery XP są cieńsze od standardowych?

Wielu stomatologów zwracało uwagę, że cieńsze narzędzia umożliwią większą dbałość o obszary poddziąsłowe i przestrzenie międzyzębowe. Możliwość wyprodukowania takich właśnie instrumentów dała dopiero technologia XP.

Nowe kirety sprawiają wrażenie ostrzejszych od tych standardowych, dlaczego?

One są ostrzejsze!

Czy muszę zmienić sposób, w jaki usuwam kamień i wygładzam korzenie?

Nie, ale od razu zauważysz że narzędzia XP nie będą wymagały użycia aż tak dużej siły jak te standardowe, siła uchwytu będzie również mniejsza.

Czy powinniśmy stosować się do jakichś szczególnych zasad użytkując kirety XP aby zachować jak najdłużej ich żywotność?

Kiret i skalerów XP nie powinno się stosować do wygładzania krawędzi i usuwania nawisów z cementu, amalgamatu, kompozytu. Prawidłowo użytkowana kireta XP będzie służyła dłużej niż jakakolwiek inna.

Czy powinniśmy jakoś szczególnie podchodzić do czyszczenia i sterylizacji narzędzi XP?

American Eagle zaleca stosowanie kaset do sterylizacji oraz

czyszczenie ultradźwiękowe, co pozwoli zabezpieczyć narzędzia przed uszkodzeniami spowodowanymi kontaktem poszczególnych krawędzi ze sobą podczas procesu czyszczenia.

Jakie korzyści będę miał z zakupu kiret XP, które są przecież droższe od stalowych?

Niezmiennalność kształtu instrumentu. Poza tym ostrym narzędziem pracuje się szybciej a wykluczając potrzebę ostrzenia, możemy wykorzystać czas swój i personelu bardziej produktywnie.

Czy rzeczywiście stosując kirety XP będę mieć lepsze czucie narzędzia?

Narzędzie, które jest zawsze bardzo ostre daje jego operatorowi większą wrażliwość czucia nie wymagając tym samym dużej siły nacisku i uchwytu.

Czy American Eagle Instruments gwarantuje użytkownikom kiret XP zadowolenie z ich użytkowania?

Nasze produkty są najlepsze na rynku i gwarantują 100% satysfakcję pod warunkiem stosowania się do instrukcji producenta! Jeżeli z jakichś powodów dojdiesz do wniosku, że nie są to najlepsze kirety z jakich kiedykolwiek korzystałeś/korzystałaś, wymienimy je lub zwrócimy koszty.

Ważna informacja: kiedy narzędzie XP przestaje być ostre, producent zaleca wyrzucenie go. Korzystanie z tępego narzędzia może prowadzić do złamania. Wykonaj test w celu określenia ostrości narzędzia. Korzystanie z tępego narzędzia XP oraz jego ostrzenie może je uszkodzić i tym samym nie będzie podlegało gwarancji producenta.

LOSER & CO
Zawsze coś dobrego...



PRZEDSTAWICIEL POLSKA: MAŁGORZATA RUSEK
tel.: 608 550 333 • e-mail: mrusek@loser.de

LOSER & CO GMBH • BENZSTR. 1c, D-51381 LEVERKUSEN
tel.: +49 21 71/70 66 70 • fax: +49 21 71/70 66 66
www.loser.eu • e-mail: info@loser.eu