


- Dwie krawędzie tnące
- Zaokrąglone ostrze
- Technologia XP – Nigdy więcej ostrzenia!



Optymalizujemy ilość potrzebnych narzędzi!

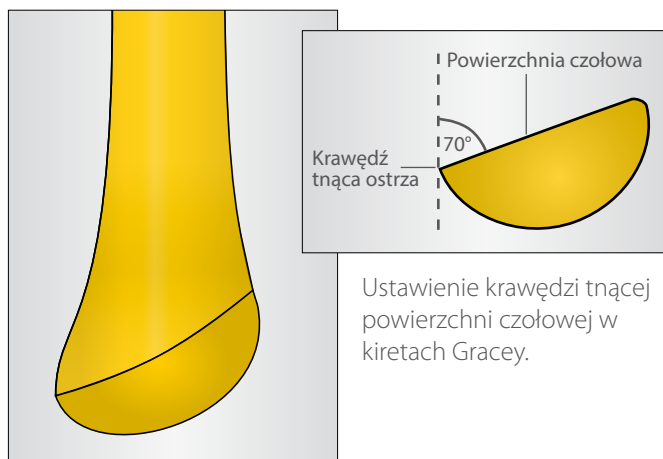

Kirety Gracey


W tradycyjnych kiretach Gracey krawędź tnąca powierzchni czołowej ustawiona jest pod kątem 70° w stosunku do trzonu końcowego instrumentu (patrz rysunek po lewej stronie). Ostrze instrumentu jest zaokrąglone.

Narzędzia z przedłużonym o 3mm trzonem i skróconym o 50% ostrzem służą do zabiegów w głębokich kieszonkach lub w obrębie furkacji. Ponieważ pojedyncze kirety Gracey są stosowane w specyficznych obszarach, użytkownik potrzebuje różnorodnych wariantów, by skutecznie przeprowadzić zabieg.

$$1 + 1 = 1$$

Double Gracey™ – Najnowsza innowacja

Seria podwójnych kiret Double Gracey jest najnowszą innowacją American Eagle Instruments. W jednym instrumencie połączono funkcje kilku kiret Gracey. Z ekonomicznego punktu widzenia umożliwia to efektywną pracę jedną kiretą zamiast kilkoma w jednym obszarze!

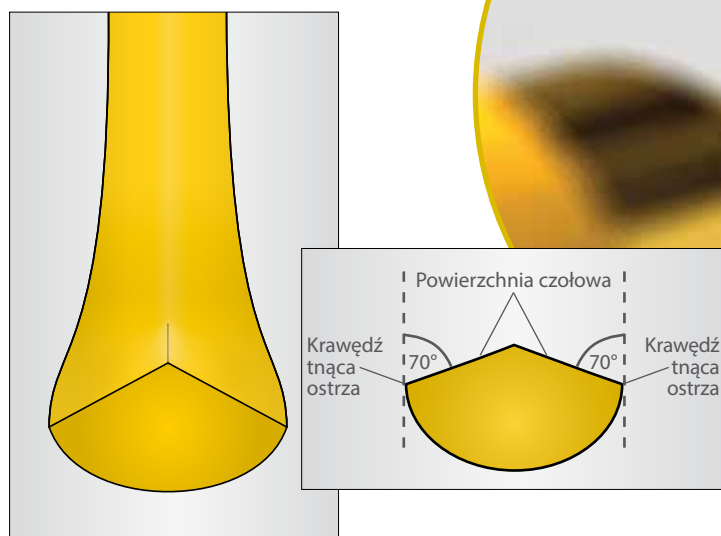

DG DOUBLE GRACEY^{xp}
The Next Generation




Double Gracey™ i technologia XP – Najlepsze połączenie!

Rozwój podwójnych kiret Double Gracey i ich produkcja stały się możliwe dopiero dzięki technologii XP. Dotychczas końcówki robocze narzędzi perio poprzez ostrzenie szybko traciły swój kształt i skuteczność. Dopiero dzięki technologii XP możemy zachować pierwotny kształt i ostrość krawędzi tnących podczas całego okresu eksploatacji narzędzi – NIE WYMAGAJĄ OSTRZENIA!

Nigdy więcej ostrzenia!

Technologia XP jest opatentowaną metodą obróbki powierzchni. Proces ten umożliwia wytwarzanie cieńszych, trwalszych i ostrzejszych narzędzi. Nie jest już potrzebne ich czasochłonne i często zmieniające kształt ostrzenie.

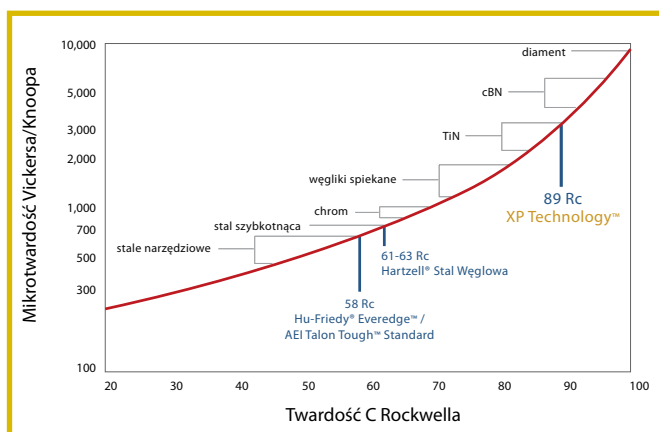

1.500 pociągnięć

Niezależne badania: Uniwersytet Toronto, Dr Phillip A. Watson, Wydział Nauk Biologicznych i Diagnostycznych.



15.000 pociągnięć

Twierdź: 89 RC

BW przypadku technologii XP na powierzchnię narzędzia wykonanego ze stali szlachetnej, nanoszony jest techniką nano, super twardy stop. Dzięki tej opatentowanej metodzie uzyskana powierzchnia jest znacznie trwalsza i bardziej odporna na ścieranie.

Tradycyjne narzędzia wykonywane ze stali szlachetnej lub stali węglowej osiągają na skali Rockwella stopień twardości od 58 do 63.

Dzięki technologii XP osiągana jest twardość rzędu 89 RC! Narzędzia XP są znacznie trwalsze!

15.000 pociągnięć – największe obciążenie


Niezależne badania uznają technologię XP za rewolucyjny, postęp w branży dentystycznej.

Dr Phillip A. Watson z Uniwersytetu Toronto wykazał, że trwałość narzędzi wykonywanych w oparciu o technologię XP jest znacząco wyższa niż dotychczas wykonywanych narzędzi.



Klasyczna kireta Gracey

Kirety Gracey przeznaczone są do poddziąsłowego usuwania złogów oraz do wygładzania powierzchni korzeni. Kąt ostrza pozwala na łatwe wprowadzenie w szczelinę/kieszonkę i minimalizuje uszkodzenie tkanki.

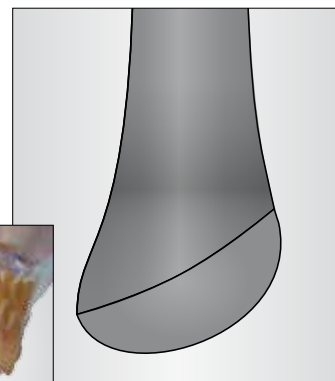

Double Gracey™ Regular



Double Gracey Anterior

zastępuje kirety Gracey 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 i 9-10.



Double Gracey Posterior

zastępuje kirety 11-12, 13-14, 15-16



Double Gracey™ Regular Quik-Tips



Double Gracey Anterior A



Double Gracey Anterior B



Double Gracey Posterior A




Double Gracey Posterior B

Quik-Tip Rękojeści

Do użytku końcówek Quik-Tip potrzebne są rękojeści.




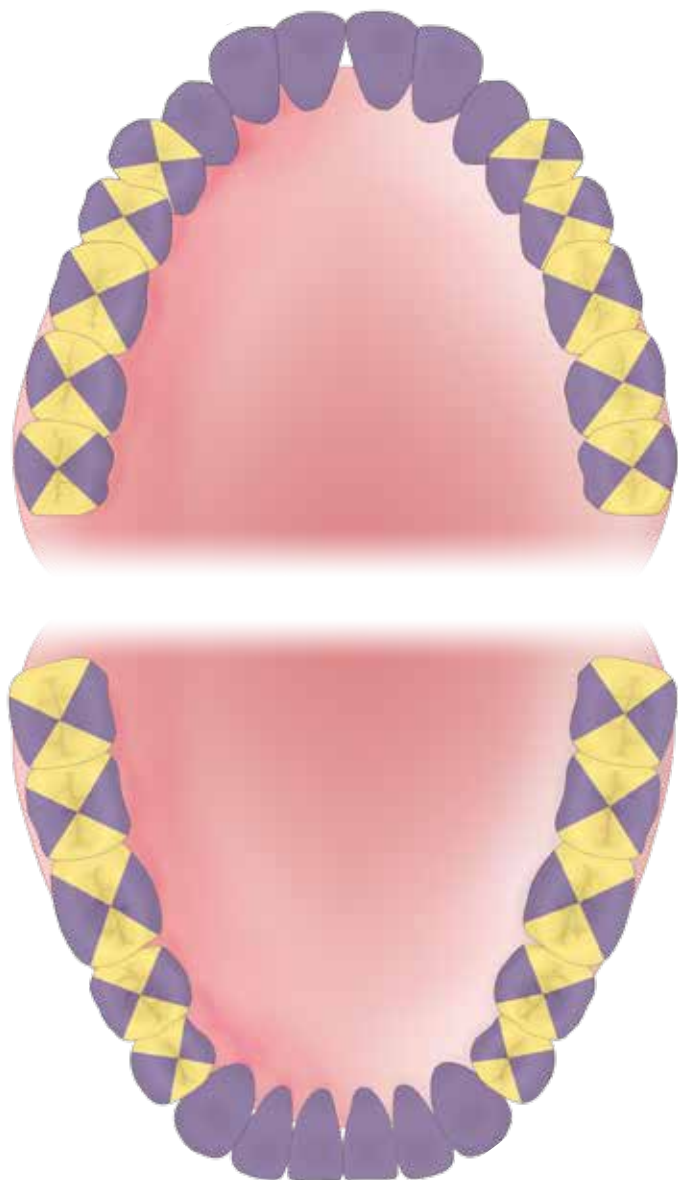

Przegląd pokazuje specyficzne obszary zastosowań kiret Double Gracey.
Double Gracey zastępują cały szereg standardowych kiret Gracey.

- Double Gracey Anterior
- Double Gracey Posterior

Poniżej mogą Państwo zobaczyć specyficzne obszary zastosowań standardowych kiret Gracey.


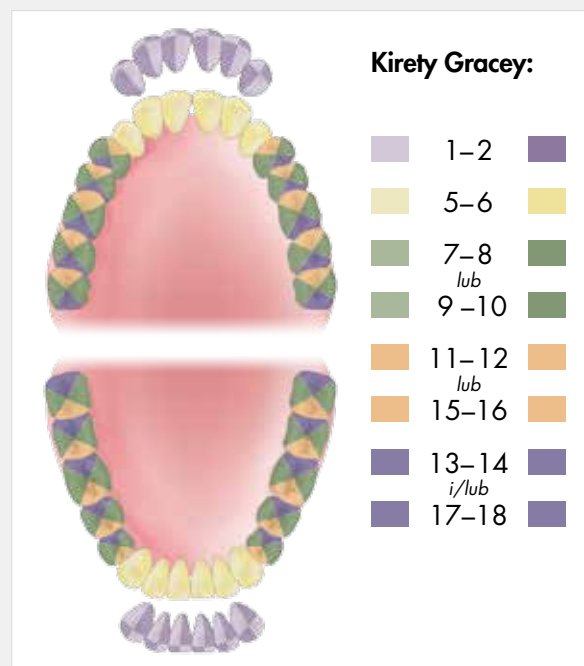


Obrazy kliniczne: Dr Klaus-Dieter Hellwege, Lauterecken, Niemcy.



Double Gracey™ Mini – do głębokich kieszonek

Dzięki skróconemu o 50 % ostrzu i wydłużonemu o 3 mm trzonowi końcowemu całe ostrze narzędzia przylega do powierzchni korzenia. Wąskie kieszonki i furkacje stają się łatwo dostępne.

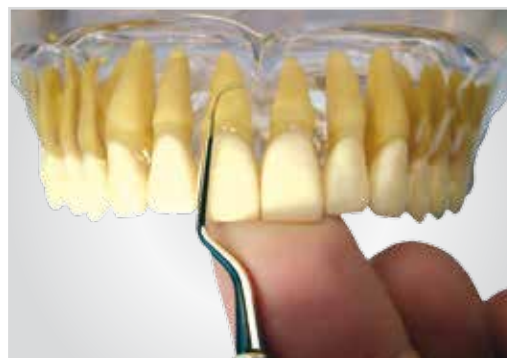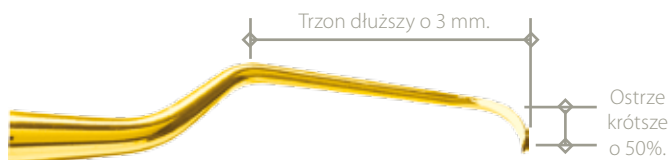

Double Gracey™ Mini



Double Gracey Mini Anterior

zastępuje kirety Gracey Access 1-2, 3-4, 5-6 i 7-8.



Double Gracey Mini Posterior

zastępuje kirety Gracey Access 11-12, 13-14 i 15-16.



Double Gracey™ Mini Quik-Tips



**Double Gracey
Mini Anterior A**



**Double Gracey
Mini Posterior A**



**Double Gracey
Mini Anterior B**



**Double Gracey
Mini Posterior B**

Quik-Tip Rękojeści


Do użytku końcówek Quik-Tip potrzebne są rękojeści.



Przegląd kiret pokazuje specyficzne obszary zastosowań narzędzi Double Gracey Mini. Dwa narzędzia zastępują cały szereg kiret Gracey Access (Mini-Five™*).

- Double Gracey Mini Anterior
- Double Gracey Mini Posterior

Jako porównanie, poniżej mogą Państwo zobaczyć specyficzne obszary zastosowań standardowych kiret Gracey Access.

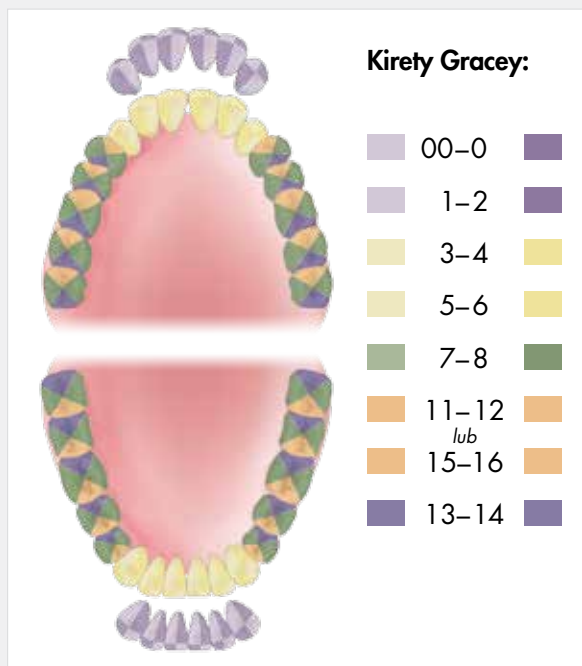

* Mini Five™ jest zarejestrowaną marką firmy Hu-Friedy®.



Przedni



**Tylny
Mezjalny**



**Tylny
Dystalny**

Obrazy kliniczne: prof. Moshe Goldstein, Uniwersytet Hadassah, Izrael.



Double Gracey | Zestawy i przegląd zamówienia

Zestaw kiret DOUBLE GRACEY

Nr artykułu:
AEDGKXPX



Zestaw kiret DOUBLE GRACEY

Nr artykułu:
AEDGMKXPX



Zamówienie mailem: mrusek@loser.de / tel.: +48 608 550 333

Nr artykułu	Opis	Cena	Ilość	Nr artykułu	Opis	Cena	Ilość
AEDGKXPX	Zestaw Double Gracey Instrumenty: Double Gracey Anterior i Double Gracey Posterior	834 PLN		AEQTHP	Quik-Tip rękojeść, kolor: fioletowy	93 PLN	
AEDGMKXPX	Double Gracey Mini Kit Instrumenty: Double Gracey Mini Anterior i Double Gracey Mini Posterior	834 PLN		AEQTHR	Quik-Tip rękojeść, kolor: czerwony	93 PLN	
AEDGAXPX	Double Gracey Anterior	417 PLN		AEQTHY	Quik-Tip rękojeść, kolor: żółty	93 PLN	
AEDGPXPX	Double Gracey Posterior	417 PLN		AEQTHZ	Quik-Tip rękojeść, stal szlachetna	93 PLN	
AEDGMAXPX	Double Gracey Mini Anterior	417 PLN		Fakturę wystawić na:			
AEDGMPXPX	Double Gracey Mini Posterior	417 PLN					
AEDGAAXPQT	Double Gracey Anterior A Quik-Tip	166 PLN					
AEDGABXPQT	Double Gracey Anterior B Quik-Tip	166 PLN					
AEDGPAXPQT	Double Gracey Posterior A Quik-Tip	166 PLN					
AEDGPBXPQT	Double Gracey Posterior B Quik-Tip	166 PLN		Dystrybutor:			
AEDGMAAXPQT	Double Gracey Mini Anterior A Quik-Tip	166 PLN					
AEDGMABXPQT	Double Gracey Mini Anterior B Quik-Tip	166 PLN					
AEDGMPAXPQT	Double Gracey Mini Posterior A Quik-Tip	166 PLN					
AEDGMPBXPQT	Double Gracey Mini Posterior B Quik-Tip	166 PLN					
AEQTHB	Quik-Tip rękojeść, kolor: niebieski	93 PLN					
AEQTHG	Quik-Tip rękojeść, kolor: zielony	93 PLN					
AEQTHX	Quik-Tip rękojeść, kolor: czarny	93 PLN					
AEQTHO	Quik-Tip rękojeść, kolor: pomarańczowy	93 PLN					

Wszystkie ceny obejmują obowiązkowy podatek VAT i obowiązują do 31.12.2015 r. Pomyłka i zmiana ceny zastrzeżona. Rysunki mogą wykazywać odchylenia odnośnie kolorystyki itd. od oryginalnego produktu. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe.

PR-268PL/08.2015



AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC
better DENTISTRY by DESIGN®

LOSER & CO
Zawsze coś dobrego...



PRZEDSTAWICIEL POLSKA: MAŁGORZATA RUSEK
tel.: +48 608 550 333 • e-mail: mrusek@loser.de
www.loser.eu • info@loser.eu