

ProThin™

z XP® Technology

The **Sharpen-Free** Instruments™



AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC
better DENTISTRY by DESIGN®

LOSER & CO
Zawsze coś dobrego...



Nowe instrumenty perio seria Pro Thin

Co sprawia, że Pro Thins są idealnymi narzędziami ręcznymi?


Cieńsze ostrza, technologia XP® oraz lżejsza rączka. Bez konieczności ostrzenia. Niezmieniony kształt ostrza przy ciągłym użyciu. Zwiększone wycucie podczas pracy instrumentem. Te instrumenty zostały zaprojektowane tak, aby dostosować się do różnych wymagań i wyzwań podczas wykonywania skalingu i root planingu. Od głębokich, wąskich kieszeni dziąsłowych po ciasne punkty styczne. Wszystkie te cechy zapewniają konsekwentną opiekę nad pacjentem i optymalne rezultaty.

Seria została pierwotnie zapoczątkowana przez Skaler M23 Pro Thin (str. 3) i obecnie obejmuje:

Skaler Blackjack Pro Thin XP str. 4	Kireta Gracey Access 7-8 Pro Thin XPstr. 6
Kireta uniwersalna Barnhart 5-6 Pro Thin XP..str. 5	Kireta Gracey Access 13-14 Pro Thin XP ...str. 7
Kireta Gracey Access 1-2 Pro Thin XP str. 6	Kireta Gracey Access 15-16 Pro Thin XP ...str. 7

Co to jest technologia XP?

Technologia XP jest opatentowaną metodą obróbki metali, w której rdzeń narzędzia, wykonany ze stali szlachetnej, pokrywany jest w specjalny sposób supertwardym stopem. Dzięki tej metodzie możliwe staje się wytwarzanie cieńszych, trwalszych i ostrzejszych narzędzi. Zbędne staje się czasochłonne ostrzenie. Używając instrumentów wykonanych w technologii XP należy stosować lekki nacisk, bez podrywania, zdejmując kamień warstwą po warstwie, podobnie jak w pracy z ultradźwiękami. Należy zrezygnować z silnego nacisku i gwałtownych szarpnięć! Instrumenty XP są bardziej ergonomiczne dla operatora oraz mniej traumatyczne dla pacjenta.

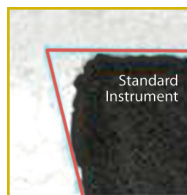

1.500
pociągnięć



15.000
pociągnięć

Badania: University of Toronto, Dr. Phillip A. Watson,
Dept. of Biological and Diagnostic Science

Skaler M23 Pro Thin™



AESM23T XPX

Skaler M23 Pro Thin pozwala na lepszą naddziąsłową i międzyzębową adaptację instrumentu aż do punktu stycznego zębów. Również dobrze dostosowuje się w miejscach przejścia do obszarów mezjalnych i dystalnych wszystkich zębów. Możliwość adaptacji instrumentu do wielu powierzchni zęba pozwala operatorowi skrócić czas potrzebny na wykonanie skalingu. Taka uniwersalność instrumentu umożliwia też zastąpienie skalerem M23 Pro Thin wszystkich innych skalerów tylnych i przednich, usprawniając i ujednoliconiając przygotowanie zestawów instrumentów do profilaktyki i periodontologii.



Obrazy kliniczne: Frau Sabrina Dogan (DH), Mauer.

Konstrukcja Pro Thin wraz z technologią XP obecne w jednym instrumencie umożliwia dostęp do nawet najmniejszych kawałków złogów kamienia np. w ciasnych kieszeniach dolnych siekaczy oraz ich przestrzeniach międzyzębowych. Operator nie musi używać siły, stosuje lekki uchwyt i lekkie pociągnięcia instrumentem dla dobrego wyczucia kamienia i jego skutecznego usuwania.

Dostępne również w wersji Quik-Tip™.



M23 Thin A XP Quik-Tip


- AESM23TAXPQT
Universal / posterior



M23 Thin B XP Quik-Tip

- AESM23TBXPQT
Universal / posterior

Skaler Blackjack Pro Thin™

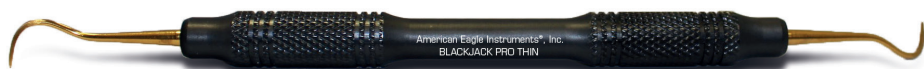

AESBJT XP X

Instrument ten powstał w AE jako odpowiedź na potrzeby rynku. Blackjack - bardzo popularny, naddziąsłowy instrument jest teraz cieńszy i trwalszy dzięki technologii XP, dając możliwość łatwiejszego dotarcia do wszystkich obszarów występowania kamienia naddziąsłowego. Wykonanie tak cienkiego instrumentu nigdy wcześniej nie było możliwe, gdyż mocne z dużą siłą nacisku pociągnięcia, złamałyby niezmiernie cienkie ostrze instrumentu.

Blackjack Pro Thin XP może zastąpić również wszystkie tylne i przednie skalery-sierpy w tym H6-7(skaler higienistki), ujednolicając przygotowanie zestawów do profilaktyki i periodontologii.



Konstrukcja ProThin i technologia XP Technology łączą się w celu zapewnienia dokładnego pokrycia obszaru międzyzębowego przedtrzonowców. Dla zwiększenia komfortu pacjenta i widoczności operatora/lekarza, użyto zewnątrzustny punkt podparcia.

Dostępne również w wersji Quik-Tip™.



Blackjack Thin A XP Quik-Tip

- AESBJTA XP QT
Anterior / interproximal /
posterior



Blackjack Thin B XP Quik-Tip

- AESBJTB XP QT
Anterior / interproximal /
posterior

Kireta uniwersalna Barnhart 5-6 Pro Thin™ XP



AEC B5-6T XP X

Kireta uniwersalna Barnhart 5-6 Pro Thin XP jest podstawą w profilaktyce higieny jamy ustnej. Jej konstrukcja pozwala na leczenie zapalenia dziąseł z płytkami kieszeniami i występującym kamieniem naddziąsłowym. Konstrukcja Pro Thin zwiększa wygodę użycia tego instrumentu, ułatwiając jego adaptację we wszystkich obszarach płytkich kieszeni dziąsłowych.



Kirety są zazwyczaj zbyt nieporęczne i grube, by łatwo uzyskać dostęp do kieszeni zębów przednich bez uszkodzenia tkanki miękkiej zwłaszcza w miejscu przejścia do obszarów mezjalnych i dystalnych. Barnhart 5-6 Pro Thin łatwo się tutaj dostosowuje, usuwając kamień, co jest niemożliwe przy tradycyjnych kiretach.

Dostępne również w wersji Quik-Tip™.



Barnhart 5 Thin XP Quik-Tip

- AEC B5T XP QT
Deeper shank angle posterior




Barnhart 6 Thin XP Quik-Tip

- AEC B6T XP QT
Deeper shank angle posterior

Kirety Gracey Access Pro Thin™ XP

Kirety Gracey to standard kompleksowego dbania o przyzębie pacjentów z kieszeniami powyżej 4 mm. W ostatnich latach, kirety o 50% krótszym ostrzu i o 3 mm przedłużonej ostatniej prostej (zwane w AE Gracey Access) zyskały w świecie znaczną popularność. My poszliśmy o krok dalej i zaprojektowaliśmy cieńsze ostrze, tak aby jeszcze zwiększyć dostępność do uwypukleń i wkleśnięć korzenia i jego furkacji. Jeżeli instrument wykonany jest ze stali skrócenie ostrza utrudnia jego ostrzenie. Ze zmniejszonym zużyciem instrumentu w technologii XP, Gracey Access Pro Thin zachowują swój oryginalny kształt oraz ustawienie ostrza pod kątem 70 stopni, zapewniając konsekwentną i skuteczną pracę instrumentami periodontologicznymi.

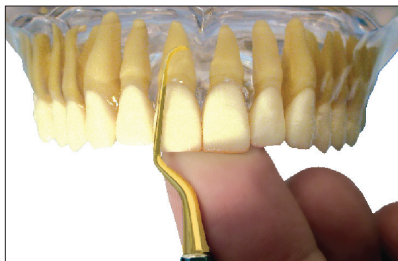

Kireta Gracey Access 1-2 Pro Thin XP



AEGA 1-2T XP X



Kireta Gracey Access 1-2 Pro Thin XP używana jest w kieszeniach głębszych niż 4 mm we wszystkich obszarach zębów przednich, jak również w obszarach furkacji trzonowców.

Kireta Gracey Access 7-8 Pro Thin™ XP



AEGA 7-8T XP X



Kireta Gracey Access 7-8 ProThin XP używana jest podczas pracy w kieszeniach głębszych niż 4 mm w obszarach zębów przednich, przedtrzonowców oraz furkacji trzonowców.

Kireta Gracey Access 13-14 Pro Thin™ XP



AE GA 13-14T XP X



Kireta Gracey Access 13-14 Pro Thin XP pozwala na dostęp do wszystkich dystalnych powierzchni i kieszeni trzonowców. Cieńsze ostrze ułatwia pracę w wąskich kieszeniach zwłaszcza przy pacjentach z obniżonym przyczepem łącznotkankowym.

Kireta Gracey Access 15-16 Pro Thin™ XP



AE GA 15-16T XP X



Kireta Gracey Access 15-16 Pro Thin XP jest nową, ulepszoną wersją tradycyjnej kirety 11-12. W konstrukcji 15-16, wygięcia/angulacja części pośredniej ułatwia dostęp do wszystkich mezjalnych oraz policzkowych i językowych/podniebiennych powierzchni. Ułatwia ustawienie ręki oraz zmniejsza zmęczenie operatora.

Dostępne również w wersji Quik-Tip™.



Gracey Access 1
XP Quik-Tip

● **AE GA 1T XP QT**
Anterior



Gracey Access 7
XP Quik-Tip

● **AE GA 7T XP QT**
Pre-molar / molar



Gracey Access 13
XP Quik-Tip

● **AE GA 13T XP QT**
Posterior distal



Gracey Access 15
XP Quik-Tip

● **AE GA 15T XP QT**
Posterior mesial



Gracey Access 2
XP Quik-Tip

● **AE GA 2T XP QT**
Anterior



Gracey Access 8
XP Quik-Tip

● **AE GA 8T XP QT**
Pre-molar / molar



Gracey Access 14
XP Quik-Tip

● **AE GA 14T XP QT**
Posterior distal



Gracey Access 16
XP Quik-Tip

● **AE GA 16T XP QT**
Posterior mesial



LOSER & CO
Zawsze coś dobrego...



LOSER & CO GMBH • DISTRIBUTOR OF DENTAL PRODUCTS
e-mail: info@loser.de • www.loser.de

PRZEDSTAWICIEL POLSKA: MAŁGORZATA RUSEK
tel.: 608 550 333 • e-mail: mrusek@loser.de