

Composi-Tight® 3D Fusion™ 

System Formówek Sekcyjnych

NOWOŚĆ!



Najlepszy system formówek sekcyjnych:
teraz również z nowymi formówkami
Composi-Tight® 3D Fusion™ Bands
dla uzyskania najlepszych rezultatów

Garrison
Dental Solutions

Spis treści

Composi-Tight® 3D Fusion™ NOWOŚĆ

Composi-Tight® 3D Fusion™ Pierścienie	4
Composi-Tight® 3D Fusion™ System	5
Formówek Sekcyjnych NOWOŚĆ	
Formówki Composi-Tight® 3D Fusion™	6
Kliny Composi-Tight® 3D Fusion™	7

Systemy formówek sekcyjnych

Composi-Tight® 3D Fusion™ NOWOŚĆ	5
Composi-Tight® 3D XR	10
Composi-Tight® 3D Clear	12
Composi-Tight Gold®	14
Composi-Tight® Original	15

Pierścienie

Composi-Tight® 3D Fusion™ zielony, niebieski, pomarańczowy NOWOŚĆ	4
Composi-Tight® 3D XR and 3D500	10
Composi-Tight® 3D Clear	13
Composi-Tight Gold®	14
Composi-Tight® Original	15

Formówki

Composi-Tight® 3D Fusion™ NOWOŚĆ	6
Composi-Tight® Slick Bands™ XR Matrices	11
Formówki Composi-Tight® 3D Matrix	11
Formówki Composi-Tight® 3D Clear Matrix	13
Formówki Composi-Tight Gold® Matrix	14
Formówki Composi-Tight® Original Matrix	15

System formówek do zębów przednich

VariStrip™	19
------------	----

Zastrzega się prawo do korekty błędów oraz zmiany specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.

System tradycyjny

Formówki typu Tofflemire

Slick Bands™ Margin Elevation Bands	21-22
Slick Bands™ Tofflemire-style	20-22

Kliny

Kliny Composi-Tight® 3D Fusion™ NOWOŚĆ	7
Kliny plastikowe z aplikatorem WedgeWands®	16
Kliny plastikowe A+Wedge™ nasączone płynem Astringent	17
Kliny plastikowe G-Wedge™	18
Kliny drewniane miękkie Soft Wedge™	18

Niezbędne akcesoria

Kleszcze do formówek	23
----------------------	----

Kleszcze do mocowania pierścieni	4
Composi-Tight® 3D Fusion NOWOŚĆ	
Kleszcze do mocowania pierścieni	23
Kleszcze uniwersalne	23
Narzędzie do formowania punktu styczności PerForm™ Contact Former	26
Antyadhezyjne narzędzia multifunkcyjne 5w1	27
Dwustronne upychadło do nici retrakcyjnych	28
Narzędzia do kompozytów	28-29
System paseczków do wykończenia i konturowania przestrzeni międzyzębowych FitStrip™	24

Akcesoria do końcowego opracowania wypełnień

Gumki do polerowania

Mini - gumki do polerowania kompozytów i ceramiki hybrydowej Rally™	25
Gumki do polerowania uzupełnień z tlenku cyrkonu i dwukrzemianu litu eZr™	30-31

Kluczowi liderzy opinii

Opinie użytkowników produktów Garrison	32-33
--	-------

Wskazówki dla czyszczenia i sterylizacji

35


NOWOŚĆ!

Gdy połączysz design
z funkcjonalnością otrzymasz ...

3D FUSION!



Jedyny w swoim rodzaju!
Pierścień do rozległych
ubytków

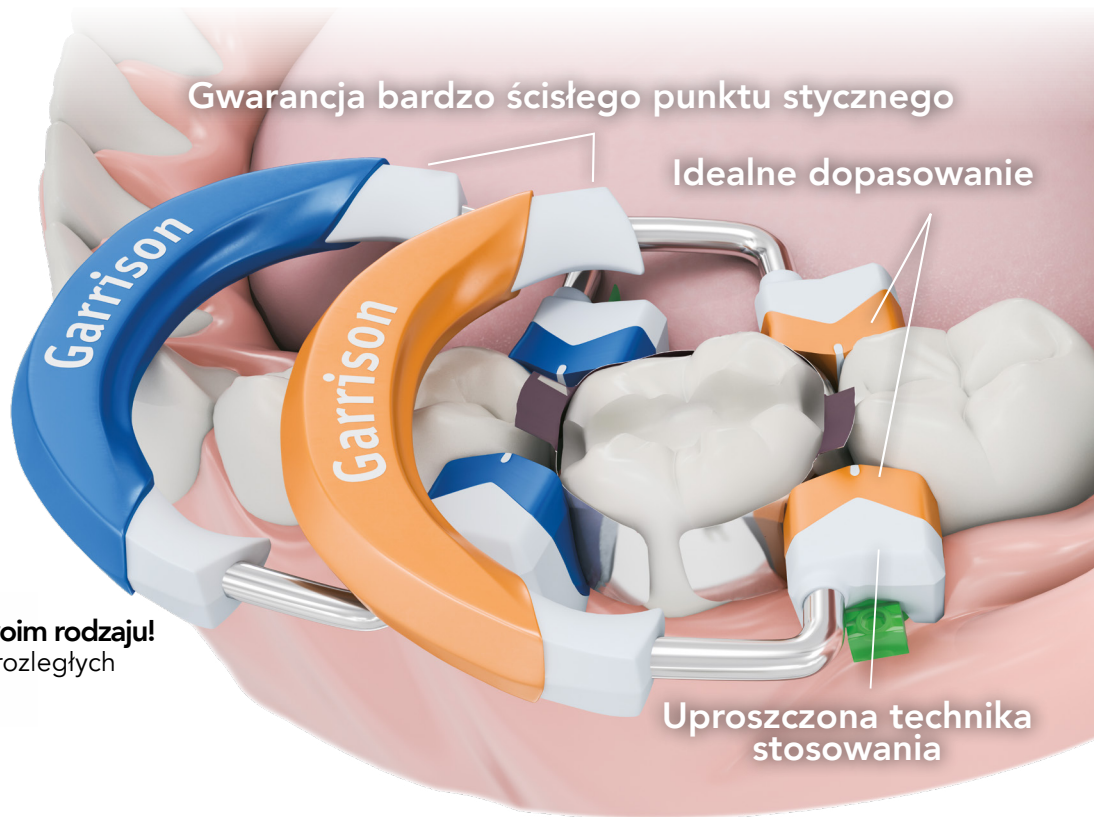

Gwarancja bardzo ścisłego punktu stycznego

Idealne dopasowanie

Uproszczona technika
stosowania

Composi-Tight® 3D Fusion™

Sectional Matrix System



Nowy, zielony pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ do rozległych preparacji

Jest idealny do szerokich nisz międzyzębowych, zachowuje formę nawet w przypadku braku guzka zęba. Szerokie końcówki silikonowe zapobiegają wgnieceniu formówki do ubytku FX600 (2 sztuki /opak.)



Pomarańczowy pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ - teraz z końcówkami retencyjnymi

Końcówki retencyjne Ultra-Grip™ zapobiegają ześlizgiwaniu się wszystkich pierścieni Composi-Tight® 3D Fusion™. Ulepszony kształt powoduje, iż otwieranie i umieszczanie pierścienia na zębach jest jeszcze prostsze. Bardzo dobrze trzyma się również na dużych zębach trzonowych FX500 (2 sztuki /opak.)



Popularny, niebieski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ który można teraz jeszcze łatwiej otworzyć

Nowy pierścień zapewni lepsze dopasowanie do anatomicznej wypukłości zęba dzięki miękkim, silikonowym końcówkom. Szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku zębów krótkich oraz ustawionych, dobrze trzyma się nad kłami przedtrzonowymi lub pomiędzy zębami przedtrzonowymi i kłami FX400 (2 sztuki /opak.)

NOWOŚĆ!



-5-

Produkt	Opis	Cena
FX600	Pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ do rozległych preparacji, zielony, 2 sztuki/opak.	884 zł
FX600-1	Pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ 1 sztuka/opak	464 zł
FX500	Wysoki pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ , pomarańczowy, 2 sztuki/opak.	884 zł
FX500-1	Wysoki pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, pomarańczowy, 1 sztuka/opak.	464 zł
FX400	Niski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, niebieski, 2 sztuki/opak.	884 zł
FX400-1	Niski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ , niebieski, 1 sztuka/opak.	464 zł
FXR01	Zestaw 3 pierścieni (1x zielony, 1x pomarańczowy, 1x niebieski)	1296 zł
FXP01	Kleszce do mocowania pierścieni Composi-Tight® 3D Fusion™	395 zł

Composi-Tight® 3D Fusion™

System Formówek Sekcyjnych

NOWOŚĆ!



Nowy System Formówek Sekcyjnych Composi-Tight® 3D Fusion™ zapewnia skuteczne rozwiązanie dla wszystkich ubytków klasy II.

Miękkie silikonowe końcówki Soft-Face™ z udoskonaloną krawędzią brzezną idealnie dopasowują formówkę do zęba, gwarantując doskonały punkt styku oraz uniknięcie nadmiaru wypełnienia przy odbudowie zęba.

2119 zł

Produkt	Opis	Cena
FX-KFF-00	1x niski pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, niebieski,	2119 zł
Zestaw	1x wysoki pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™, pomarańczowy,	
Startowy	1x pierścień Composi-Tight® 3D Fusion™ do rozległych preparacji, zielony,	
	80x kliny Composi-Tight® 3D Fusion™ w 4 rozmiarach,	
	70x formówki Composi-Tight® 3D Fusion™ w 5 rozmiarach,	
	1x kleszcze do osadzania pierścieni	
FX-KFF-04	1x zestaw startowy Composi-Tight® 3D Fusion™ FX-KFF-00, oraz	2516 zł
	1x kleszcze do formówek BFA1 (str. 23)	
FX-KFF-01	1x zestaw startowy Composi-Tight® 3D Fusion™ FX-KFF-00, oraz	2916 zł
	1x kleszcze do formówek BFA1 (str. 23), oraz	
	1x narzędzie multifunkcyjne TN009 (str. 27)	

Zamów swój zestaw już dziś , telefonicznie pod nr. +48 22 514 62 00
lub wysyłając formularz zamówienia faxem na nr +48 22 514 62 24

Composi-Tight® 3D Fusion™

Formówki Full Curve z powłoką antyadhezyjną

Pasują do każdego kształtu zęba!

	przedtrzonowce	przedtrzonowce z głęboką preparacją przyszykową	przedtrzonowce i małe trzonowce	trzonowce	trzonowce z głęboką preparacją przyszykową
Formówki Composi-Tight® 3D Fusion™					
0.038 mm grubość					
Nr produktu	FX100	FX150	FX175	FX200	FX300
Wysokość	4.4 mm	6.0 mm	5.6 mm	6.6 mm	8.7 mm
Ilość sztuk w opakowaniu	100 szt.	60 szt.	100 szt.	100 szt.	60 szt.
	536 zł	536 zł	536 zł	536 zł	536 zł
Nr produktu	FX100-M	FX150-M	FX175-M	FX200-M	FX300-M
Wysokość	4.4 mm	6.0 mm	5.6 mm	6.6 mm	8.7 mm
Ilość sztuk w opakowaniu	50 szt.	30 szt.	50 szt.	50 szt.	30 szt.
	296 zł	296 zł	296 zł	296 zł	296 zł

Formówki Composi-Tight® 3D Fusion™



Kompletny zestaw formówek we wszystkich rozmiarach

FXB02 z 210 formówkami

1268 zł



NOWOŚĆ!

Dokładne owinięcie – formówki Full Curve owijają się dalej dookoła zęba, co ułatwia zamocowanie pierścienia.

Większa kontrola – specjalny uchwyt Grab Tab™ w części okluzyjnej daje doskonałą kontrolę niezależnie od rodzaju wybranego narzędzia do mocowania.

Lepsze dopasowanie – ulepszone poddziążłowe rozszerzenie oraz zwiększona długość zapewniają uzyskanie lepszych rezultatów przy bardziej wymagających odbudowach.

Proste mocowanie – zaawansowany zakrzywiony kształt formówek poprawia ich strukturalną sztywność, co czyni je najłatwiejszymi w użyciu ze wszystkich naszych formówek.

Proste zdejmowanie – formówki Composi-Tight® 3D Fusion™ Full Curve nie byłyby kompletne bez stworzonej przez firmę Garrison antyadhezyjnej powłoki Slick Bands™

Produkt	Opis	Cena
FXB01	Zestaw formówek Composi-Tight® 3D Fusion™ – asortyment 420 sztuk (po 100 szt. każdego z rozmiarów: FX100, FX175, FX200 oraz po 60 szt. w rozmiarach FX150 i FX300)	2408 zł
FXB02	Zestaw formówek Composi-Tight® 3D Fusion™ – asortyment 210 sztuk (po 50 szt. każdego z rozmiarów: FX100, FX175, FX200 oraz po 30 szt. w rozmiarach FX150 i FX300)	1268 zł
BFA-1	Kleszcze do formówek	596 zł

NOWOŚĆ!

Łącząc adaptacyjne materiały Soft-Face™

sztywny rdzeń wewnętrzny oraz zaawansowane właściwości mechaniczne, stworzono klin, który naprawdę działa. Za każdym razem.



Kliny

-8-



Twardy rdzeń.
 Sztywny szkielet wewnętrzny pozwala na łatwe wprowadzanie klina oraz separację zębów, podobnie jak w przypadku tradycyjnych klinów.



Pewny chwyt.


Uniwersalny uchwyt zapewnia absolutną kontrolę podczas zakładania klina niezależnie od tego, czy stosujesz klasyczne chirurgiczne czy też pęsetę do waty. Korzystając z dowolnych narzędzi - Composit-Tight® 3D Fusion™ będzie cię wspierać.

Naprawdę miękki.

Miękkie tworzywo Soft-Face™ pokrywające kliny Composit-Tight® 3D Fusion pozwala mu dokonać tego, czego żaden inny klin nie potrafi - właściwie dostosować się do nieregularnych kształtów przestrzeni międzyzębowej.

Odpowiednio wyprofilowane wypustki

Miękkie retencyjne wypustki gładko składają się podczas zakładania klina, aby ponownie otworzyć się po przekroczeniu punktu styku. Wysuwanie się klina to już przeszłość.

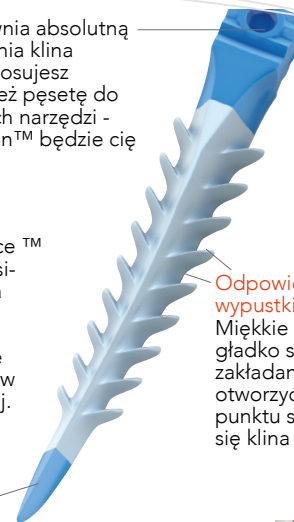

Bez bólu – same plusy.

Wzniesiony, przypominający narty wierzchołek klina oraz łagodny promień krawędzi zapewniają płynne przesuwanie się klina nad płatem koferdamu lub brodawką dziąsłową oraz bezbolesną aplikację.

Czysto i such!

opatentowany kształt klina idealnie podąża za konturem zęba, dopasowując się do niego, umożliwia precyzyjną odbudowę ubytku bez powstawania nawisów poddziąsłowych.



Kliny Composit-Tight® 3D Fusion™

Zestaw Opis

FXK4-M Zestaw klinów Composit-Tight® 3D Fusion™ 200 sztuk
 - 50 sztuk każdego koloru

Ilość

412 zł

Uzupełnienie

FXYL	kliny X –Small, żółte	50 szt.	220 zł
FXBL	kliny Small, niebieskie	50 szt.	220 zł
FXOR	kliny Medium, pomarańczowe.	50 szt.	220 zł
FXGR	kliny Large, zielone	50 szt.	220 zł

Composi-Tight® 3D XR

3DXR zapewnia znakomite wyniki, nawet w przypadku trudnego uzębienia.



3D-KMW-00

3D-KMW-00

- 2 3D500 Soft Face 3D Ring
- 1 3DXR Soft Face 3DXR Xtra Retention Ring
- 100 Wedge Wands plastikowe stomatologiczne kliny, po 25 szt. każdego rozmiaru
- 100 M-Bands, pogrupowane w 5 rozmiarach.
- 1 kleszcze do zakładania pierścieni

2116 zł

System Formówek Sekcyjnych

-9-



Composi-Tight® 3DFusion

FX-KFF-50

- 1 niebieski pierścień FX400
- 1 zielony pierścień FX600
- 40 3D Fusion formówki po 10 szt. rozmiaru FX100/200/175, po 5 szt. rozmiaru FX150/300
- 40 3D Fusion kliny 10 szt. każdego rozmiaru
- 1 kleszcze do zakładania pierścieni

1480 zł



FX-KFF-50

Zamów swój zestaw już dziś telefonicznie pod nr. +48 22 514 62 00, mailem pod adresem info@koldental.com.pl, lub wysyłając formularz zamówienia faxem na nr +48 22 514 62 24.
Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiedniego zestawu, zadzwoń pod nr. +48 22 514 62 00

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się o innych konfiguracjach zestawów, zadzwoń pod nr. +48 22 514 62 00 lub wejdź na stronę e-store.koldental.com.pl



Composi-Tight® 3D XR

**Zwycięzca Top Sectional Matrix 5+ w roku 2017
oraz nagrody Editors' Choice Award w roku 2013**




Wg. Dental Advisor - Najlepszy system formówek sekcyjnych w latach 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 oraz laureat nagrody Editors' Choice Award w roku 2013

System formówek sekcyjnych Composi-Tight został ponownie wybrany w 2017 r. przez Dental Advisor jako najlepszy system formówek. Pierścień 3D XR uzyskał najwyższą ocenę 5+ - najbardziej pożądaną ocenę wystawianą przez Dental Advisor.


Perfekcyjny punkt stykowy bez nadmiaru wypełnienia.

Pierścień 3D XR Extra Retention zapewnia znakomite wyniki nawet przy trudnym uzębieniu oraz eliminuje możliwość „zeskoczenia” pierścienia.

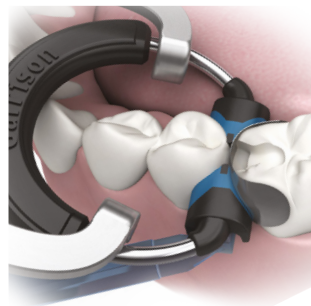


Zaawansowane polimerowe końcówki starczą na dłużej.

Końcówki Soft-Face™ dokładnie dociskają formówkę do zęba, co pozwala uniknąć nadmiaru wypełnienia.

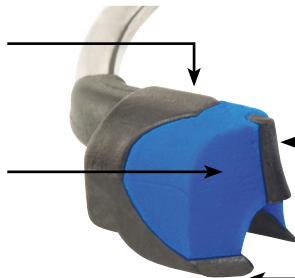


Twardy rdzeń zapewnia odpowiednią siłę docisku przy punktach stykowych, tam gdzie jest to najbardziej efektywne.

Geometria końcówek eliminuje możliwość „zeskoczenia” pierścienia przy trudnym uzębieniu. Pewna odbudowa krótkich lub nieprawidłowo ustawionych zębów oraz pomiędzy kłem a zębem przedtrzonowym. Dobrze trzyma się nawet nad kłami do koferdamu!

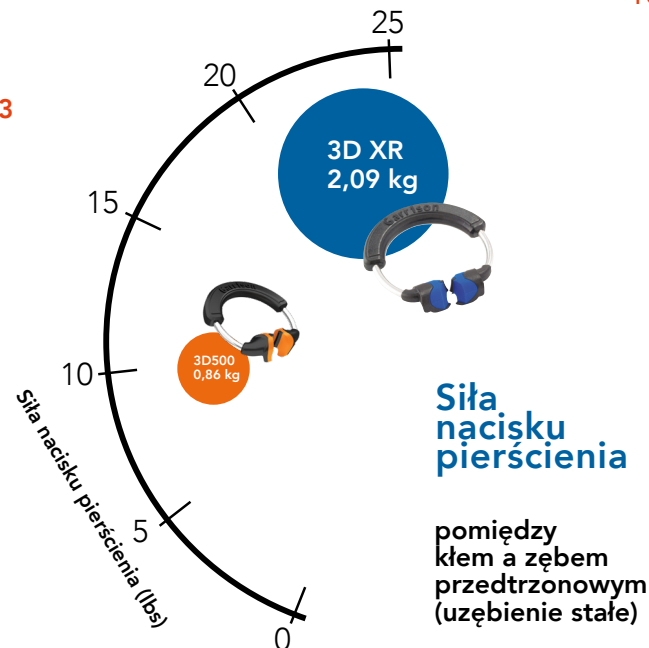

Composi-Tight® 3D XR ☼☼

Przejdź na wyższy poziom z pierścieniami, które nie „zeskoczą”!

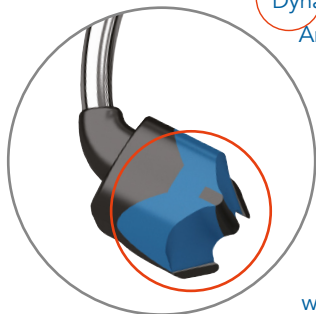


Dynamiczna końcówka Dynamic Tip Angle™ w połączeniu z wypustkami retencyjnymi doskonale dopasowuje się do punktu stycznego, dając niezrównanie doskonały chwyt!

Wypustki Soft-Face™ ciasno przylegają do zęba zapewniając komfort odbudowy bez nadmiaru wypełnienia.!



Dr. Wolfgang Boer,
Euskirchen,
Niemcy

“Niebieska wersja pierścieni zaciskowych okazała się bardzo korzystna dla mojej praktyki: nie tylko trzymają się znacznie dłużej niż tradycyjne pomarańczowe pierścienie, ale także lepiej dopasowują się do zębów młodych pacjentów. Obecnie używam niebieskich pierścieni zaciskowych w około 80% wszystkich przypadków, a tradycyjne pomarańczowe pierścienie prawie wyłącznie u pacjentów starszych, lub ze stałymi przedtrzonowcami.”

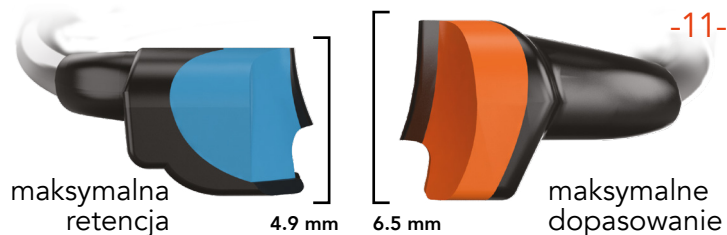

Pierścień do matryc sekcyjnych Composi-Tight® 3D XR Soft-Face™ jest ultra retencyjnym pierścieniem stworzonym do pracy z krótkimi lub nieprawidłowo ukształtowanymi zębami, oraz w przestrzeni między kłami a pierwszymi przedtrzonowcami.

Pomarańczowy pierścień z miękką końcówką Soft-Face™ zapewnia wyjątkową łatwość umieszczania oraz maksymalną adaptację dla szerokiego spektrum budowy zęba, przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiaru wypełnienia.

Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa zawsze używaj koferdamu oraz naszych kleszczy do mocowania pierścieni!



Produkt	Opis	ilość.	Cena
3DXR	Ekstra retencyjne pierścienie Soft-Face™ (niebieskie)	2 szt.	864 zł
3D500	Pierścienie 3D Soft-Face™ (pomarańczowe)	2 szt.	844 zł
3D400	Pierścienie z cienkimi końcówkami ThinTine G-Rings®	3 szt.	364 zł

Slick Bands™ XR

Prostsze w zakładaniu oraz zoptymalizowane do szerszych preparacji!

	dziecięce	przedtrzonowce	przedtrzonowce z głęboką preparacją przyszykową	przedtrzonowce i małe trzonowce	trzonowce	trzonowce z głęboką preparacją przyszykową
Formówki Slick-Band™ XR posiadają antyadhezyjną powłokę oraz uchwyty Grab-Tabs™ dla łatwiejszego zakładania						
0.038 mm grubość						
numer prod.	N/A	SXR100	SXR150	SXR175	SXR200	SXR300
wysokość		4.6 mm	3.8 mm	5.4 mm	6.4 mm	6.4 mm
ilość szt./op.		100 szt.	60 szt.	100 szt.	100 szt.	60 szt.
		260 zł	476 zł	476 zł	476 zł	476 zł
numer prod.	N/A	SXR100-M	SXR150-M	SXR175-M	SXR200-M	SXR300-M
wysokość		4.6 mm	3.8 mm	5.4 mm	6.4 mm	6.4 mm
ilość szt./op.		50 szt.	30 szt.	50 szt.	50 szt.	30 szt.
		260 zł	260 zł	260 zł	260 zł	260 zł

Slick Bands™ XR Matrix Bands

Composi-Tight3D

Formówki Composi-Tight® 3D są konturowane w 3 wymiarach						
0.035 mm grubość						
numer prod.	M050	M100	M150	M175	M200	M300
wysokość	3.2 mm	4.6 mm	3.8 mm	5.5 mm	6.4 mm	6.4 mm
ilość szt. op.	50 szt.	100 szt.	50 szt.	100 szt.	100 szt.	50 szt.
	344 zł	344 zł	344 zł	344 zł	344 zł	344 zł
numer prod.	M050-M	M100-M	M150-M	M175-M	M200-M	M300-M
wysokość	3.2 mm	4.6 mm	3.8 mm	5.5 mm	6.4 mm	6.4 mm
ilość szt. op.	25 szt.	50 szt.	25 szt.	50 szt.	50 szt.	25 szt.
	188 zł	188 zł	188 zł	188 zł	188 zł	188 zł

Formówki Composi-Tight® 3D

- Powłoka antyadhezyjna znacznie ogranicza przyklejanie się materiałów łączących oraz kompozytów
- Małe uchwyty Grab Tabs™ w rogach ułatwiają użycie formówek
- Ulepszony kształt zoptymalizowano dla ubytków poddziąsłowych
- 5 różnych rozmiarów, trójwymiarowe konturowanie oraz perfekcyjna elastyczność
- 6 różnych rozmiarów, trójwymiarowe konturowanie oraz perfekcyjna elastyczność
- Grubość jedynie 0,035 mm do ciasnych punktów styčných
- Wstępnie zaokrąglone dla uzyskania najbardziej anatomicznego kształtu



Composi-Tight® 3D Clear ::

System transparentnych formówek sekcyjnych

System ten łączy przezroczyste i przepuszczające światło materiały pozwalając na polimeryzację wypełnienia. Teraz lekarze mogą polimeryzować wypełnienia światłem, zarówno ze strony policzkowej jak i językowej, bez zakłóceń ze strony metalowych formówek oraz nieprzezroczystych pierścieni. To ułatwia prawidłową polimeryzację kompozytu zarówno w częściach dodziąsłowych, jak też przy odbudowach rozległych ubytków klasy II.

"...Jestem pod szczególnym wrażeniem formówek 3D Clear, które tak gładko owijają się wokół zęba i pomagają uformować jego krawędź brzeżną"



John E. Garrison, DDS

Zestaw Sectional Matrix System 3D-KCC-01:

Zawiera:

- 1 pierścień Composi-Tight® 3D XR (niebieski)
- 2 pierścienie 3D600 Clear Soft-Face™ (przezroczyste)
- 100 przezroczystych formówek Cure-Through (po 30 sztuk MC100 oraz MC200; 40 sztuk MC175)
- 100 przezroczystych klinów Cure-Through Wedge Wands® (po 25 szt. każdego rozmiaru)
- 1 ulepszone kleszcze do mocowania pierścieni
- 1 kleszcze do formówek (BFA-1) (str. 23)
- 1 multifunkcyjny Instrument do kompozytu (TN009) (str. 27)



Zestawy Opis
 3D-KCC-01 3D CLEAR System Kit
 (zaprezentowany powyżej)

Cena
2999 zł

3D-KCC-00 3D CLEAR System Kit -
 zawiera wszystkie wymienione powyżej
 elementy Z WYJĄTKIEM BFA-1 oraz TN009

2116 zł



Composi-Tight® 3D Clear

Pierścienie:

Przezroczysty pierścień separujący (3D600) to specjalna odmiana bardzo popularnego pierścienia 3D Soft-Face™ 3D (3D500). Posiada tą samą budowę końcówek z miękkiego silikonu, która praktycznie eliminuje nadmiar wypełnienia zarówno od strony policzkowej, jak też od strony językowej. W zestawie znajduje się także jeden nieprzezroczysty, niebieski pierścień 3D XR, który zapewnia dodatkową retencję przy trudnym uzębieniu.

Pierścienie Opis

		Ilość.	Cena
3D600	Pierścień CLEAR Soft-Face™ (przezroczysty)	2 sztuki	844 zł
3DXR	Pierścień Soft-Face™ Extra Retention (niebieski)	2 sztuki	864 zł

Composi-Tight®
3D Clear
grubość 0.05
mm



MC100



MC175



MC200

Najczęściej
używane do

przedtrzonow-
ców
5,0 mm

zębów dwu-
guzkowych
i małych
trzonowców
5,9 mm

wysokich
trzonowców
6,8 mm

Formówki

	Opis	Ilość	Cena
MC100	Formówki do przedtrzonowców	100 sztuk	476 zł
MC175	Formówki do zębów dwuguzkowych i małych trzonowców	100 sztuk	476 zł
MC200	Formówki do wysokich zębów trzonowych	100 sztuk	476 zł


Dr. Enrico
Cogo.
Italy



Formówki:

Formówki Composi-Tight® 3D Clear mają grubość 0.05mm i są dostępne w trzech wysokościach. Posiadają uchwyty na brzegu dziąsłowym ułatwiające zakładanie, są też konturowane w trzech wymiarach. Dodatkowo, krzywizna paska została poprawiona przy krawędzi brzeżnej dla zapewnienia lepszej anatomii.

Lepszy kontur przy
krawędzi brzeżnej

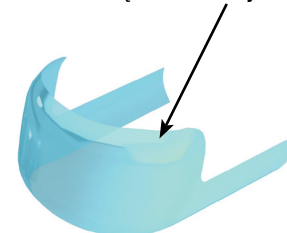

System formówek sekcyjnych AUK2 – zestaw Gold:

Druga generacja systemu Composi-Tight, dalej uwielbiana przez wielu dentystów.



Dr. Martin Able,
USA

"Composi-Tight Gold® jest wspaniałą formówką, pozwalającą uzyskać bardziej przewidywalne i dokładne punkty styczne z anatomicznymi brzegami. Stanowi ona wzorzec we współczesnej stomatologii i odbudowach kompozytowych. Istnieje kilka produktów stomatologicznych, bez których nie jestem w stanie praktykować. Formówki Composi-Tight® oraz kliny Wedge Wands® to dwa takie produkty."



AUK2

Zestawy	Opis	Ilość	Cena
AUK2	Composi-Tight Gold z kleszczami (zaprezentowany)		1900 zł

Pierścienie G-Rings™

AU400	G-Rings™ z wypustkami standardowej długości	3 szt.	368 zł
AU500	G-Rings™ z wypustkami o wydłużonej długości	3 szt.	368 zł

Formówki

AU050	Formówki dziecięce	50 szt.	344 zł
AU100	Formówki do przedtrzonowców	100 szt.	344 zł
AU100-M	Formówki do przedtrzonowców, małe opakowanie	50 szt.	188 zł
AU150	Formówki poddłużsłowe do przedtrzonowców	50 szt.	344 zł
AU200	Wysokie formówki do trzonowców	100 szt.	344 zł
AU200-M	Wysokie formówki do trzonowców, małe opakowanie	50 szt.	188 zł
AU300	Wysokie formówki poddłużsłowe do trzonowców	50 szt.	323 zł
AUMRDF-100	Kleszcze do zakładania pierścieni	1szt.	316 zł



Zestaw AUK2 zawiera:

250 formówek (po 100 szt. każdego typu AU100, AU200; po 25 szt. każdego typu AU150, AU300)
6 pierścieni G-Ring (3 standardowe, 3 długie)
1 kleszcze do zakładania pierścieni

Composi-Tight
Gold®
Grubość 0.035
mm

Najczęściej
stosowane do:
wysokość
ilość/opak.

AU050	AU100	AU150	AU200	AU300
dziecięce 3.2 mm 50 szt.	przedtrzonowce 4.6 mm 100 szt.	przedtrzonowce z głęboką preparacją przyszyjkową 3.8 mm 50 szt.	trzonowce 6,4 mm 100 szt.	trzonowce z głęboką preparacją przyszyjkową 6,4 mm 50 szt.

Composi-Tight®

System Formówek Sekcyjnych K102 – Oryginalny zestaw:

Nasz pierwszy system, który wyznaczył standardy dla ciasnych anatomicznych punktów stykowych.



Zestaw

K102

Opis

Zestaw Original z kleszczami (zaprezentowany)

G-Rings™

G100	Pierścień G-Ring™ standardowy
G200	Pierścień G-Ring™ do wysokich zębów

Formówki

B050	Formówki dla dzieci	50 szt.	300 zł
B100	Formówki do przedtrzonowców	100 szt.	300 zł
B100-M	Formówki do przedtrzonowców, małe opakowanie	50 szt.	164 zł
B150	Formówki poddziąsłowe do przedtrzonowców	50 szt.	300 zł
B200	Formówki do wysokich trzonowców	100 szt.	300 zł
B200-M	Formówki do wysokich trzonowców, małe opakowanie	50 szt.	164 zł
B300	Formówki poddziąsłowe do wysokich trzonowców	50 szt.	300 zł

AUMRDF-100

/ MRDF-100 Kleszcze do mocowania pierścieni

316 zł

Ilość Cena
1714 zł



Zestaw K102 zawiera:

225 formówek (po 100 szt.- B100, B200; 25 szt. B300)

7 Pierścieni G-Ring (4 standardowe, 3 długie)

1 kleszcze do mocowania pierścieni


K102 - Zestaw Original

Composi-Tight®
0.035 mm
grubość

Najczęściej
używany:
wysokość
ilość w
opakowaniu

B050	B100	B150	B200	B300
dziecięce 3.2 mm 50 szt.	przedtrzonowce 4.6 mm 100 szt.	przedtrzonowce z głęboką preparacją przyszyjkową 3.8 mm 50 szt.	trzonowce 6,4 mm 100 szt.	trzonowce z głęboką preparacją przyszyjkową 6,4 mm 50 szt.

WedgeWands®

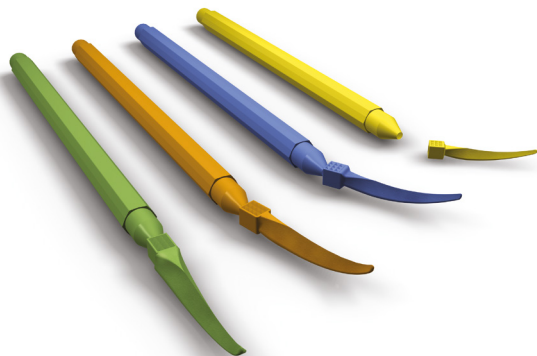


Matowe



Pozostają na miejscu. Cofanie się klinów zostało ograniczone dzięki teksturowanym powierzchniom oraz stopniowemu zwężaniu się boków.

Delikatny dotyk. Końcówka podobna do narty zapobiega wbijaniu się klina w koferdam lub brodawkę podczas zakładania, miękkie zaokrąglone brzości ograniczają urazy podczas zakładania oraz usuwania klinów.

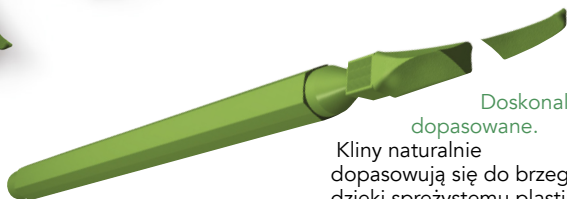

Doskonale dopasowane.

Kliny naturalnie dopasowują się do brzegów zębów dzięki sprężystemu plastikowemu materiałowi, z jakich są wykonane.

Pewne uszczelnienie. Każda strona oraz powierzchnia są jednolicie zaokrąglone dla dokładnego odwzorowania anatomicznego kształtu punktu stykowego.

Matowe kliny Wedge Wands®

Zestaw	Opis	Ilość	Cena
WK4	Wedge Wands® asortyment 400 szt. / po 100 w każdym rozmiarze	1op.	664 zł

Uzupełnienie

SWYL	kliny żółte X-Small	100 szt.	196 zł
SWBL	kliny niebieskie Small	100 szt.	196 zł
SWOR	kliny pomarańczowe Medium	100 szt.	196 zł
SWGR	kliny zielone Large	100 szt.	196 zł

WedgeWands®

Kliny

-17-

Cure-Through



Przezroczyste kliny Wedge Wands®

Zestaw	Opis	Ilość	Cena
WCK4	Przezroczyste kliny Wedge Wands® 400 szt. /po 100 w każdym rozm.	1op.	664 zł

Uzupełnienie

SWCYL	kliny żółte X-Small	100 szt.	196 zł
SWCBL	kliny niebieskie Small	100 szt.	196 zł
SWCOR	kliny pomarańczowe Medium	100 szt.	196 zł
SWCGR	kliny zielone Large	100 szt.	196 zł





Kliny A+ Wedge ograniczają krwawienie dziąseł

Dzięki czemu odbudowa zęba jest bardziej higieniczna oraz szybsza. Kliny dopasowują się do naturalnego konturu zęba, dokładnie odwzorowując anatomiczny kształt punktu stykowego. Są też dodatkowo pokryte warstwą siarczanu glinu który działa hemostatycznie na dziąsła. Kliny mają budowę zapobiegającą wysuwaniu się oraz są wystarczająco długie, aby zapewnić prawidłowe zakładanie pierścieni.

Kliny A+Wedge

Powłoka o działaniu hemostatycznym zapobiega krwawieniu a jednocześnie zaokrąglona budowa ogranicza urazy

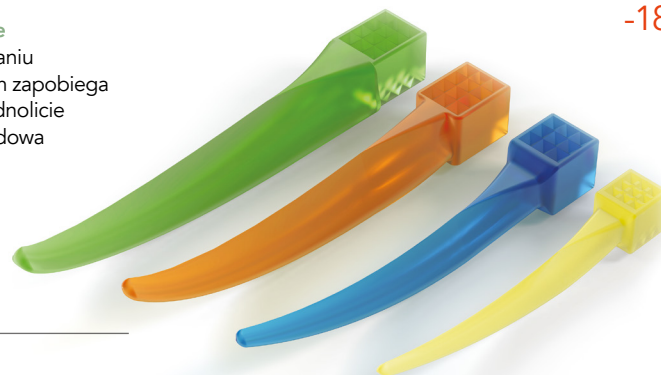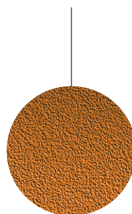

- Ogranicza krwawienie dziąseł
- Poprawia widoczność miejsca odbudowy
- Eliminuje konieczność nakładania oddzielnego środka hemostatycznego


A+Wedge™

Zestaw	Opis	Ilość	Cena
GWAK4	A+Wedge™ 200 szt. /po 50 sztuk każdego rozmiaru	1 op.	432 zł

Uzupełnienie

GWAYL	kliny żółte X-Small	100 szt.	220 zł
GWABL	kliny niebieskie Small	100 szt.	220 zł
GWAOR	kliny pomarańczowe Medium	100 szt.	220 zł
GWAGR	kliny zielone Large	100 szt.	220 zł

Wprowadź

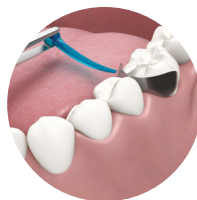

Poczekaj i rozpocznij odbudowę




Usuń i przepłukaj





Doskonały klin. Doskonały punkt stykowy.

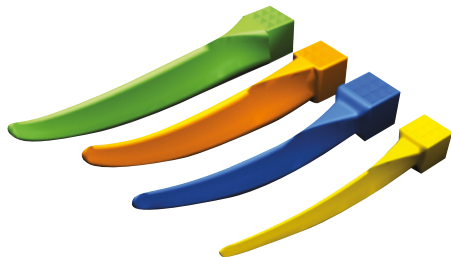

Jeżeli preferujesz tradycyjny sposób zakładania klinów przy pomocy kleszczyków lub pęsety, kliny G-Wedge zapewnią ci taki sam wspaniały kształt jak kliny Wedge Wands, lecz bez rękojeści aplikatora.

G-Wedge™

Zestaw	Opis	Ilość	Cena
GWK4	Zestaw G-Wedge™ 400 szt. / po 100szt. w każdym rozmiarze	400 szt.	584 zł

Uzupełnienie

GSWYL	kliny żółte X-Small	100 szt.	168 zł
GSWBL	kliny niebieskie Small	100 szt.	168 zł
GSWOR	kliny pomarańczowe Medium	100 szt.	168 zł
GSWGR	kliny zielone Large	100 szt.	168 zł



Doskonałe dopasowanie i uszczelnianie.



Pierwszy drewniany klin stworzony do pracy z systemem formówek sekcyjnych.

Kliny Soft Wedge to drewniane kliny międzyzębowe, które zostały zoptymalizowane do pracy z nowoczesnymi materiałami wypełniającymi. Zdolność do skompresowania się podczas zakładania, a następnie napężnienia w celu wypełnienia pustych przestrzeni powoduje, iż opracowywane miejsce pozostaje suche i czyste – absolutna konieczność dla obecnych restauracji przy użyciu bondów. Kliny Soft Wedge są dłuższe niż standardowe kliny, umożliwiając łatwe dopasowanie pod pierścieniem. Wykonane są z amerykańskiej lipy, co zapewnia najlepsze dopasowanie oraz kształt.

Soft Wedge™

Zestaw	Opis	Ilość	Cena
WDK4	Zestaw Soft-Wedge™ 400 szt. / po 100 szt w każdym rozmiarze	1 op.	356 zł

Uzupełnienie

WDYL	kliny żółte X-Small	100 szt.	296 zł
WDBL	kliny niebieskie Small	100 szt.	296 zł
WDOR	kliny pomarańczowe Medium	100 szt.	296 zł
WDR	kliny zielone Large	100 szt.	296 zł

BlueView® VariStrip™

Konturowane paski do zębów przednich.

Paski Blue View VariStrip™ są rewolucyjnymi, anatomicznie ukształtowanymi paskami do zębów przednich, zapewniającymi optymalne zaokrąglenie oraz optymalną wysokość paska, odpowiednimi praktycznie do każdej odbudowy przednich zębów. Plastikowy, anatomicznie ukształtowany pasek o grubości 0.05 mm zwęża się od jednego końca do drugiego. Umożliwia to założenie paska w punkcie styczonym, a następnie przesuwanie go do momentu aż będzie odpowiadał właściwej wysokości korony zęba. Wstępne ukształtowanie paska umożliwia łatwe odtworzenie anatomii zgryzowo dziąsłowej oraz uniknięcie płaskich powierzchni w niszach międzyzębowych.

Wypukły kształt: Zapewnia optymalne uwypuklenie oraz wysokość paska, umożliwiając wykonanie praktycznie każdej odbudowy przednich zębów.

Niebieski odcień: Zapewnia kontrast pomiędzy formówką a tkanką twardą zęba, nie utrudniając polimeryzacji kompozytu.

Zmienna wysokość, od 6 do 10 mm umożliwia dostosowanie do wysokości korony wszystkich przednich zębów.



Dr. Gabriele Conte,
Italy

- Pozwala uniknąć płaskich powierzchni w niszach międzyzębowych oraz powstania miejsc w których może gromadzić się pokarm, co może mieć miejsce w przypadku pasków metalowych starego typu.
- Doskonałe do ubytków klasy IV, usuwania diastemy, etc.

Blue View VariStrip™

Produkt	Opis	Ilość	Cena
VS02	VariStrip™	50 szt.	240 zł
VS01	VariStrip™	100 szt.	436 zł



Prezentujemy nowe
poddziałkowe paski
Margin Elevation
Band!

Technika głębokiego
poddziałkowego
opracowywania ubytków
stanowi przydatne podejście
do odbudowy ubytków
przyszykowych bez
konieczności przeprowadzania
interwencji chirurgicznej.



Zestaw

Opis

SMTK06-M

Paski Slick Bands™ SMTK06 typu Tofflemire
300 pasków w 9 rozmiarach - asortyment
100 klinów G-Wedge™ w 4 rozmiarach - asortyment

1272 zł

**Tam, gdzie formówka sekcyjna
po prostu się nie nadaje: zestaw
formówek Slick Bands™
typu Tofflemire daje radę!**

Łatwiej sięga do sąsiedniego zęba, co ułatwia opracowanie szerszego oraz głębszego punktu stycznego.



Lepsze uszczelnienie przydziąsłowe jest korzystne w przypadku każdego rodzaju odbudowy.

Tradycyjny pasek z wąskim „kominem”



Kształt Right Curve™ własnego projektu


Zwiększona krzywizna nowego paska Right-Curve™ zapewnia niezerwane uszczelnienie przydziąsłowe oraz łatwiej sięga sąsiadujących zębów pozwalając na opracowanie szerszego oraz głębszego punktu stycznego. Dzięki temu, po nałożeniu na ząb powstaje znacznie lepszy stożek w kształcie komina. Jest to dobry wybór dla wielu rodzajów odbudowy zęba.

- Bardzo szerokie preparacja stają się dużo łatwiejsze
- Poprawiona widoczność w przypadku odbudowy rdzenia

Pasek Margin Elevation Band

Pasek poddziąsłowy zapewnia najlepsze dopasowanie przydziąsłowe oraz odpowiedni kształt przy głębokich ubytkach przyszyjkowych.

Wysokość części poddziąsłowej paska została ograniczona, aby zapewnić lepsze dopasowanie przy głębokich ubytkach przyszyjkowych

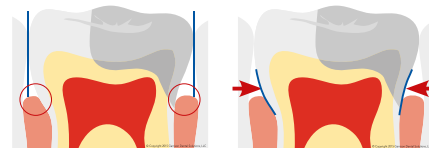

Przy zastosowaniu zwykłego paska

Przy zastosowaniu paska Margin Elevation Band


NOWOŚĆ

SMT500H10-M
Margin Elevation Band


SlickBands™

Tofflemire-style


#1 Uniwersalne
dla odbudowy
ogólnej

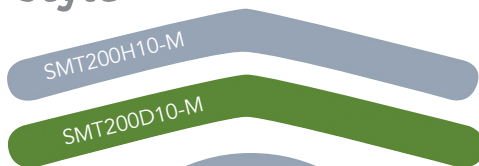


Paski RightCurve™
zapewniają punkt
styku osadzony
znacznie niżej
oraz ulepszone
uszczelnienie.
Doskonały do
odbudowy każdego
rodzaju

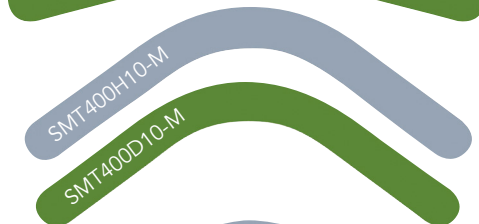

#13 Pedodontyczne
paski do krótkich
oraz mlecznych
zębów

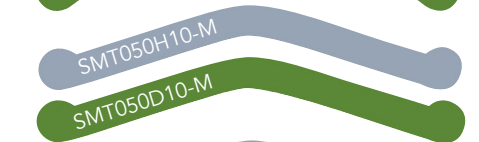

#2 Paski
poddziąsłowe,
do odbudowy
głębokich ubytków
przyszyjkowych

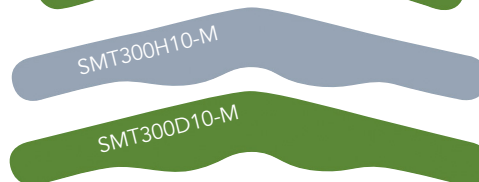

Paski typu Tofflemire mają 0,035 mm grubości.



Paski poddziąsłowe Margin Elevation Band
mają 0,04 mm grubości.

Wskazówka dla lekarza: W przypadku CAŁKOWITEGO braku punktu stykowego z sąsiednimi zębami należy skorzystać z zielonych pasków dla zapewnienia pełnej możliwości polerowania.

Jeżeli punkt stykowy pomiędzy sąsiadującymi zębami został zachowany, należy korzystać z szarych pasków i umieścić je pomiędzy najmniej zdeformowanymi punktami stycznymi.

Slick Bands™

Nr produktu	Opis	Ilość	Cena
Miękkie paski z powłoką antyadhezyjną (zielone)			
SMT200D10-M	#1 uniwersalne Tofflemire	50 szt.	160 zł
SMT400D10-M	Right-Curve	50 szt.	196 zł
SMT050D10-M	#13 pedodontyczne	50 szt.	160 zł
SMT300D10-M	#2 poddziąsłowe	50 szt.	160 zł

Standardowe paski Bands z powłoką antyadhezyjną (szare)

SMT200H10-M	#1 uniwersalne Tofflemire	50 szt.	140 zł
SMT400H10-M	Right-Curve	50 szt.	188 zł
SMT050H10-M	#13 pedodontyczne	50 szt.	140 zł
SMT300H10-M	#2 poddziąsłowe	50 szt.	140 zł

Margin Elevation Band (niebieskie)

SMT500H10-M	paski Margin Elevation Band	50 szt.	212 zł
-------------	-----------------------------	---------	---------------

Composi-Tight® :: Kleszcze do formówek

Precyzyjne zakładanie, najlepszy uchwyt

Precyzyjne zakładanie: Końcówki są zadarte pod kątem 75 stopni, ustawione w kierunku okluzyjno-dziąsłowym, zapewniając bardziej odpowiedni kąt zakładania niż pęseta do peletek bawełnianych. Małe końcówki z węgla umożliwiają uchwycenie formówki za jej górną krawędź w celu zapobieżenia zniekształceniu obszaru punktu stykowego na pasku

Najlepszy chwyt: końcówki z węgla wolframowego zapewniają doskonały uchwyt oraz pełną kontrolę w przypadkach gdzie dostęp jest utrudniony.



BFA-1

Wyłącznie do formówek.

Kleszcze do formówek

BFA-1 z zagiętymi końcówkami do umieszczania formówek od strony okluzyjnej.

596 zł

Kleszcze uniwersalne ::

Do zakładania wszelkiego rodzaju klamer do koferdamu oraz pierścieni do formówek sekcyjnych.



UNVF-100



Kleszcze Uniwersalne

UNVF-100 kleszcze uniwersalne **316 zł**

Kleszcze do pierścieni ::

Do zakładania wszelkiego rodzaju pierścieni w systemach formówek sekcyjnych.

Poprawiony chwyt umożliwiający łatwiejsze otwieranie pierścieni ogranicza zmęczenie dłoni, nawet w przypadku dużych zębów trzonowych.

Może być stosowany z wszystkimi popularnymi pierścieniami do formówek sekcyjnych.

Końcówki do pierścieni obejmują pierścień: Zapobiega to chwianiu się oraz ześlizgiwaniu się pierścienia.



AUMRDF-100



Kleszcze do zakładania pierścieni

AUMRDF-100 kleszcze do zakładania pierścieni **316 zł**



System FitStrip™ do wykańczania i konturowania przestrzeni międzyzębowych.

NOWOŚĆ!



FPSK01

676 zł

Zestaw FPSK01 zawiera:

- 2 uchwyty
- 2 paski ząbkowane FitStrips
- 4 paski jednostronne FitStrips (każdej gradacji)
- 4 paski dwustronne FitStrips (każdej gradacji)

- Zwykłe przekręcenie oznaczonego na kolorowo korpusu reguluje pasek z pozycji prostej do zaokrąglonej i doskonale nadaje się do:
 - konturowania powierzchni międzyzębowych przy wypełnieniach kompozytowych (ustawienie zaokrąglone)
 - redukowanie punktu styku przed lub po odbudowie (ustawienie proste)
- Najlepsze rozwiązanie w ortodoncji IPR/wysmuklanie zębów, przy zabiegach ortodontycznych takich jak Clear Correct™, Invisalign™, Six Month Smiles™
- Nadaje się do wielokrotnej sterylizacji i czyszczenia.



-25-

Uzupełnienie FitStrip™ - 4 szt.

FitStrip™ pojedyncze rozmiary znajdujące się w zestawie startowym					
Paski jednostronne					
Produkt	FPSXFSS-4	FPSFSS-4	FPSMSS-4	FPSCSS-4	FPSSAW-4
Grubość	0.08 mm	0.10 mm	0.13 mm	0.18 mm	0.05 mm
Cena 4szt.	324 zł	324 zł	324 zł	324 zł	324 zł
	super fine / żółty 15 µm	fine / czerwony 30 µm	medium / niebieski 46 µm	coarse / zielony 90 µm	ząbkowane
Paski dwustronne					
Produkt	FPSXFDS-4	FPSFDS-4	FPSMDS-4	FPSCDS-4	FPSSAW-4
Grubość	0.11 mm	0.15 mm	0.21 mm	0.30 mm	0.05 mm
Cena 4szt.	324 zł	324 zł	324 zł	324 zł	324 zł

Wszystkie rozmiary można zamawiać oddzielnie. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Rally™
Mini Polishers for Composite

Usuwać
Wygładzaj
Poleruj

Nowe mini gumki Garrison Rally™ Single Patient Mini-Polishers zapewniają lekarzom niezbędne narzędzie do wykończenia i wypolerowania uzupełnień. Nadają im długotrwałą, wysoki połysk.

Oznaczone kolorami, odpowiednio uporządkowane gumki Rally™ Mini-Polishers są dostępne w zestawach oraz jako uzupełnienia.

Jednorazowe mini gumki do
polerowania kompozytów
i ceramiki hybrydowej

NOWOŚĆ!



Zestaw startowy FPCK01-X Rally™

Asortyment 24 szt.

w tym 12 kielichów i 12 stożków
po 5 zgrubnych / niebieskie
po 5 średnioziarnistych / czerwone
po 2 drobnoziarniste / jasnoszare

244 zł

Jak działa PerForm™:

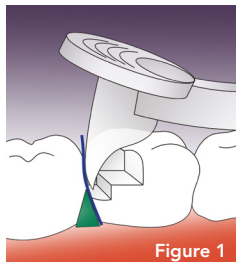


Figure 1

KROK 1:

Nałóż pierwszą warstwę kompozytu
Wciśnij PerForm w niespolimeryzowaną warstwę kompozytu i popchnij (dystalnie, ramka nr1)

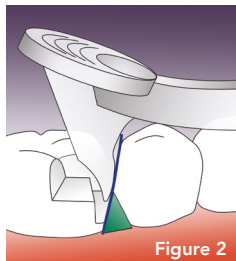


Figure 2

lub pociągnij (mezjalnie, ramka nr 2)


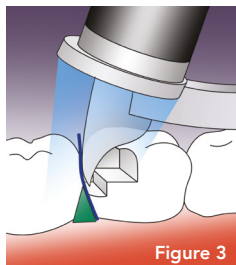


Figure 3

KROK 2:

Umieść lampę polimeryzacyjną bezpośrednio na soczewce Fresnela i rozpocznij polimeryzację.

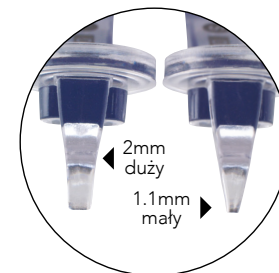

PerForm™ daje kontrolę.

- Poprawia punkty styczne niezależnie od systemu formówek
- Kontroluje wysokość i szerokość punktu styznego
- Zwiększa ciasność punktu styznego
- Unikatowa soczewka wspomaga dyfuzję światła w lampie.

PerForm™

Produkt	Opis	Ilość	Cena
CFK01	Zestaw PerForm™ - po 1szt w każdym rozmiarze		460 zł
CF100	Małe narzędzia 1.1 mm	2 szt.	460 zł
CF200	Duże narzędzia 2.0 mm	2 szt.	460 zł

„W celu zapewnienia ciasnego punktu styznego. należy aplikować pojedynczą warstwę płynnego kompozytu do poddziąsłowej części ubytku, a formówkę docisnąć do sąsiadującego zęba przy pomocy narzędzia do formowania punktów stychnych „PerForm”.

To sprawia, że punkt stychny jest ciasny i prawidłowo uformowany podczas polimeryzacji”

Dr. Jack D. Griffin, Jr. USA

Composite Instruments

Narzędzia do kompozytów pokryte antyadhezyjną powłoką z azotku tytanu

Nasze dwustronne multifunkcyjne narzędzia posiadają upychadła oraz łopatki do modelowania umieszczone na przeciwległych końcach. Przy odbudowie kompozytowej można teraz nakładać, upychać oraz modelować wypełnienie bez konieczności zmiany narzędzi!

- Lekkie uchwyty o dużej średnicy zapewniają ulepszoną ergonomię
- Końcówki posiadają antyadhezyjną powłokę ułatwiającą nakładanie oraz modelowanie kompozytów.
- 40% twardsze niż stal nierdzewna, posiadają mniej porowatą, antyadhezyjną powierzchnię.
- Odporne na różnorodne czyszczenie w tym przy pomocy ultradźwięków oraz sterylizacji



TN009,
Louis Mackenzie,
UK



TN008

5-w-1

Produkt
TN008

Opis

Narzędzie multifunkcyjne 5 w 1
2 upychadła, upychadło kulkowe, łopatka, upychadło stożkowe

Cena
396 zł



TN009

5-w-1

Produkt
TN009

Opis

Narzędzie multifunkcyjne 5 w 1
2 łopatki, 2 upychadła, upychadło stożkowe

Cena
396 zł

CompositeInstruments Narzędzia do kompozytów pokryte antyadhezyjną powłoką z azotku tytanu

Dwustronne upychadło do nici retrakcyjnych



TN010

Produkt
TN010

Opis

Dwustronne upychadło do nici retrakcyjnych

2 końcówki ząbkowane i 2 gładkie

Cena
316 zł

Nasze dwustronne multifunkcyjne narzędzia posiadają upychadła oraz łopatki do modelowania umieszczone na przeciwległych końcach. Przy odbudowie kompozytowej można teraz nakładać, upychać oraz modelować wypełnienia bez konieczności zmiany narzędzi!

Narzędzia do kompozytów



TN001

Produkt
TN001

Opis

Narzędzie ze średnimi łopatkami

Cena
172 zł

- Nakładanie kompozytów
- Retrakcja dziąseł w celu modelowania pod linią dziąseł
- Dopasowywanie formówek



TN002

Produkt
TN002

Opis

Narzędzie ze średnią łopatką i średnim upychadłem

172 zł

- Modelowanie ubytków klasy I, II, V
- Nakładanie kompozytu w odbudowach zachowawczych
- Dopasowywanie formówek

CompositeInstruments

Narzędzia do kompozytów pokryte
antyadhezyjną powłoką z azotku tytanu

Produkt **Opis**
TN003 **Narzędzie ze średnią łopatką z dużym upychadłem**

Cena
172 zł

TN003

- Kształtowanie przy dużych ubytkach klasy I,II,V
- Nakładanie materiału kompozytowego do dużych ubytków
- Wypukła końcówka upychacza minimalizuje ryzyko przyklejenia się kompozytu i wyciągnięcia materiału



TN004 **Narzędzie z super cienkimi łopatkami**

184 zł

TN004

- Pozwala sięgać pod dziąsło umożliwiając perfekcyjne kształtowanie wypełnienia
- Kształtowanie przestrzeni międzyzębowych
- Upychanie nici w szczelinach dziąsłowych



TN005 **Narzędzie z długimi super cienkimi łopatkami**

184 zł

TN005

- Pozwala głębiej sięgnąć w trudno dostępne miejsca
- Konturowanie i kształtowanie w bocznych zębach
- Kształtowanie przestrzeni międzyzębowych
- Upychanie nici w szczelinach dziąsłowych



TN006 **Narzędzie multifunkcyjne z małym i średnim upychadłem. 276 zł**

TN006

- Nakładanie materiałów kompozytowych w mniejsze ubytki klasy II i III
- Upychanie materiału w kierunku dziąseł
- Kształtowanie powierzchni okluzyjnych przy pomocy upychadła stożkowego





eZr™ gumki do polerowania umożliwiają dentystom bezpieczne i łatwe dopasowanie zarówno uzupełnień z cyrkonu, jak też dwukrzemianu litu.



- 1 Rozpocznij od wstępnego dopasowania i konturowania przy pomocy niebieskich gumek z gruboziarnistym nasypem. Użyj płasko zakończonych końcówki do powierzchni okluzyjnej/wargowej/językowej/policzkowej, a dysku do powierzchni międzyzębowych.



- 2 Następnie skorzystaj z zielonych gumek ze średnioziarnistym nasypem do wygładzenia powierzchni i wstępnego polerowania. Użyj stożka do bruzd na powierzchni okluzyjnej, kielicha do powierzchni wargowej/językowej/policzkowej, oraz dysku do powierzchni międzyzębowych.



- 3 Do końcowego polerowania na wysoki połysk skorzystaj z pomarańczowych gumek z drobnoziarnistym nasypem. Użyj stożka do bruzd na powierzchni okluzyjnej, kielicha do powierzchni wargowej/językowej/policzkowej, oraz dysku do powierzchni międzyzębowych.



FPZK01-X - eZr™ Kit

Zestaw FPZK01-X - eZr™

Zestaw 8 gumek

- 2 gumki do usuwania nadmiaru materiału (niebieskie)
- 3 gumki do wygładzania i wstępnego polerowania (zielone)
- 3 gumki do polerowania na wysoki połysk (pomarańczowe)

736 zł

Wypróbuj bez ryzyka z naszą 60 dniową gwarancją zwrotu pieniędzy.

Wprowadzanie poprawek z eZrTM dla Ciebie!

Prawidłowa obróbka cyrkonu jest od dłuższego czasu zagadnieniem kontrowersyjnym, z uwagi na zagrożenie mikrouszkodzeniami. Wykańczanie tego materiału przy pomocy odpowiednich narzędzi jest teraz możliwe i zapewnia długotrwałą stabilność odbudowy.

System polerujący eZrTM dostarcza rozwiązanie, które nie tylko zapewnia estetyczny rezultat końcowy w odniesieniu do cyrkonu, ale też zwiększa trwałość fizyczną poprzez polerowanie. Jest teraz możliwe uzyskanie dokładnie wypolerowanych, trwałych powierzchni cyrkonu.

Gumki do polerowania są trwałe, a w połączeniu z właściwościami pozwalającymi na szybkie usuwanie materiału dają wydajny i szybki system pozwalający momentalnie uzyskać wysoki połysk, bez konieczności użycia pasty polerującej.

- Umożliwia bezpieczne i łatwe dopasowanie w odniesieniu zarówno do cyrkonu, jak też dwukrzemianu litu.
- Opracowane przez nas gumki z diamentową powłoką ograniczają ryzyko wystąpienia odprysków oraz mikrouszkodzeń.
- Zapewnia niezrównanie gładko wypolerowaną powierzchnię okluzyjną, eliminując ścieranie przeciwnych zębów.
- Ogranicza efekt przegrzania, który może doprowadzić do przedwczesnego uszkodzenia materiału.
- Eliminuje konieczność korzystania z pasty do polerowania, redukując tym samym koszty przeprowadzenia całej procedury.

	Produkt	Opis	Nasyp	Cena
	FPZC030-X	szeroki stożek odwrócony, nasyp zgrubny, 5-szt/op	Usuwanie nadmiarów	592 zł
	FPZC010-X	stożek z płasko ściętym wierzchołkiem, nasyp zgrubny, 5szt/op	Usuwanie nadmiarów	448 zł
	FPZM010-X	stożek mały zielony, nasyp średni 5-szt/op	Wyglądanie i wstępne polerowanie	187 zł
	FPZM020-X	stożek duży, nasyp średni 5-szt/op	Wyglądanie i wstępne polerowanie	280 zł
	FPZM030-X	soczewka, nasyp średni 5-szt/op	Wyglądanie i wstępne polerowanie	280 zł
	FPZM040-X	zielony kielich nasyp średni 5-szt/op	Wyglądanie i wstępne polerowanie	280 zł
	FPZF010-X	pomarańczowy mały stożek, nasyp drobny 5-szt/op	Polerowanie na wysoki połysk	184 zł
	FPZF020-X	pomarańczowy duży stożek nasyp drobny 5-szt/op	Polerowanie na wysoki połysk	280 zł
	FPZF030-X	pomarańczowa soczewka drobny nasyp 5-szt/op	Polerowanie na wysoki połysk	280 zł
	FPZF040-X	pomarańczowy kielich nasyp drobny 5-szt/op	Polerowanie na wysoki połysk	280 zł

Kluczowi Liderzy Opinii pracujący na produktach Garrison



Dr. Martin von Sontagh, Hard, Austria

„Wykorzystuję System Composi-Tight® 3D XR przy prawie wszystkich odbudowach II klasy, gdyż jest on prosty i niezawodny. Dzięki szybkiemu i sprawnemu zakładaniu pierścieni, łatwo jest uzyskać ciasne punkty styczne. Jako, że pierścienie dokładnie się dopasowują, zminimalizowane jest wystąpienie nadmiaru materiału, co ogranicza czas potrzebny na odbudowę. System raz założony nie zeskakuje, ani

nie ześlizguje się. W rezultacie otrzymujemy dobrze ukształtowane anatomicznie punkty styczne, a odbudowa jest prawidłowa.”



Dr. Walter Denner, Fulda, Niemcy

„System formówek sekcyjnych Composi-Tight® 3D pozwala na opracowanie ciasnych, anatomicznie ukształtowanych przestrzeni międzyzębowych w łatwy i powtarzalny sposób. Formówki sekcyjne oznaczone w środku kolorem zapewniają doskonały kontrast oraz ułatwiają nakładanie warstw kompozytu. Mocny pierścień 3D gwarantuje dokładne dopasowanie

formówki do pozostałości zęba oraz pozostawia miejsce na założenie klina, co ogranicza nadmiar wypełnienia. W przypadku ciasnych przestrzeni można skorzystać z mniejszego pierścienia, w związku z czym można odbudować praktycznie 100% ubytków II klasy na bocznych częściach zębów przy pomocy tego systemu.”



Louis Mackenzie, Birmingham, Anglia

„Rewolucyjny kształt multi-funkcyjnych instrumentów kompozytowych TN009 Garrison powoduje, iż są one idealne do precyzyjnego nakładania oraz kształtowania kompozytu przy bezpośrednich odbudowach. Dzięki pięciu nieadhezyjnym końcówkom, możliwe jest szybkie, wydajne oraz przewidywalne kształtowanie okluzyjnej powierzchni zęba. Jeżeli możesz kupić tylko

jedno narzędzie do kompozytów, TN009 będzie doskonałą inwestycją.”



Dr. Carlos Fernández Villares, Madryt, Hiszpania

„Formówki oraz pierścienie Garrison umożliwiają nam odbudowę, których efekt końcowy jest anatomicznie identyczny jak w naturalnych zębach, z punktami stycznymi oraz obszarami które gwarantują odpowiednią funkcjonalność oraz estetykę.”



Dr. Rodolphe Zunzarren, Biarritz, Francja

„Formówki VariStrips™ od Garrison posiadają kilka istotnych cech charakterystyki, które łącznie sprawiają, iż są one perfekcyjne do odbudowy przednich zębów:

- *Niebieski kolor zapewnia idealną widoczność, nie ograniczając jednocześnie fotopolimeryzacji.*
- *Dzięki różnym rozmiarom w jednej formówce, VariStrips™ można łatwo dopasować zależnie od*

wysokości, na jakiej znajduje się ubytek, lub kąta odbudowy.

- *Zaokrąglony kształt pozwala uzyskać anatomiczny kształt zęba w przestrzeni międzyzębowej oraz poprawne punkty styczne*

Formówki VariStrips™, które są jednocześnie sztywne i cienkie, można łatwo założyć, a dzięki minimalnej grubości paska możliwe jest perfekcyjne zrekonstruowanie punktu stycznego”



Dr. Matthew Holyoak, Lytham St. Annes, UK

„Pierścień 3D XR od Garrison Dental Solutions jest istotnym ulepszeniem wszystkich wcześniejszych pierścieni; jest wyjątkowo uniwersalny. Nie udało mi się spotkać żadnego ubytku II klasy, z którym by sobie nie poradził. 3DXR nigdy nie przefrunął przez

gabinet! Używany z formówkami sekcyjnymi oraz klinami Wedge Wands® (lub A+ Wedges™), system ten pomaga uzyskać ciasny punkt stykowy oraz zapewnia wyjątkowo przewidywalną odbudowę kompozytową bocznych zębów za każdym razem.”

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia:

- Systemy Composi-Tight składają się z małych elementów o ostrych krawędziach. Zaleca się zastosowanie odpowiedniej izolacji (np. koferdamu) przed rozpoczęciem procedury zabiegu. Podobnie jak w przypadku wszystkich instrumentów wewnątrzustnych, należy zachować szczególną ostrożność podczas ich użycia i mocowania
- Drogi oddechowe: w przypadku dostania się klina, matrycy lub pierścienia mocującego do dróg oddechowych należy niezwłocznie wezwać pomoc lekarską.
- Przewód pokarmowy: w sytuacji przypadkowego połknięcia elementu systemu należy skierować pacjenta do lekarza celem usunięcia elementu z przewodu pokarmowego. W przypadku nudności lub pogorszenia samopoczucia należy niezwłocznie wezwać pomoc lekarską.

Aby uzyskać pełną instrukcję sterylizacji, przejdź na stronę www.garrisondental.com.

Instrukcje sterylizacji i czyszczenia pierścieni Composi-Tight 3D Rings

Sterylizacja:

- Stosować wyłącznie certyfikowane torebki lub rękawy do sterylizacji w autoklawie.
- Sterylizować produkt wyłącznie w autoklawie. Stosować cykl sterylizacji w temp. 132-134° C /210 kPa przez 6 minut, z czasem schnięcia 20-30 minut; podczas sterylizacji należy stosować się do instrukcji producenta. Nie przekraczać temp. 137°C.
- NIE poddawać produktu chemicznym procesom sterylizacji

Czyszczenie:

- Przed sterylizacją należy usunąć wszelkie widoczne osady
- W tym celu należy stosować miękkie, nylonowe szczotki lub pędzle do czyszczenia. Należy uważać, aby nie uszkodzić powłoki silikonowej Soft-Face w trakcie procesu czyszczenia.
- Jeżeli osad jest w dalszym ciągu widoczny należy powtórzyć powyższą procedurę.
- NIE stosować roztworów zawierających chemikalia takie jak alkohol, aceton lub ketony.

Garrison
Dental Solutions

Garrison Dental Solutions
Carlstrasse 50
52531 Uebach-Palenberg
Germany
Phone +49 (0)2451 971-409
Fax +49 (0)2451 971-410
E-Mail: info@garrisondental.net
Web: www.garrisondental.com

 **Kol-Dental®**
Eksperci Profesjonalistom

Kol-Dental Sp. z o.o. Sp.K
ul. Cylichowska 6,
04-769 Warszawa
Tel. (0-22) 514-62-00
Sekretariat: (22) 514-62-20
Infolinia: 801 390 015
E-mail: info@koldental.com.pl
Web: www.koldental.com.pl
Webshop: e-store.koldental.com.pl